


GoodKnight® 425

GoodKnight® 425 ST

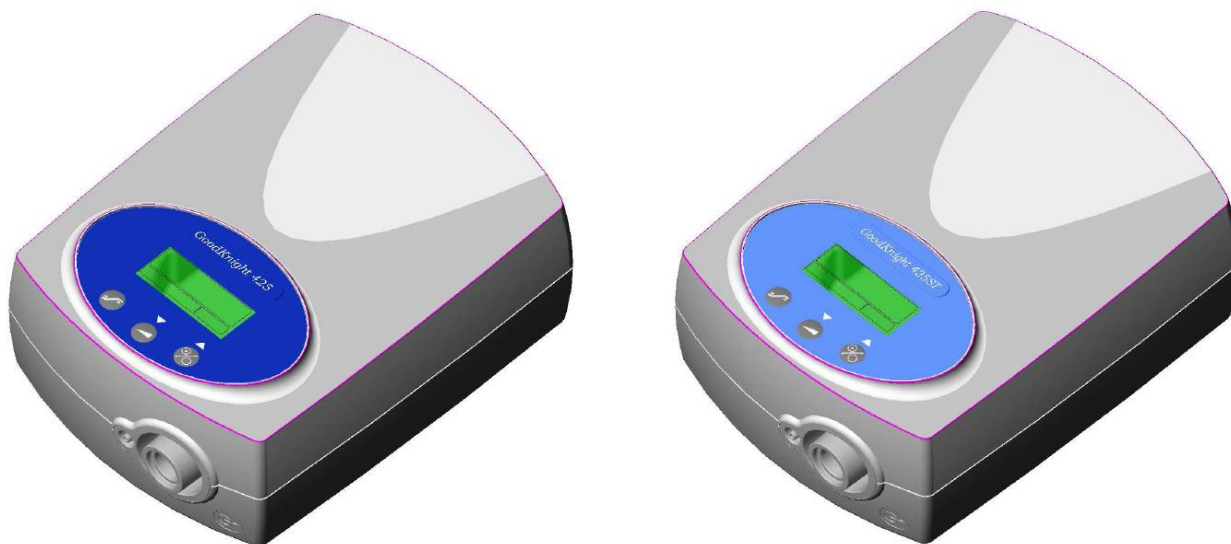

Manuel patient
Patientenhandbuch
Manuale del paziente
Gebruiksaanwijzing
voor de patiënt

GoodKnight 425 / GoodKnight 425 ST

Manuel patient	1
Patientenhandbuch	33
Manuale del paziente	65
Gebruiksaanwijzing voor de patiënt	97

GoodKnight® 425 **GoodKnight® 425 ST**

Manuel patient

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	5
INDICATIONS D'UTILISATION.....	6
CONDITIONS D'UTILISATION.....	6
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION.....	6
VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS	7
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	8
INSTALLATION	11
INSTALLATION STANDARD	11
INSTALLATION D'UN ADAPTATEUR D'OXYGÈNE (OPTIONNEL).....	12
INSTALLATION D'UN HUMIDIFICATEUR	13
INSTALLATION POUR ALIMENTATION PAR BATTERIE OU ALLUME-CIGARE	15
UTILISATION	16
DÉBUT DU TRAITEMENT	16
ARRÊT DU TRAITEMENT.....	17
UTILISATION DE LA RAMPE	18
ACCÈS AUX INFORMATIONS DE L'APPAREIL	20
RÉGLAGE DE L'HEURE.....	22
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	23
GOODKNIGHT 425	23
FILTRES D'ENTRÉE D'AIR	23
TUYAU	23
MASQUE NASAL.....	24
HUMIDIFICATEUR	24
QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES	25
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	28
PERFORMANCES DE L'APPAREIL	28
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES.....	28
CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE.....	28
CONDITIONS D'UTILISATION	28
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU BOÎTIER D'ALIMENTATION	28
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DE L'APPAREIL.....	29
SYMBOLES.....	29
MARQUAGE CE	29
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	29
PERFORMANCE ESSENTIELLE RELATIVE À LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE	30



L'appareil **GoodKnight 425** (GK425) est destiné à traiter les patients souffrant d'un **Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil** (SAOS). La caractéristique principale de cette pathologie est la survenue de multiples arrêts respiratoires au cours de la nuit qui sont provoqués par un rétrécissement des voies aériennes supérieures et qui perturbent le sommeil. La **GoodKnight 425** délivre deux niveaux de pression (l'un inspiratoire, l'autre expiratoire) qui empêchent les voies aériennes supérieures de s'obstruer et suppriment ainsi les arrêts respiratoires. Sur le modèle **GoodKnight 425 ST**, une fréquence de sauvegarde peut être réglée.

Il est indispensable que vous compreniez les limites d'utilisation de cet appareil. Nous vous demandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil **GoodKnight 425**.

Les informations qui y sont contenues sont destinées à vous aider à utiliser cet appareil dans des conditions optimales de sécurité et de fonctionnement. Pour toute question relative à l'équipement et à son utilisation, prenez contact avec votre équipe médicale ou votre prestataire de services à domicile.

C'est votre médecin qui a déterminé le traitement de votre maladie. Il a prescrit les différents paramètres que l'hôpital ou votre prestataire de services à domicile programmera entièrement. Vous ne devrez donc effectuer aucun réglage.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont valables à la fois pour la **GoodKnight 425** et la **GoodKnight 425 ST**, sauf indication contraire.

GoodKnight® est une marque déposée par Nellcor Puritan Bennett Inc.

Page laissée en blanc intentionnellement

Consignes de sécurité

Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre appareil, veuillez lire l'ensemble des informations contenues dans ce manuel d'utilisation. Pour plus de renseignements, contactez votre médecin ou votre prestataire de services à domicile. Veuillez accorder une attention plus particulière aux passages précédés par les termes suivants :

MISE EN GARDE

Signifie qu'il y a danger de mort ou d'accident pour vous-même ou d'autres personnes.

ATTENTION

Signifie qu'il y a possibilité de dommages matériels en ce qui concerne cet appareil ou tout autre.

REMARQUE

Indique des points particuliers visant à un fonctionnement plus efficace et pratique.

MISES EN GARDE

1. Avant toute utilisation, veuillez contrôler votre appareil **GoodKnight 425**, comme spécifié au chapitre "Vérification des éléments" en page 7.
2. En cas d'apport supplémentaire d'oxygène, respectez scrupuleusement les instructions et consignes de sécurité liées à l'utilisation d'oxygène.
3. N'utilisez que les accessoires qui vous ont été remis par votre prestataire de services. Vérifiez que vous disposez bien des instructions d'utilisation pour chacun de ces accessoires et prenez-en connaissance.
4. Utiliser exclusivement le module d'alimentation électrique spécifique fourni avec l'appareil.
5. Ne pas utiliser l'appareil en présence de vapeurs inflammables.
6. Respectez les instructions d'installation de l'appareil comme définies dans ce manuel au chapitre "Installation" en page 11. Eloignez notamment l'appareil de toutes sources d'eau.
7. Ne pas obstruer accidentellement ou intentionnellement la sortie d'air ou toute autre ouverture de l'appareil ou du circuit respiratoire.
8. Ne pas introduire de liquides ou d'objets dans la sortie d'air.
9. Il faut prendre contact avec l'équipe médicale si lors de l'utilisation du **GoodKnight 425**, les symptômes suivants apparaissent : sécheresse des voies aériennes ou du nez, sensibilité cutanée, nez qui coule, douleurs d'oreilles, gêne au niveau du sinus, somnolence diurne, changements d'humeur, désorientation, irritabilité ou pertes de mémoire.
10. En cas de dysfonctionnement de votre appareil, quel qu'il soit, prenez contact avec le prestataire de service à domicile. La maintenance de cet équipement relève de la responsabilité du personnel compétent uniquement. Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil.

Indications d'utilisation

L'appareil *GoodKnight 425* ou *GoodKnight 425ST* est indiqué pour le traitement des troubles respiratoires obstructifs du sommeil chez les patients dont le poids est supérieur à 30 kg.

L'appareil *GoodKnight 425* ou *GoodKnight 425ST* peut être équipé d'un humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O*. Celui-ci est destiné à réchauffer et augmenter le taux d'humidité de l'air délivré au patient par l'appareil à Pression Positive Continue. L'humidification est froide quand la fonction de chauffage est inactive et que le réservoir est rempli d'eau.

Conditions d'utilisation

L'appareil *GoodKnight 425* ou *GoodKnight 425ST* est destiné à être utilisé à domicile ou en centre de soins. Il peut être emmené aisément en voyage et utilisé dans un hôtel, en voiture ou en camion.

L'appareil *GoodKnight 425* ou *GoodKnight 425ST* étant un appareil médical électrique, veuillez respecter lors de son installation les consignes relatives à la compatibilité électromagnétique indiquées dans ce manuel.

Précautions d'utilisation

Comme tout appareil médical électrique, l'appareil *GoodKnight 425* est susceptible d'être perturbé par les équipements de communication RF portables ou portatifs.

L'appareil *GoodKnight 425* n'est pas un support de vie.

MISES EN GARDE

Comme tous les appareils générant une Pression Positive Continue, l'appareil *GoodKnight 425* ou *GoodKnight 425ST* ne doit pas être utilisé si vous souffrez d'une des pathologies suivantes. Si vous êtes concerné(e) par l'une d'elles, prenez contact avec votre médecin à l'initiation du traitement :

1. **Pneumoencéphale, traumatisme ou chirurgie récente avec séquelle de fistule cranio-nasopharyngée**
2. **Insuffisance cardiaque décompensée ou hypotension, particulièrement en cas de déplétion du volume sanguin ou en cas de troubles du rythme cardiaque**

ATTENTION

Comme tous les appareils générant une Pression Positive Continue, l'appareil *GoodKnight 425* ou *GoodKnight 425ST* doit être utilisé **avec précaution** dans les conditions suivantes :

- Patients déshydratés ou susceptibles d'être déshydratés à la suite d'une restriction hydrique ou d'un traitement diurétique, incluant les changements volontaires ou involontaires de traitement.
- Epistaxis massive ou antécédent d'épistaxis massive.
- Antécédent de traumatisme ou chirurgie récente avec séquelle de fistule cranio-nasopharyngée.
- Emphysème bulleux sévère ou antérieurement compliqué de pneumothorax.
- Sinusite aiguë, otite médiane ou perforation de la membrane tympanique.
- Claustrophobie sévère.

Vous ne devez pas utiliser d'humidificateur chauffant si vous présentez une dérivation des voies aériennes sus-glottiques.

Vérification des éléments

Pour pouvoir utiliser l'appareil **GoodKnight 425** équipé de son module d'alimentation électrique spécifique, vous devez au minimum disposer des éléments suivants :

- Un tuyau annelé dans lequel se trouve un second petit tuyau transparent.
- Un masque nasal avec tous ses accessoires de fixation comme définis dans la notice d'utilisation de ce masque.

En plus de ces accessoires, votre médecin a pu vous prescrire l'utilisation d'un humidificateur. Vérifiez alors que vous disposez de tous les accessoires associés à cet humidificateur et définis dans la notice d'utilisation de ce dernier.

Vérifier consciencieusement l'appareil et chaque accessoire. Vérifiez notamment que les tuyaux ne sont pas endommagés et que le masque ne présente aucune fissure ou altération au niveau de la coque et du soufflet (partie du masque venant en contact avec le visage).

Contrôler l'appareil et le module d'alimentation électrique, et vérifier qu'ils ne présentent aucun défaut apparent. Brancher l'appareil sur le secteur par l'intermédiaire de son module d'alimentation électrique en vous référant aux étapes 4 et 5 du chapitre "Installation standard" en page 11.

Le type de l'appareil s'affiche temporairement, puis fait place à l'écran de veille suivant indiquant l'heure (la valeur affichée est donnée à titre d'exemple) :

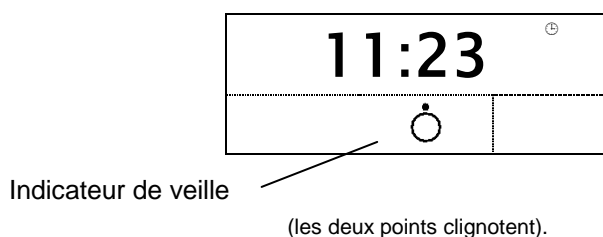


Figure 1 – Vue de l'afficheur quand l'appareil est en veille

Si l'alimentation a été interrompue puis rétablie alors que l'appareil fonctionnait, l'afficheur indique la pression. L'appareil est dans le même mode que lors de la déconnexion du cordon d'alimentation et se règle sur les pressions utilisées lors du débranchement.

Mettre l'appareil en service en appuyant sur le bouton mise en service/veille (repère 4 de la Figure 2 – Vue de dessus, page 9). La turbine doit se mettre en marche et le bruit doit être régulier.

Arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton mise en service/veille et débrancher le cordon du module d'alimentation du secteur.

MISE EN GARDE

En cas de problèmes ou si vous constatez une anomalie, ne commencez pas le traitement et prenez contact avec votre prestataire de services à domicile.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'appareil **GoodKnight 425** est alimenté par un module d'alimentation électrique externe et équipé d'accessoires spécifiques. L'appareil est décrit ci-après.

Voir les figures 2, 3 et 4 en page 9.

1. Afficheur

Permet de visualiser différentes informations telles que la pression, les réglages de l'appareil ou l'heure. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Accès aux informations de l'appareil" en page 20.

2. Bouton d'accès aux informations

Permet d'accéder aux différentes informations concernant l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Accès aux informations de l'appareil" en page 20.

3. Bouton de rampe

Permet d'activer ou d'arrêter la rampe de montée en pression (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Utilisation de la rampe" en page 18). Il est également utilisé pour diminuer la valeur des paramètres lors des réglages de l'appareil.

4. Bouton de mise en service/veille

Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Il est également utilisé pour augmenter la valeur des paramètres lors des réglages de l'appareil.

5. Prise de pression

Connecteur sur lequel vient se brancher le petit tuyau. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Installation" en page 11.

6. Connecteur de sortie

Sortie d'air sur laquelle le gros tuyau du circuit patient vient se connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Installation" en page 11.

7. Connecteur de liaison série

Ce connecteur est uniquement destiné à être utilisé par votre médecin ou votre prestataire de services. Ne rien y brancher.



8. Entrée d'alimentation

Permet d'alimenter l'appareil par le module d'alimentation ou par une batterie externe. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Installation pour alimentation par batterie ou allume-cigare" en page 15.

9. Filtres d'entrée d'air

Ces filtres évitent à la poussière d'entrer dans l'appareil et dans le flux d'air. Veuillez vous reporter au chapitre "Entretien et nettoyage" en page 23 pour plus d'informations sur les consignes d'entretien de ces filtres.

Les éléments des figures ci-dessous sont décrits en page 8.

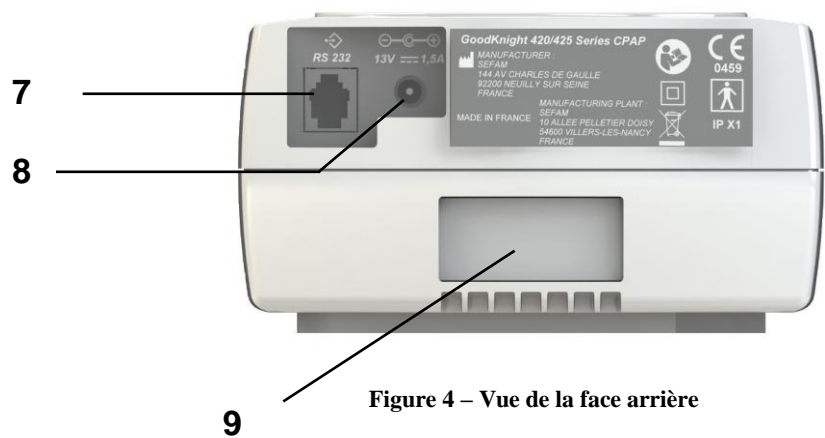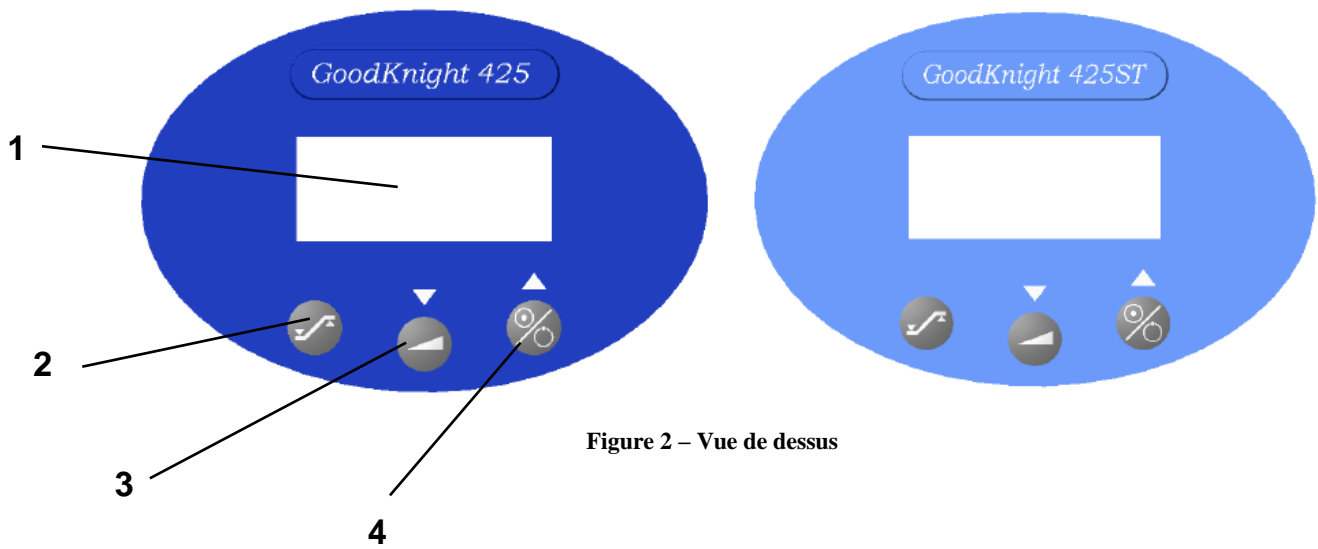

Page laissée en blanc intentionnellement

INSTALLATION

Ce chapitre vous indique comment connecter les différents accessoires et câbles à votre appareil. Avant de commencer l'installation, veuillez contrôler votre appareil et ses accessoires en vous référant au chapitre "Vérification des éléments" en page 7.

ATTENTION

- D'une façon générale, placez l'appareil sur une surface stable. Evitez de le placer trop près d'un mur ou de tout autre obstacle, ce qui aurait pour effet de gêner l'arrivée d'air dans l'appareil.
- Ne pas utiliser le dispositif *GoodKnight* 425 lorsqu'il est attaché à ou posé sur un appareil autre que l'humidificateur *GoodKnight* H₂O.

Installation standard

1. Connecter le tuyau annelé à l'appareil. Pour cela, connecter le petit tuyau qui ressort par l'un des gros embouts du tuyau annelé à la prise de pression (repère 5 de la Figure 3 – Vue générale en page 9). Connecter le gros embout du tuyau annelé au connecteur de sortie de l'appareil (repère 6 de la Figure 3 – Vue générale en page 9).

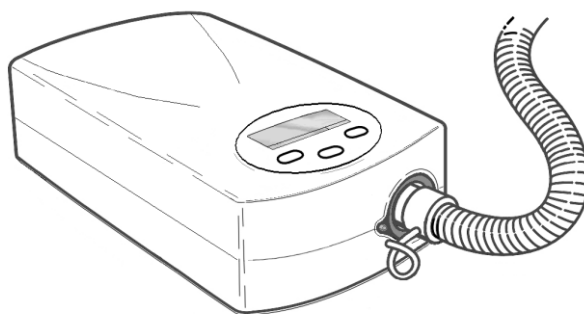


Figure 5 – Connexion du tuyau annelé à l'appareil

MISE EN GARDE


Veiller à ce que le petit tuyau ne soit ni tordu, ni coudé.

2. Préparer le masque comme défini dans la notice d'utilisation de celui-ci.
3. Connecter le masque à l'embout libre du tuyau annelé.
4. Connecter le câble du module d'alimentation sur l'entrée d'alimentation située en face arrière de l'appareil (repère 8 de la Figure 4 – Vue de la face arrière en page 9).

ATTENTION

Utiliser exclusivement le module d'alimentation spécifique fourni avec l'appareil.

5. Brancher la prise du module d'alimentation sur le secteur. Le type de l'appareil s'affiche temporairement, puis l'écran de veille suivant indiquant les heures et les minutes :

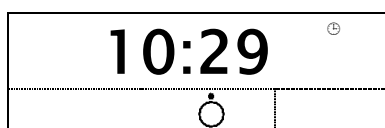

Les deux points clignotent.

6. L'appareil est prêt à fonctionner. Veuillez vous reporter alors au chapitre "Utilisation" en page 16.

Installation d'un adaptateur d'oxygène (optionnel)

En cas d'apport supplémentaire d'oxygène, il faut utiliser un adaptateur d'oxygène équipé d'une valve spécifique destinée à empêcher l'accumulation d'oxygène dans l'appareil.

Référez-vous aux instructions du fabricant pour l'installation, le nettoyage et l'entretien de cette valve spécifique.

Pour installer l'adaptateur d'oxygène, remplacez l'étape 3 de l'installation standard par l'étape suivante :

- Connectez un côté de l'adaptateur d'oxygène à l'embout libre du circuit patient et l'autre côté au masque.

Vous pouvez alors reprendre les étapes 4 à 6 de l'installation standard pour poursuivre l'installation du matériel.

MISES EN GARDE

- Suivez toujours les instructions de l'équipe médicale ou du Prestataire de services à domicile en cas d'utilisation d'oxygène.
- Ne fumez pas en présence d'oxygène.
- N'injectez pas d'oxygène par l'entrée d'air de l'appareil.
- Suivez scrupuleusement les instructions de début de traitement et d'arrêt de traitement, au chapitre "Utilisation" en page 16.
- Si vous utilisez un apport d'oxygène, arrêtez le débit d'oxygène lorsque l'appareil ne fonctionne pas. En effet, si l'apport d'oxygène est maintenu alors que l'appareil est éteint, l'oxygène délivré dans le circuit patient peut s'accumuler dans l'enceinte de l'appareil et créer un risque de feu.

ATTENTION

A un débit fixe d'oxygène, la concentration d'oxygène inhalée varie en fonction des réglages de la pression, de votre respiration, de la sélection du masque et du débit de fuite. Cette précaution s'applique à la plupart des appareils à Pression Positive Continue.

Installation d'un humidificateur

Veillez vous reporter à la notice d'utilisation de votre humidificateur pour plus d'informations sur la préparation de celui-ci et sur les consignes de sécurité.

MISE EN GARDE

L'humidificateur doit avoir été rempli d'eau avant d'être connecté à l'appareil *GoodKnight 425*.

ATTENTION

Afin d'éviter des dommages causés par l'eau, veillez à ce que l'humidificateur soit toujours placé plus bas que l'appareil *GoodKnight 425*.

Remplacez l'étape 1 de l'installation standard par les étapes ci-dessous :

MISE EN GARDE

Les instructions suivantes sont des consignes générales concernant la connexion de l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O*. Veuillez toujours vous conformer aux instructions spécifiques fournies avec votre humidificateur pour une utilisation correcte et sûre.

1. Retirer le réservoir d'eau.
2. Verser de l'eau avec précaution dans le trou prévu à cet effet (vous référer au paragraphe "Installation" du manuel d'utilisation *GoodKnight H₂O*), en veillant à ne pas dépasser le repère de niveau maximum.
3. Installer l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O* sur une surface plane.
4. Equiper l'appareil *GoodKnight 425* de l'adaptateur de connexion fourni avec l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O*.
5. Positionner l'appareil *GoodKnight 425* sur l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O* comme montré sur la Figure 6 – Connexion de la *GoodKnight 425* à l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O*.
 - L'avant de l'appareil *GoodKnight 425* doit être tourné vers les connexions de l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O*.
 - La base de l'appareil *GoodKnight 425* doit s'insérer dans les renforcements de l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O* prévus à cet effet.

ATTENTION

- Placer l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O* et le générateur de deux niveaux de pression sur une surface plate et stable et les tenir éloignés de toutes sources de flammes.
- Ne jamais mettre l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O* sur l'appareil *GoodKnight 425* car l'eau risquerait de s'écouler dans l'appareil et de l'endommager.



Figure 6 – Connexion de la GoodKnight 425 à l'humidificateur chauffant GoodKnight H₂O

6. Replacer le réservoir en veillant à ne pas renverser d'eau, jusqu'à ce que le connecteur d'entrée de l'humidificateur atteigne la butée sur l'adaptateur de connexion.
7. Connecter le petit tuyau qui ressort par l'un des embouts du gros tuyau annelé à la prise de pression de l'appareil *GoodKnight 425*.
8. Connecter l'embout du gros tuyau annelé au connecteur de sortie situé sur le réservoir d'eau de l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O*.

Vous pouvez alors reprendre les étapes 2 à 6 de l'installation standard décrite en page 11 pour poursuivre l'installation du matériel.

ATTENTION

Il est recommandé de déconnecter l'appareil *GoodKnight 425* de l'humidificateur chauffant *GoodKnight H₂O* et de vider le réservoir avant de déplacer ou transporter l'ensemble, afin d'éliminer le risque d'introduction d'eau dans l'appareil, ce qui pourrait lui causer des dommages irréversibles.

Installation pour alimentation par batterie ou allume-cigare

La *GoodKnight 425* peut être alimentée par une batterie 12 Volts en utilisant le câble optionnel spécifique prévu à cet effet.

ATTENTION

- Ne pas utiliser de câble d'alimentation batterie autre que celui fourni avec la *GoodKnight 425*. Vous risqueriez d'endommager l'appareil et votre batterie.
- N'utiliser que des sources de courant continu 12 Volts et respecter la polarité de branchement (+ et -).

Pour l'installation du câble batterie, remplacez les étapes 4 et 5 de l'installation standard par les étapes suivantes :

1. Connecter le câble d'alimentation batterie à l'entrée d'alimentation située en face arrière de l'appareil (repère 8 de la Figure 4 – Vue de la face arrière en page 9).
2. Connecter l'autre côté du câble directement sur la batterie.

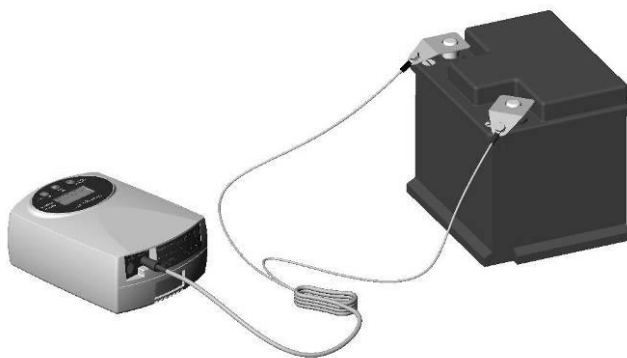


Figure 7 – Connexion de la GoodKnight 425 au câble d'alimentation batterie

REMARQUE

La *GoodKnight 425* peut avoir une consommation élevée. Nous vous conseillons d'utiliser une batterie complètement chargée.

La *GoodKnight 425* peut également être alimentée par une prise allume-cigare en utilisant le câble allume-cigare optionnel prévu à cet effet.

Pour cela, remplacez les étapes 4 et 5 de l'installation standard par les étapes suivantes :


1. Connecter le câble allume-cigare à l'entrée d'alimentation située en face arrière de l'appareil (repère 8 de la Figure 4 – Vue de la face arrière en page 9).
2. Connecter l'autre côté du câble directement sur la prise allume-cigare.

UTILISATION

Ce chapitre vous expose comment utiliser l'appareil après l'avoir installé comme décrit au chapitre précédent. Il vous indique également comment utiliser la fonction de montée en pression (rampe) et comment accéder aux informations de réglages (vous n'aurez pas la possibilité de modifier ces réglages, mais uniquement celle de les visualiser).

Début du traitement

L'appareil étant installé conformément aux consignes données au chapitre précédent, veuillez suivre les instructions suivantes pour commencer le traitement :

1. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton de mise en service/veille .
L'afficheur affiche la pression mesurée au masque ainsi que deux indicateurs montrant l'un le fonctionnement de l'appareil et l'autre celui de l'observance (voir Figure 8 - Vue de l'afficheur quand l'appareil est en fonctionnement).

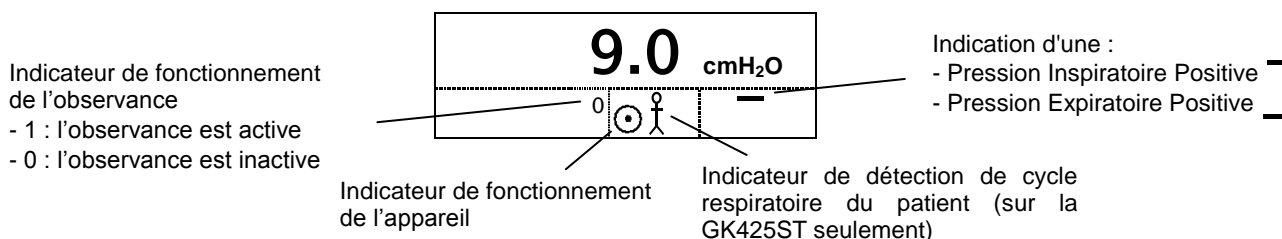


Figure 8 - Vue de l'afficheur quand l'appareil est en fonctionnement

REMARQUES

- L'unité d'affichage de pression, hPa ou cmH₂O (ci-dessus), est réglée par le praticien.
 - L'indicateur de fonctionnement de l'observance ne s'affiche qu'après 15 minutes de fonctionnement de l'appareil.
2. Mettre le masque nasal en place conformément aux instructions d'utilisation de celui-ci. S'il s'agit d'un masque avec fuite, il comprend un orifice par lequel les gaz expirés seront évacués et ne pourront être réinspirés. Dans le cas de l'utilisation d'un masque sans fuite, votre médecin doit vous fournir un raccord à fuite Pirouette™ ou équivalent permettant l'évacuation des gaz le plus près possible du nez. **Respirer normalement.**

MISE EN GARDE

Ne jamais obstruer l'orifice de fuite du masque car il permet l'évacuation continue de l'air. Quand l'appareil fonctionne, l'air produit chasse l'air expiré par le trou de fuite du masque. Par contre, si l'appareil ne fonctionne pas, il n'y aura plus assez d'air frais produit au niveau du masque et l'air expiré risque d'être réinspiré, ce qui pourrait mener en plusieurs minutes et dans certaines circonstances à un phénomène de suffocation.

3. Si vous utilisez un humidificateur chauffant, mettre celui-ci en service conformément à ses instructions d'utilisation.
4. Si vous utilisez de l'oxygène, ouvrir le débit maintenant.

MISES EN GARDE

- Lorsque l'appareil est en mode fonctionnement, vérifier qu'il délivre bien un débit d'air. Dans le cas contraire, l'arrêter immédiatement et contacter le prestataire de services.

- À de faibles niveaux de pression, le débit à travers l'orifice d'aération peut être insuffisant pour évacuer tout le gaz expiré du circuit patient. Certains phénomènes de réinspiration peuvent se produire.


Arrêt du traitement


L'appareil étant en fonctionnement, veuillez suivre les instructions suivantes pour arrêter le traitement :

1. Si vous utilisez de l'oxygène, arrêter le débit maintenant.
2. Si vous utilisez un humidificateur chauffant, l'arrêter comme défini dans les instructions d'utilisation de celui-ci. Débrancher toujours l'humidificateur avant d'arrêter l'appareil.

ATTENTION

Après utilisation, déconnecter l'humidificateur de l'appareil afin d'éviter que de l'humidité ne pénètre dans celui-ci.

3. Enlever le masque nasal.
4. Arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en service/veille . L'appareil repasse alors en veille et affiche l'écran de veille indiquant l'heure :

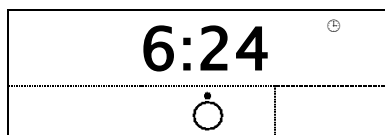

Utilisation de la rampe

La fonction rampe permet de rendre progressive la montée en pression. La pression du patient est réduite à la pression de départ de rampe et augmentée ensuite aux niveaux de pression. Veuillez tout d'abord procéder au réglage de la pression de départ de rampe de votre appareil **GoodKnight 425** en suivant les instructions suivantes :

REMARQUE

Si le temps de rampe est réglé à zéro, ce réglage n'est pas accessible.

La pression de départ de rampe peut être réglée à une valeur comprise entre 3 cmH₂O et le niveau de Pression Expiratoire Positive prescrit par votre médecin. Cette fonction vous permet d'ajuster le niveau de pression adéquate pour pouvoir vous endormir.

Pour accéder au menu de réglage des paramètres, il suffit d'appuyer pendant une seconde sur le bouton d'accès aux informations montré sur la Figure 9 – Vue des boutons de réglage ci-après, que l'appareil soit en veille ou en fonctionnement.


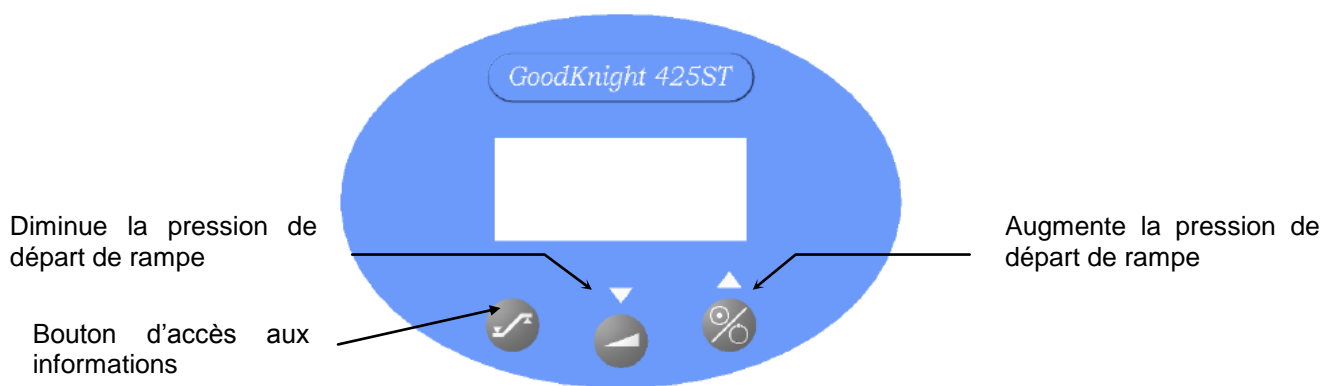




Figure 9 – Vue des boutons de réglage


Il faut ensuite appuyer sur ce bouton le nombre de fois nécessaires pour afficher l'écran suivant :

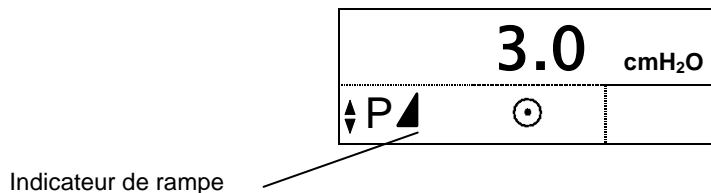

La valeur de la pression de départ de rampe peut alors être augmentée ou diminuée en utilisant les touches de mise en service/veille  et de rampe .

La fonction rampe vous permet de rendre la montée en pression progressive. Ainsi, les niveaux de pression sont réduits au début du traitement pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez également utiliser cette fonction si vous devez vous lever pendant la nuit et avez du mal à vous rendormir. Le temps de montée de la pression jusqu'aux pressions finales est prescrit par votre équipe médicale et le réglage effectué par votre prestataire de services est compris entre 0 (pas de montée progressive) et 30 minutes par pas de 5 minutes. Le temps de montée de la pression peut avoir été préréglé sur 0 selon la prescription de votre équipe médicale. Dans ce cas, la fonction rampe est inactive et la pression sur le bouton de rampe situé sur la face avant de l'appareil n'aura aucun résultat (repère 3 de la Figure 2 – Vue de dessus en page 9).

1. Pour initialiser la rampe, il suffit d'appuyer sur le bouton de rampe lorsque l'appareil est allumé. L'indicateur de rampe s'affiche sur l'écran et la pression diminuera jusqu'à une valeur basse, puis elle augmentera progressivement jusqu'aux niveaux de pression prescrits, de façon à ne pas vous réveiller. L'appareil fonctionnera normalement toute la nuit en délivrant les pressions de traitement à moins que vous ne pressiez à nouveau sur le bouton de rampe, auquel cas la pression rechutera au niveau de rampe que vous aurez choisi.
2. Pour mettre fin à la rampe, presser à nouveau sur le bouton de rampe et la fonction sera inhibée. Il est possible de réinitialiser la rampe en réactivant la fonction rampe (l'indicateur de rampe s'affiche lorsque celle-ci est activée).

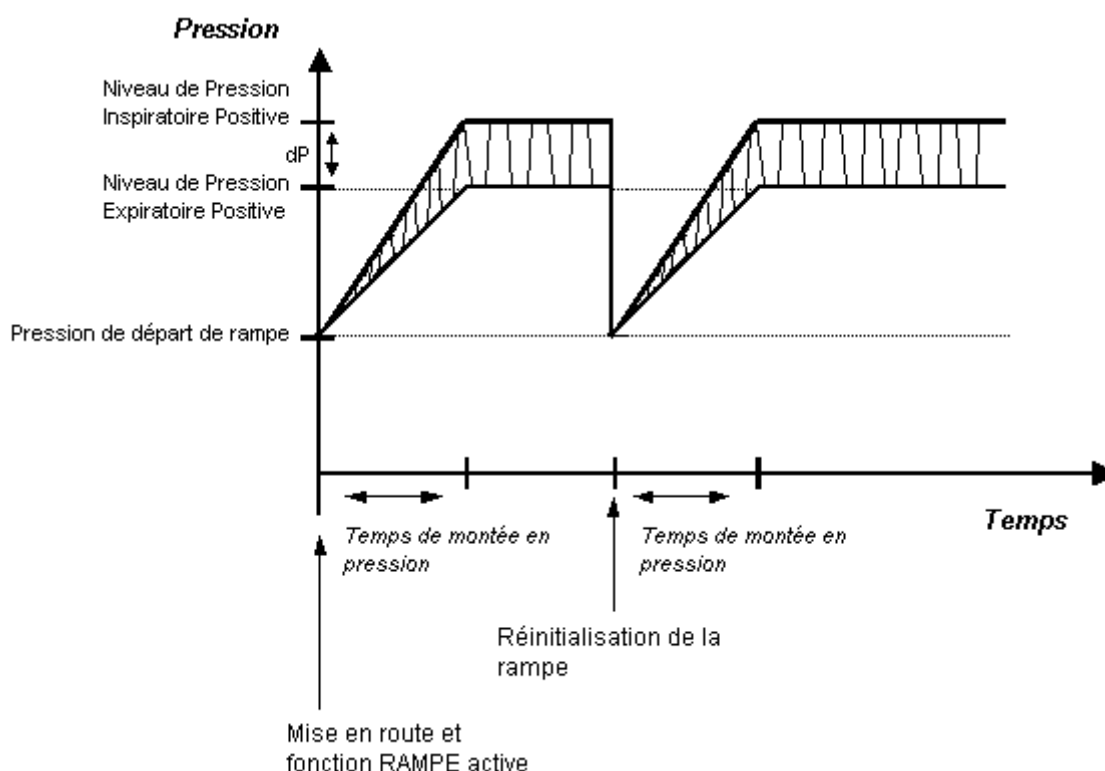

**Figure 10 – Evolution de la pression en fonction du temps
lors de l'activation de la fonction rampe**

Accès aux informations de l'appareil

L'afficheur permet de visualiser les différentes informations de réglages de la **GoodKnight 425** (repère 1 de la Figure 2 – Vue de dessus en page 9).

Les informations de réglages sont accessibles que l'appareil soit en veille ou en fonctionnement. Pour cela, il suffit d'appuyer **pendant une seconde sur le bouton d'accès aux informations** (repère 2 de la Figure 2 – Vue de dessus en page 9). A chaque appui supplémentaire sur cette touche, vous accédez à de nouvelles données.


REMARQUE

Dans les écrans suivants, l'appareil est présenté en mode fonctionnement et toutes les valeurs affichées sont données à titre d'exemples.

Appuyer une
seconde sur



L'écran affiche :

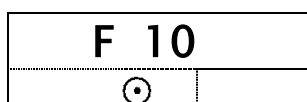


La **fréquence de sauvegarde** de votre appareil.

REMARQUE


Cette fonction est accessible uniquement sur la **GoodKnight 425 ST**.

Appuyer sur

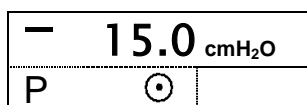


Le niveau de **Pression Inspiratoire Positive IPAP** réglé de votre appareil (niveau haut de pression pour l'inspiration).

Appuyer sur

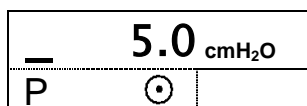


Le niveau de **Pression Expiratoire Positive EPAP** réglé de votre appareil (niveau bas de pression pour l'expiration).

Appuyer sur

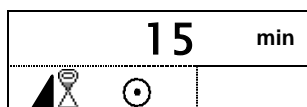


Le **temps de rampe** réglé par le médecin (temps mis par l'appareil pour passer de la pression de départ de rampe aux niveaux de pression de référence).

Appuyer sur

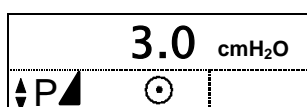


La **pression de départ de rampe** (niveau de pression en début de rampe) ; ce paramètre est réglable et visible seulement si le temps de rampe est différent de 0.

Le symbole  utilisé montre que le paramètre peut être réglé. Vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur affichée en utilisant les touches de mise en service/veille ou de rampe.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Utilisation de la rampe" en page 18.

Appuyer sur

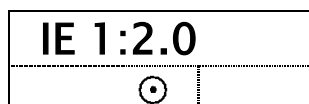


La **valeur du rapport I/E** (rapport temps Inspiratoire / temps Expiratoire).

REMARQUE


Cette fonction est accessible uniquement sur la *GoodKnight 425 ST*.

Appuyer sur

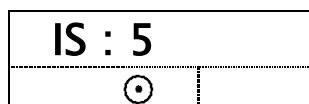


La **sensibilité inspiratoire** réglée par le médecin (sensibilité de détection du début de la phase inspiratoire de la respiration).

Appuyer sur

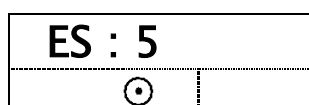


La **sensibilité expiratoire** réglée par le médecin (sensibilité de détection du début de la phase expiratoire de la respiration).

Appuyer sur

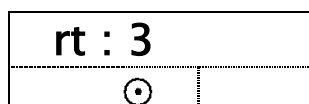


Le **temps de montée en pression** réglé par le médecin (temps mis par l'appareil pour passer du niveau de EPAP au niveau de IPAP).

Appuyer sur

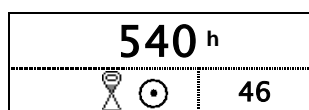


La **valeur du compteur horaire** (temps de fonctionnement de l'appareil). La valeur affichée en bas à droite représente les minutes.

Appuyer sur

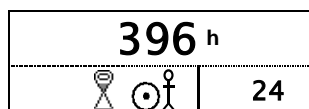

La **valeur du compteur de temps d'utilisation** (temps pendant lequel vous avez respiré avec le masque). La valeur affichée en bas à droite représente les minutes.


Appuyer sur

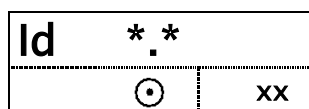


La **version du logiciel intégré à l'appareil *GoodKnight 425***. Le numéro de version est indiqué sur deux chiffres (*), par exemple l'écran peut afficher : Id 1.0.

Pour quitter le menu de réglage des paramètres, appuyer à nouveau sur le bouton d'accès aux informations.

Dans ce cas, l'afficheur montre à nouveau l'un des deux écrans suivants indiquant l'état de votre appareil (les valeurs indiquées sont données à titre d'exemples).

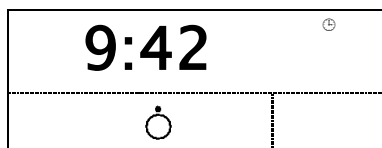

L'appareil est en veille.

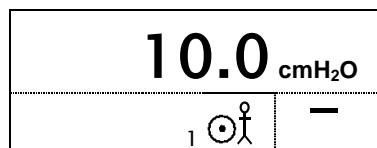


L'appareil est en service.

REMARQUE

Une sortie du menu de réglage des paramètres se fait automatiquement lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes.

Réglage de l'heure

Vous pouvez procéder au réglage de l'heure quand l'appareil est en veille uniquement. Pour cela, il suffit d'appuyer une seconde sur le bouton de rampe (repère 3 de la Figure 2 – Vue de dessus en page 9), puis simultanément sur le bouton de mise en service/veille (repère 4 de la Figure 2 – Vue de dessus en page 9). Une fois que les boutons sont relâchés, le symbole de réglage \updownarrow apparaît sous l'heure, comme montré sur l'écran ci-après :

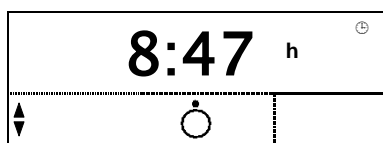

La lettre h indiquant l'heure clignote, vous pouvez alors augmenter ou diminuer la valeur de l'heure par l'intermédiaire des touches de mise en service/veille ou de rampe.

Pour procéder au réglage des minutes, il suffit d'appuyer sur le bouton d'accès aux informations, le symbole des minutes clignote à son tour et vous pouvez régler les minutes en suivant la même procédure que pour l'heure. Presser à nouveau le bouton d'accès aux informations pour sortir du menu.

REMARQUE

Une sortie du menu de réglage des paramètres se fait automatiquement lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre appareil **GoodKnight 425**, veuillez respecter les instructions d'entretien définies ci-dessous.

GoodKnight 425

La coque de la machine ne nécessite pas d'entretien particulier. Lorsque cela s'avère nécessaire, nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humidifié par de l'eau chaude savonneuse. Bien essuyer l'appareil.

MISES EN GARDE

- Débrancher toujours l'appareil de la source d'électricité avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser de vaporisateur. En effet, des résidus peuvent se loger dans la sortie d'air, le filtre mousse ou à l'intérieur de l'appareil. Ceci peut causer une irritation des voies respiratoires due aux résidus de produits chimiques.

Par ailleurs, il est recommandé de faire procéder à un contrôle de la pression de l'appareil au moins une fois par an.

Filtres d'entrée d'air

Changer les filtres dès qu'ils sont déchirés ou souillés (se reporter au repère 9 de la Figure 4 – Vue de la face arrière en page 9).

Nettoyer le filtre mousse extérieur au moins une fois par semaine, ou plus si nécessaire, de la manière suivante :

1. Retirer le filtre et le laver avec de l'eau chaude savonneuse.
2. Le rincer abondamment de façon à éliminer toute trace de savon.
3. Le sécher en le pressant en sandwich dans une serviette éponge.
4. Le laisser sécher complètement avant de le remplacer.
5. Replacer le filtre à l'arrière de l'appareil.

Le filtre tissé blanc, proposé en option, ne peut pas être lavé, il doit être changé au moins une fois par mois ou plus s'il est encrassé de manière visible.

Tuyau

Veuillez vous référer à la notice d'utilisation qui vous a été remise avec le tuyau.

Masque nasal

Veillez vous référer à la notice d'utilisation qui vous a été remise avec votre masque nasal.

Humidificateur

Veillez vous référer à la notice d'utilisation qui vous a été remise avec votre humidificateur.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEMES

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SUGGESTION
Gêne due à une sensation de pression trop élevée.	Pression de l'appareil <i>GoodKnight 425</i> .	L'adaptation à la pression nasale prendra un certain temps. Essayer d'utiliser la rampe de montée en pression au moment de vous endormir (voir le chapitre "Utilisation de la rampe" page 18). Se détendre et respirer lentement par le nez.
L'appareil ne délivre pas les bonnes pressions (afficheur).	Le tuyau de prise de pression n'est pas branché. De l'humidité s'est insérée dans le tuyau de prise de pression. La rampe est activée.	Vérifier que le petit tuyau de prise de pression est bien connecté à l'appareil. Assécher le petit tuyau. Pour cela, brancher le tuyau annelé sur la machine en laissant le petit tuyau déconnecté, boucher le gros tuyau avec la main, mettre la machine en service. Recommencer si nécessaire. Vérifier que l'indicateur de rampe est affiché. Appuyer sur le bouton de rampe pour annuler la fonction (repère 3 de la Figure 2 – Vue de dessus page 9). Les niveaux de pression ont été prescrits par votre médecin et ne peuvent être modifiés que par prescription médicale.
Nez ou gorge desséché ou irrité	L'air est trop sec.	Humidifier l'air de la pièce à l'aide d'un humidificateur. S'adresser à l'équipe médico-technique pour obtenir un humidificateur .
Nez froid	La température de la pièce est trop basse.	Augmenter la température de la pièce ou mettre le tuyau sous les couvertures pour réduire la perte de chaleur.
Nez qui coule	Réaction au débit d'air et aux pressions.	Interrompre le traitement. S'adresser à l'équipe médico-technique ou contacter le médecin traitant.
L'appareil débite de l'air trop chaud.	Les filtres d'entrée d'air sont peut-être sales. L'entrée d'air est colmatée. La température de la pièce est trop élevée.	Nettoyer ou remplacer les filtres selon le cas (se reporter au chapitre "Entretien et nettoyage" en page 23). Eloigner tout linge, literie ou vêtement de l'appareil <i>GK425</i> . Baisser le thermostat de la pièce. S'assurer que l'appareil <i>GK425</i> est éloigné de toute source de chaleur. Sortir le tuyau d'en-dessous des couvertures.
Douleurs au niveau du nez, des sinus ou des oreilles.	Infection des sinus ou congestion nasale.	Interrompre le traitement. Contacter immédiatement le médecin traitant.
Sécheresse ou irritation des yeux	Fuite d'air autour du masque	Repositionner le masque. Demander au médecin ou au prestataire de services d'essayer différentes tailles de masques.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SUGGESTION
Rougeur de la peau en contact avec le masque	Le harnais est trop serré ou de taille inadéquate. Réaction allergique aux composants du masque	Régler le harnais. Contacter le médecin traitant ou le prestataire de services pour essayer des masques de tailles différentes. Interrompre l'utilisation du masque. Contacter le médecin traitant ou le prestataire de services.
Récurrence des premiers symptômes du syndrome d'apnées du sommeil.	La <i>GoodKnight</i> 425 n'est pas réglée aux pressions correctes ou ne fonctionne pas correctement. Votre condition physique ou vos besoins en pression ont changé.	Demander au prestataire de services de vérifier le fonctionnement de la <i>GK425</i> . Contacter le médecin traitant.
La <i>GoodKnight</i> 425 ne s'allume pas (aucun affichage).	Le module d'alimentation n'est pas correctement branché. Absence de secteur. Le fusible de l'appareil a sauté.	Vérifier les connexions entre le module d'alimentation, l'appareil <i>GK425</i> et la prise de secteur. Débrancher, puis rebrancher l'alimentation . Utiliser un autre appareil (ex : lampe, radio etc.) pour vérifier que l'alimentation en courant alternatif est présente à la prise. Contacter le prestataire de services.
La <i>GoodKnight</i> 425 ne fonctionne pas convenablement et semble perturbée.	Perturbations électromagnétiques trop importantes.	Eloigner l'appareil des sources de perturbations telles que les lampes halogènes, téléphones portables, etc.
In 1 est affiché.	Une fuite importante (déconnexion) a été détectée dans le circuit patient pendant plus de 30 secondes.	Ce message disparaît dès que le masque est reconnecté ou bien si vous actionnez deux fois le bouton de mise en service/veille. Sinon, vérifier la connexion du circuit patient.
In 2 s'affiche.	Une surpression a été détectée par l'appareil pendant plus de 10 secondes.	Vérifier la connexion du petit tuyau de prise de pression. Vérifier qu'il n'est pas pincé et qu'il est bien propre et sec (voir la notice d'utilisation du circuit patient).
In 3 apparaît sur l'afficheur.	Baisse au niveau de la tension d'alimentation.	Vérifier les connexions entre le module d'alimentation, l'appareil et la prise secteur. Débrancher le module d'alimentation, puis le rebrancher sur le secteur. Si le problème persiste, contacter le prestataire de services. Vérifier la batterie et la remplacer si nécessaire. Si le message persiste, contacter le prestataire de services.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SUGGESTION
In 4 apparaît sur l'afficheur.	Une fréquence trop élevée a été détectée.	Actionner deux fois le bouton “mise en route/veille” de la <i>GK425</i> . Vérifier le branchement des tuyaux. Si cela se reproduit, contacter votre prestataire de services.
Er XX apparaît sur l'afficheur. (où XX = 2 chiffres).	L'appareil a détecté une erreur de fonctionnement.	Contactez le prestataire de services.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Performances de l'appareil

Gamme de pression du <i>GoodKnight</i> 425 :	3 cmH ₂ O à 25 cmH ₂ O ± 1 cmH ₂ O appareil réglable par pas de 0,5 cmH ₂ O
Pression maximale à l'orifice de raccordement côté patient en condition de premier défaut :	36 cmH ₂ O
Durée de la rampe :	0 à 30 minutes ± 1 minute appareil réglable par pas de 5 minutes tube de diamètre 22 mm
Orifice de raccordement côté patient :	
Niveau sonore mesuré selon la NF EN ISO 17510-1 :2002 :	< 29 dB(A)
Niveau sonore mesuré selon la NF EN ISO 17510-1 :2009 :	< 31dB(A)
Durée de vie de la pile soudée sur la carte : (selon données du constructeur)	5 ans

Caractéristiques physiques

Dimensions (l x H x L) :	144 x 79 x 198 mm environ (hors alimentation)
Poids :	0,780 kg environ (hors module d'alimentation)


Conditions de transport et de stockage

Température :	-20°C à +60°C
Humidité relative :	jusqu'à 95 % sans condensation
Gamme de pression relative :	500 hPa à 1060 hPa

Conditions d'utilisation

Température :	+5°C à +40°C
Humidité relative :	entre 15 % et 95 % sans condensation
Gamme de pression relative :	700 hPa à 1060 hPa
Gamme d'altitude :	0 – 2400 m environ

Caractéristiques électriques du boîtier d'alimentation

Alimentation de classe II :	Tension d'entrée : 100 – 240 VAC (-15%, +10%), 50 / 60 Hz (±1 Hz)
	Puissance ou courant d'entrée : 1,5 A.
	Tension de sortie : 13 V – 4 A.
Module d'alimentation fourni : ONTOP Modèle SA165A – 125OU-3.	

ATTENTION

- Utiliser exclusivement le module d'alimentation enfichable fourni avec l'appareil.
- Le module d'alimentation n'est pas destiné à être réparé. En cas de panne, veuillez contacter votre prestataire de services afin qu'il procède à son remplacement.

Caractéristiques électriques de l'appareil


Tension d'entrée : 13 V – 3 A.

Puissance consommée maximum : 40 W sans humidificateur

Courant consommé à 25 cmH₂O avec une fuite de 4 mm : 1,1 A.



Courant continu

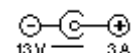

Connecteur alimentation / batterie 13 V

Symboles



Mise en service/veille



Accès aux informations



Rampe



Liaison série PC



Augmente la valeur des réglages



Diminue la valeur des réglages



Sortie

IPX1

Appareil protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau



Appareil de type BF.



Conformément aux exigences de la Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les appareils usagés doivent être collectés séparément des déchets. Contacter le prestataire de services de votre pays.



Consulter les instructions d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

CE 0459

Appareil conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Marquage CE

GoodKnight® 425 / GoodKnight® 425 ST : 2004.

Exigences réglementaires

Les risques relatifs à ce dispositif médical ont été évalués selon la norme ISO 14971 : 2007, notamment en ce qui concerne le risque résiduel global.

Performance essentielle relative à la compatibilité électromagnétique

Tout au long des tests de compatibilité électromagnétique, le dispositif a conservé ses réglages et la valeur de la pression délivrée est restée celle de la pression réglée $\pm 0,5$ cm H₂O.

L'ordinateur relié au dispositif a affiché la pression en continu. La communication a pu être coupée de temps en temps, mais le dispositif a continué de fonctionner et il a été possible de reconnecter l'ordinateur au dispositif.

Emissions électromagnétiques			
Les appareils de la gamme GoodKnight 425/425ST sont conçus pour être utilisés dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur d'un appareil de la gamme GoodKnight 425/425ST doit s'assurer qu'il est bien utilisé dans ce type d'environnement.			
Test d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique recommandé	
Emissions RF CISPR 11	Groupe 1	Les appareils de la gamme GoodKnight 425/425ST utilisent l'énergie RF seulement pour son fonctionnement interne. Par conséquent ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas supposées produire des interférences avec un équipement électronique proche.	
Emissions RF CISPR 11	Classe B	Les appareils de la gamme GoodKnight 425/425ST conviennent pour une utilisation dans tout établissement, y compris les établissements domestiques et ceux qui sont directement connectés au réseau public qui alimente les constructions domestiques.	
Emissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A		
Fluctuation de tension / Emissions flicker CEI 61000-3-3	Conforme		
Immunité électromagnétique			
Les appareils de la gamme GoodKnight 425/425ST sont conçus pour être utilisés dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur d'un appareil de la gamme GoodKnight 425/425ST doit s'assurer qu'il est bien utilisé dans ce type d'environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique recommandé
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV au contact ± 8 kV dans l'air	± 6 kV au contact ± 8 kV dans l'air	Les sols doivent être en bois, béton ou céramique. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30%.
Impulsions électriques transitoires en salve IEC 61000-4-4	± 2 kV sur lignes d'alimentation ± 1 kV sur lignes d'entrées / de sorties	± 2 kV sur lignes d'alimentation ± 1 kV sur lignes d'entrées / de sorties	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier.
Foudre IEC 61000-4-5	± 1 kV en mode différentiel ± 2 kV en mode commun	± 1 kV en mode différentiel ± 2 kV en mode commun	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier.
Chutes, coupures et variations de tension d'alimentation électrique. IEC 61000-4-11	< 5% U _T (>95% chute de U _T) pendant 0,5 cycles 40% U _T (60% chute de U _T) pendant 5 cycles 70% U _T (30% chute de U _T) pendant 25 cycles	< 5% U _T (>95% chute de U _T) pendant 0,5 cycles 40% U _T (60% chute de U _T) pendant 5 cycles 70% U _T (30% chute de U _T) pendant 25 cycles	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier. Si l'utilisateur d'un appareil de la gamme GoodKnight 425/425ST nécessite un fonctionnement continu pendant les interruptions de l'alimentation secteur, il est recommandé que l'appareil de la gamme GoodKnight 425/425ST soit connecté à une source d'alimentation non interrompue ou à une batterie.

Immunité électromagnétique (suite)

	< 5% U_T (>95% chute de U_T) pendant 5 s	< 5% U_T (>95% chute de U_T) pendant 5 s	
Champs magnétiques dans les fréquences d'alimentation (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques de forte fréquence devraient être à des niveaux caractéristiques d'un environnement commercial ou hospitalier.

Note : U_T est la tension secteur principale avant application du niveau de test.

Immunité électromagnétique - RF conduites et irradiées

Les appareils de la gamme **GoodKnight 425/425ST** sont conçus pour être utilisés dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur d'un appareil de la gamme **GoodKnight 425/425ST** doit s'assurer qu'il est bien utilisé dans ce type d'environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique conseillé
Fréquence Radio conduite IEC 61000-4-6	3 V rms 150 kHz à 80 MHz	3 V rms 150 kHz à 80 MHz	Les équipements de communication portables RF ne doivent pas être utilisés à proximité d'une quelconque partie d'un appareil de la gamme GoodKnight 425/425ST ou des câbles qui lui sont reliés. Distance de séparation recommandée : $d = 1,2\sqrt{P}$
Fréquence Radio irradiée IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz

P est la puissance maximale de l'émetteur en Watts (W) selon les données du fabricant et selon la fréquence du même émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).
Les forces des champs issues d'émetteurs RF fixes, tel que cela a été déterminé par un site de surveillance électromagnétique ^a, doivent être inférieures au niveau de conformité de chaque plage de fréquence ^b.
Des interférences électromagnétiques peuvent se produire à proximité des appareils portant le symbole suivant :



NOTE 1: A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus haute s'applique.

NOTE 2: Ces recommandations ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation des ondes électromagnétiques est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

^(a) La force des champs issus d'émetteurs fixes, comme les bases de téléphones sans fil, les radios mobiles, les radios amateur, les émissions de radio AM et FM, les émissions TV ne peuvent pas être prédites de façon théorique avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique issus d'émetteurs fixes, un site de surveillance électromagnétique doit être consulté. Si la force du champ mesuré dans l'environnement où un appareil de la gamme **GoodKnight 425/425ST** doit être utilisé excède le niveau RF applicable ci-dessus, l'appareil de la gamme **GoodKnight 425/425ST** devra être examiné pour vérifier que son fonctionnement est normal. Si un fonctionnement anormal est observé, des mesures supplémentaires peuvent se révéler nécessaires, comme réorienter ou déplacer l'appareil de la gamme **GoodKnight 425/425ST**.

^(b) Au delà de la plage de fréquence 150 kHz à 80 MHz, les forces du champ doivent être de moins de 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre un équipement de communication portable et mobile RF et un appareil de la gamme *GoodKnight 425/425ST*

Les appareils de la gamme **GoodKnight 425/425ST** sont conçus pour être utilisés dans un environnement dans lequel les perturbations RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur d'un appareil de la gamme **GoodKnight 425/425ST** peut aider à limiter des interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre des équipements de communication portables et mobiles RF et l'appareil de la gamme **GoodKnight 425/425ST** comme spécifié ci-dessous, selon la puissance maximale de l'équipement de communication.

Puissance maximale de l'émetteur (W)	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs évalués ayant une puissance maximale non listée au dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance maximale de l'émetteur en watt (W) selon le constructeur de l'émetteur.

NOTE 1 : A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la plage de fréquence la plus élevée s'applique.

NOTE 2 : Ces recommandations ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation des ondes électromagnétiques est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

Câbles conformes

Attention

L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés, peut conduire à une augmentation des émissions ou à une réduction de l'immunité des appareils de la gamme **GoodKnight 425/425ST**.

M-213930-04 Câble RS232 2m <i>GoodKnight 425</i>	6,5 ft (2m)
M-213930-06 Câble RS232 15m <i>GoodKnight 425</i>	50 ft (15m)



GoodKnight® 425 **GoodKnight® 425 ST**

Patientenhandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

BEVOR SIE DAS BEATMUNGSGERÄT EINSCHALTEN	37
SICHERHEITSHINWEISE	37
ZWECKBESTIMMUNG	38
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB	38
GEBRAUCHSHINWEISE UND KONTRAINDIKATIONEN	38
PRÜFUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE	39
BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE	40
EINSTELLUNG	43
GRUNDEINSTELLUNG	43
INSTALLATION EINES ADAPTERS FÜR SAUERSTOFFZUFUHR (OPTIONAL)	44
ANSCHLUSS EINES ATEMLUFTBEFEUCHTERS	45
INBETRIEBNAHME BEI STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE ODER ZIGARETTENANZÜNDER	47
INBETRIEBNAHME	48
BEGINN DER ANWENDUNG	48
BEENDEN DER ANWENDUNG	49
EINSATZ DER RAMPENFUNKTION	50
PARAMETERABFRAGE	52
EINSTELLEN DER UHRZEIT	54
PFLEGE, INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG	55
GOODKNIGHT 425	55
LUFTEINLASSFILTER	55
SCHLAUCHSYSTEM	55
ATEMMASKE	56
ATEMLUFTBEFEUCHTER	56
WAS TUN, WENN	57
TECHNISCHE DATEN	60
LEISTUNGSMERKMALE DES GERÄTES	60
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	60
TRANSPORT- UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN	60
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BEIM BETRIEB	60
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN DES NETZTEILS	60
ELEKTRISCHE DATEN DES GERÄTES	61
SYMBOLE	61
GESETZLICHE ANFORDERUNGEN	61
GRUNDLEGENDE LEISTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT	62



Das Beatmungsgerät **GoodKnight 425** (GK425) wurde für Patienten mit obstruktivem Schlafapnoesyndrom entwickelt. Hauptsymptom dieses Krankheitsbildes sind nächtliche Atemstillstände, die aus einer Verlegung der oberen Atemwege resultieren. Diese Verlegung hat eine nachhaltige Störung des Schlafs zur Folge. Das **GoodKnight 425** liefert zwei Therapiedrücke (einen für das Einatmen/einen für das Ausatmen), die eine Blockade der oberen Atemwege verhindern und bei Atemstillständen supprimieren. Bei dem Modell **GoodKnight 425 ST** kann die Funktion Hintergrundfrequenz eingestellt werden.

Es ist unbedingt erforderlich, daß Sie sich mit der Funktionsweise des Beatmungsgerätes vertraut machen. Lesen Sie hierzu dieses Handbuch vor Inbetriebnahme Ihres **GoodKnight 425** aufmerksam durch.

Nachfolgende Informationen sollen eine optimale und zuverlässige Nutzung des Beatmungsgerätes sicherstellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt oder – wenn Sie das Gerät zuhause einsetzen – an Ihren Kundendienst.

Ihr Arzt hat sich für eine Behandlung Ihrer Erkrankung entschieden und die für Sie notwendigen Parameter vorgegeben, welche in der Klinik oder bei Ihnen zuhause von einem Techniker am Beatmungsgerät eingestellt werden. Bis auf einige wenige Ausnahmen müssen Sie selbst am Gerät keine Einstellungen vornehmen.

Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen gelten sowohl für das **GoodKnight 425** als auch für das **GoodKnight 425 ST**, sofern nicht anderweitig angegeben.

GoodKnight® ist eine Marke im Vertrieb der Firma Nellcor Puritan Bennett, Inc.

Seite wurde absichtlich leer gelassen

BEVOR SIE DAS BEATMUNGSGERÄT EINSCHALTEN

Sicherheitshinweise

Um ein zuverlässiges und optimales Funktionieren des Gerätes garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, das Handbuch sorgfältig durchzulesen. Nähere Angaben erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Ihrem Pflegedienst. Beachten Sie besonders die mit folgenden Hinweisen gekennzeichneten Abschnitte:

WARNUNG

Es besteht Lebens- oder Unfallgefahr für Gerätenutzer oder umstehende Personen.

VORSICHT

Materialbeschädigungen am Gerät selbst oder in der näheren Umgebung sind möglich.

HINWEIS

Hinweise für eine effiziente oder praktische Handhabung des Geräts.

WARNUNG

1. Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme Ihr Beatmungsgerät **GoodKnight 425** auf Vollständigkeit (vgl. Kapitel „Prüfung der einzelnen Bestandteile“, Seite 39).
2. Im Falle einer zusätzlichen Sauerstoffzufuhr beachten Sie sorgfältig die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften zum Sauerstoffeinsatz.
3. Verwenden Sie ausschließlich von Ihrem Kundendienst geliefertes Zubehör. Achten Sie darauf, dass für jedes Zubehörteil eine Bedienungsanleitung vorhanden ist. Machen Sie sich mit der Funktion aller Zubehörteile vertraut.
4. Benutzen Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.
5. Betreiben Sie das Beatmungsgerät nicht in Gegenwart brennbarer Dämpfe/Gase.
6. Beachten Sie die Hinweise zur Einstellung des Gerätes (vgl. Kapitel „Einstellung“, Seite 43). Schützen Sie das Beatmungsgerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
7. Blockieren Sie niemals versehentlich oder absichtlich die Luftauslassöffnung bzw. jede andere Öffnung des Geräts oder des Schlauchsystems.
8. Bringen Sie niemals Flüssigkeiten oder feste Gegenstände in die Luftauslassöffnung ein.
9. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie während der Anwendung Ihres **GoodKnight 425** unter folgenden Symptomen leiden: Trockenheit der Atemwege oder Nasenschleimhäute, Hautreaktionen, vermehrte Absonderung von Nasensekret, Ohrenschmerzen, Beschwerden im Bereich der Nasennebenhöhlen, Tagesschläfrigkeit, Stimmungsschwankungen, Desorientierung, Reizbarkeit oder Gedächtnisstörungen.
10. Sollten Störungen an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst vor Ort. Die Wartung dieses Gerätes sollte ausschließlich von fachkundigem Personal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

Zweckbestimmung

Das Gerät *GoodKnight* 425 ist für die Behandlung schlafbezogener obstruktiver Atmungsstörungen und für Patienten mit einem Körpergewicht von mindestens 30 kg konzipiert.

Das Gerät *GoodKnight* 425 kann mit dem Warmluftbefeuchter *GoodKnight* H₂O ausgestattet werden. Dieser dient dazu, die dem Patienten über das CPAP-Gerät zugeführte Luft zu erwärmen und ihren Feuchtigkeitsgrad zu erhöhen. Bei deaktivierter Wärmefunktion und gefülltem Wasserbehälter erfolgt die Luftbefeuchtung kalt.

Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Das Gerät *GoodKnight* 425 ist darauf ausgelegt, zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung verwendet zu werden. Es kann problemlos mit auf Reisen genommen und im Hotel, aber auch im Auto oder in einem Lastkraftwagen verwendet werden.

Das Gerät *GoodKnight* 425 ist ein medizinisches Elektrogerät, bitte beachten Sie daher bei der Installation die Anweisungen bezüglich der in diesem Handbuch angegebenen elektromagnetischen Kompatibilität.

Gebrauchshinweise und Kontraindikationen

Wie bei allen elektrischen Medizingeräten können am Gerät *GoodKnight* 425 Störungen aufgrund tragbarer Geräte zur HF-Kommunikation auftreten.

GoodKnight 425 ist kein lebenserhaltendes Gerät.

WARNUNGEN

Wie alle CPAP-Geräte, die einen kontinuierlichen Überdruck (Continuous Positive Airway Pressure) erzeugen, darf *GoodKnight* 425 nicht bei Patienten mit folgenden Erkrankungen angewendet werden. Falls eine der folgenden Krankheiten bei Ihnen vorliegt, teilen Sie dies bitte im Vorfeld der Behandlung Ihrem Arzt mit:

1. Pneumatozephalus, Trauma oder eine Kranio-Nasopharyngealfistel infolge einer kürzlich erfolgten Operation
2. Dekompensierte Herzinsuffizienz oder Hypotonie, insbesondere bei Hypovolämie oder Herzrhythmusstörungen.

VORSICHT

Wie alle Geräte, die einen kontinuierlichen Überdruck erzeugen, darf *GoodKnight* 425 bei Patienten mit den nachstehend aufgeführten Beschwerden **nur unter strenger ärztlicher Kontrolle** angewendet werden:

- Dehydrierte Patienten oder Patienten, bei denen infolge einer verminderten Flüssigkeitsaufnahme oder der Einnahme von Diuretika einschließlich beabsichtigter oder unbeabsichtigter Behandlungsänderungen die Gefahr einer Dehydratation besteht
- Starkes Nasenbluten oder Neigung zu starkem Nasenbluten
- Kranio-Nasopharyngealfistel infolge eines Traumas oder einer kürzlich erfolgten Operation.
- Schweres Emphysema bullosum oder früherer Pneumothorax als Emphysemkomplikation
- Akute Sinusitis, Otitis media oder Trommelfellperforation
- Schwere Klaustrophobie.

Verwenden Sie den Warmluftbefeuchter nicht bei einer Verlegung der supraglottischen Luftwege.

Prüfung der einzelnen Bestandteile

Für den Einsatz des mit einem speziellen Netzteil ausgestatteten **GoodKnight 425** benötigen Sie mindestens die folgenden Elemente:

- Flexibles Schlauchsystem, in dem sich ein zweiter dünnerer, durchsichtiger Schlauch befindet.
- Atemmaske inklusive Kopfgeschirr (siehe Bedienungsanleitung der Atemmaske).

Möglicherweise hat Ihnen Ihr Arzt zudem einen Atemluftbefeuchter verordnet. Prüfen Sie, ob Sie über sämtliches zu diesem Luftbefeuchter gehörendes Zubehör verfügen (vgl. Bedienungsanleitung des Atemluftbefeuchters).

Prüfen Sie das Beatmungsgerät sowie alle Zubehörteile sorgfältig. Achten Sie besonders darauf, dass das Schlauchsystem keine Beschädigungen und die Atemmaske keine Risse im Silikonpolster (Bereich, der mit dem Gesicht in Berührung kommt) oder Defekte am Konnektor aufweist.

Kontrollieren Sie das Gerät und das Steckernetzteil und stellen Sie sicher, dass sie keinen sichtbaren Schaden aufweisen. Schließen Sie das Gerät mit Hilfe des beigegeführten Steckernetzteils an das Stromnetz an, indem Sie die Schritte 4 und 5 des Kapitels „Grundeinstellung“ auf Seite 43 befolgen.

Der Gerätetyp wird einige Sekunden lang angezeigt, anschließend erscheint folgende Anzeige mit der Uhrzeit (nachfolgende Angabe als Beispiel):

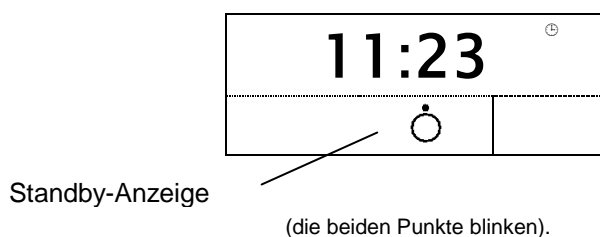


Abbildung 1 – Anzeige, wenn das Gerät in Bereitschaft geschaltet ist

Wurde die Stromversorgung unterbrochen und wieder hergestellt, während das Gerät eingeschaltet war, wird im Display der Druck angezeigt. Das Gerät befindet sich im selben Modus wie beim Herausziehen des Netzteils; es stellt sich auf den Druck ein, der bei herausgezogenem Netzteil bestand. Das Einschalten des Gerätes erfolgt durch Drücken der Taste Inbetriebnahme/Standby (Punkt 4 der Abbildung 2 – Draufsicht, Seite 41). Die Turbine schaltet sich ein, das Geräusch muss regelmäßig sein.

Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste Inbetriebnahme/Standby betätigen; ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG

Bei Problemen oder Störungen keinesfalls mit der Behandlung beginnen und umgehend den Kundendienst informieren.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Das **GoodKnight 425** wird über ein externes Steckernetzteil mit Strom versorgt und ist mit speziellem Zubehör ausgestattet. Das Gerät ist nachfolgend beschrieben.

Vgl. Abb. 2 , 3 und 4 auf Seite 40.

1. Display

Anzeige verschiedener Informationen wie z. B. gemessener Maskendruck, Systemeinstellungen oder Uhrzeit. Nähere Informationen erhalten Sie in Kapitel „Parameterabfrage“ auf Seite 52.

2. Systemeinstellungen

Abruf verschiedener Betriebsparameter. Nähere Informationen erhalten Sie in Kapitel „Parameterabfrage“ auf Seite 52.

3. Rampe

Aktivierung bzw. Deaktivierung der Rampenfunktion. Nähere Informationen erhalten Sie in Kapitel „Einsatz der Rampenfunktion“ auf Seite 50. Sie wird außerdem benutzt, um bei der Geräteeinstellung die Werte der einzelnen Parameter zu verringern.

4. Taste Inbetriebnahme/Standby

Ein- bzw. Ausschalten des Beatmungsgerätes. Dient darüber hinaus der Erhöhung der Einstellungswerte beim Einstellen des Geräts.

5. Druckmessanschluß

Anschluss für die Druckmessung, auf die der dünne Schlauch des Schlauchsystems aufgesteckt wird. Nähere Informationen erhalten Sie in Kapitel „Einstellung“ auf Seite 43.

6. Anschluss für die Luftzufuhr

Anschluss für den flexiblen Patientenschlauch, welcher dort aufgesteckt wird. Nähere Informationen erhalten Sie in Kapitel „Einstellung“ auf Seite 43.

7. Serieller Anschluss

Dieser Anschluss ist ausschließlich für den Gebrauch durch Ihren Arzt oder Ihren Kundendienst bestimmt. Hier bitte nichts anschließen.

8. Stromversorgungsanschluss

An diesem Anschluss kann das Gerät über das mitgelieferte Steckernetzteil oder eine externe Batterie mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Inbetriebnahme bei Stromversorgung über Batterie oder Zigarettenanzünder“ auf Seite 47.

9. Luftfilter

Verhindert das Eindringen von Staub und feinen Partikeln in Gehäuse und internen Luftweg des Gerätes. Nähere Informationen zur Reinigung der Filter erhalten Sie in Kapitel „Pflege, Instandhaltung und Reinigung“ auf Seite 55.

Eine Beschreibung der mit Ziffern gekennzeichneten Bedienelemente finden Sie auf Seite 40.

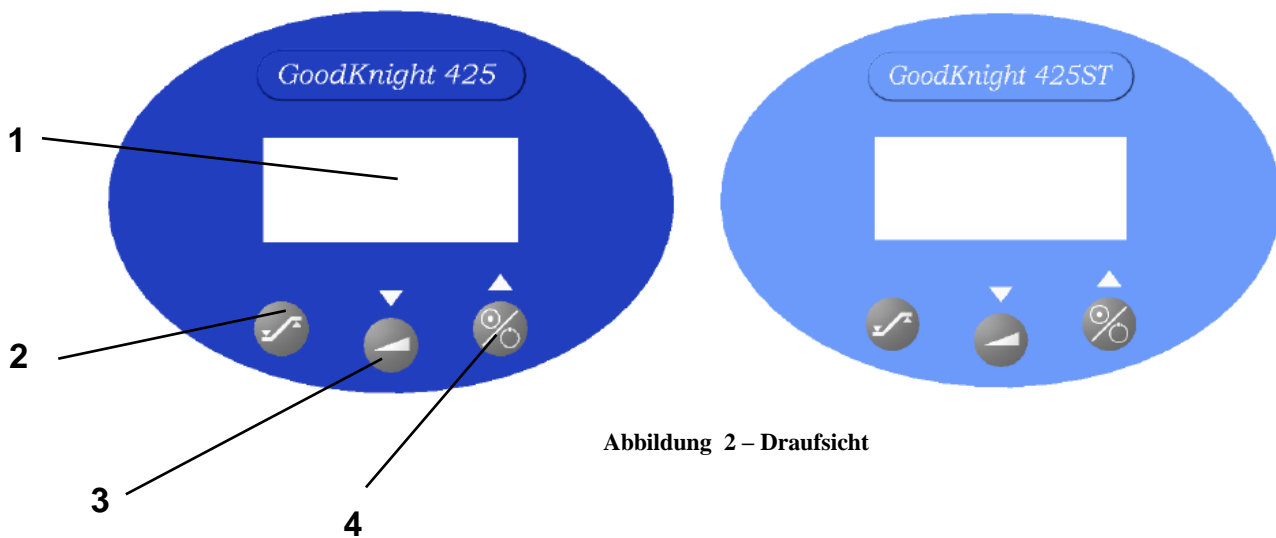


Abbildung 2 – Draufsicht



Abbildung 3 – Frontansicht

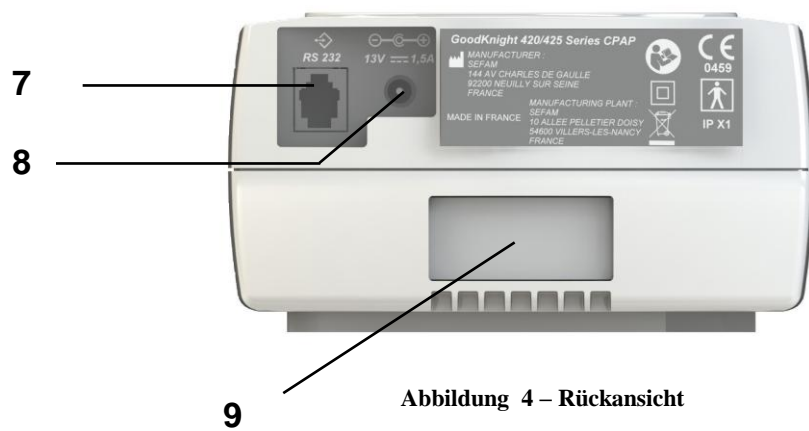


Abbildung 4 – Rückansicht

Seite wurde absichtlich leer gelassen

EINSTELLUNG

In diesem Kapitel werden Sie erfahren, wie die verschiedenen Zubehöerteile und Kabel mit dem Gerät zu verbinden sind. Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie Gerät und Zubehör wie in Kapitel „Prüfung der einzelnen Bestandteile“ auf Seite 39 beschrieben.

VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile Unterlage. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zur Wand oder anderen Gegenständen, um eine optimale Belüftung des Gerätes zu gewährleisten.
- Das *GoodKnight 425* darf nicht verwendet werden, wenn es an oder auf einem anderen Gerät als der Befeuchtungsvorrichtung *GoodKnight H₂O* steht.

Grundeinstellung

1. Schließen Sie das Schlauchsystem an das Gerät an. Hierbei müssen Sie zunächst den dünnen Druckmessschlauch, der aus dem Konnektor des flexiblen Schlauchs herausgeführt ist, mit dem Druckmessanschluss am Gerät verbinden (siehe Ziffer 5 der Abbildung 3 – Frontansicht auf Seite 41). Schließen Sie nun den Konnektor des flexiblen (dicken) Schlauchs an den Anschluss für den Luftauslass an (siehe Ziffer 6 der Abbildung 3 auf Seite 5).

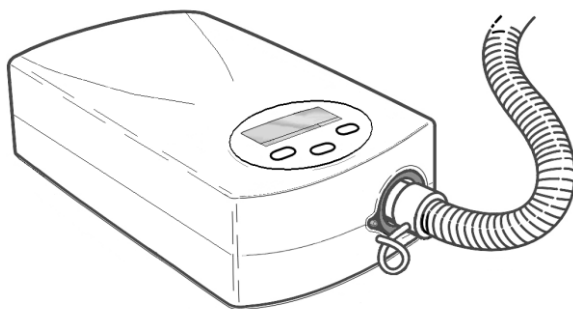


Abbildung 5 – Anschluss des flexiblen Schlauchs an das Gerät

WARNUNG


Achten Sie darauf, dass der dünne Druckmessschlauch gerade im Schlauchsystem verläuft (nicht verdreht oder geknickt).

2. Bereiten Sie die Atemmaske gemäß der Bedienungsanleitung auf ihren Einsatz vor.
3. Verbinden Sie das Anschlussstück der Atemmaske mit dem Konnektor des Schlauchsystems.
4. Stecken Sie das Kabel des Steckernetzteils in den Stromversorgungsanschluss auf der Geräterückseite (Punkt 8 der Abbildung 4 – Rückansicht auf Seite 41).

VORSICHT

Bitte ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte spezielle Steckernetzteil benutzen.

5. Verbinden Sie den Stecker mit dem Netzanschluss (Steckdose). Der Gerätetyp wird einige Sekunden lang angezeigt, anschließend wird auf dem Display die Uhrzeit angezeigt:

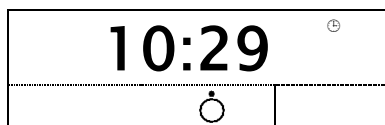

Der Doppelpunkt blinkt.

6. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit. Fahren Sie nun fort mit Kapitel „Inbetriebnahme“ auf Seite 48.

Installation eines Adapters für Sauerstoffzufuhr (optional)

Halten Sie im Falle einer zusätzlichen Sauerstoffzufuhr bitte die Herstellerhinweise zur Installation des speziellen Ventils zur Vermeidung einer überhöhten Sauerstoffmenge im Gerät im Falle eines Gerätestillstands ein und führen Sie statt Schritt 3 der Standardinstallation folgenden Vorgang aus:

- Verbinden Sie eine Seite des Adapters für Sauerstoffzufuhr mit dem freien Anschlussstück des Patientensystems und die andere Seite mit der Maske.

Nun können Sie mit der Standardinstallation (Schritte 4 bis 6) fortfahren.

WARNUNGEN

- Folgen Sie stets den Anweisungen Ihres behandelnden Arztes bzw. Ihres Kundendienstes, wenn Sie Sauerstoff mit dem Gerät verwenden.
- Stellen Sie vor Verwendung von Sauerstoff das Rauchen ein.
- Leiten Sie niemals Sauerstoff in die Lufteinlassöffnung des Geräts ein.
- Befolgen Sie genau die Anweisungen für Behandlungsbeginn und -Ende (vgl. Kapitel „Inbetriebnahme“) auf Seite 48.
- Die Sauerstoffzufuhr, muss eingestellt werden, falls das Gerät nicht arbeitet. Wird die Sauerstoffzufuhr aufrechterhalten, obwohl das Gerät ausgeschaltet oder ohne Funktion ist, kann sich der in das Patientensystem geleitete Sauerstoff im Gerät anreichern und ein Brandrisiko erzeugen.

VORSICHT

Bei einer festgelegten Sauerstoffzufuhrrate schwankt die eingeatmete Sauerstoffkonzentration je nach Druckeinstellung, Atemmuster, gewählter Maske und Leckage. Dieser Vorsichtshinweis gilt für die meisten Geräte mit kontinuierlichem Überdruck.

Anschluss eines Atemluftbefeuchters

Informieren Sie sich anhand der dem Atemluftbefeuchter beigelegten Bedienungsanleitung über vorbereitende Maßnahmen und Sicherheitshinweise.

WARNUNG

Der Atemluftbefeuchter muß vor Anschluss an das GoodKnight 425 aufgefüllt werden.

VORSICHT

Stellen Sie um Wasserschäden zu vermeiden sicher, dass der Atemluftbefeuchter stets tiefer als das Beatmungsgerät *GoodKnight 425* platziert ist.

Gehen Sie vor wie unter „Grundeinstellung“ beschrieben. Schritt 1 wird durch die nun folgenden Schritte ersetzt:

WARNUNG

Der Warmluftbefeuchter *GoodKnight H₂O* kann zusammen mit dem Gerät *GoodKnight 425* verwendet werden. Bitte beachten Sie vor dem Aufstellen die entsprechenden Gebrauchsanweisungen und verfahren Sie gemäß den entsprechenden Sicherheitshinweisen.

1. Den Wasserbehälter entfernen.
2. Die geschlossene Befeuchterkammer über den Luftauslass vorsichtig mit Wasser befüllen. Dabei darauf achten, den maximalen Füllstand nicht zu überschreiten.
3. Den Warmluftbefeuchter *GoodKnight H₂O* auf einer ebenen Fläche aufstellen.
4. Den im Lieferumfang des Warmluftbefeuchters *GoodKnight H₂O* enthaltenen Anschlussadapter am Luftauslass des Geräts *GoodKnight 425* anbringen.
5. Das Gerät *GoodKnight 425* auf dem Warmluftbefeuchter *GoodKnight H₂O* wie abgebildet platzieren (siehe Seite 25, Abbildung 6 – Anschluss des *GoodKnight 425* an den Warmluftbefeuchter *GoodKnight H₂O*).
 - Die Vorderseite des Geräts *GoodKnight 425* muss in Richtung Befeuchterkammeranschlüsse des Warmluftbefeuchters *GoodKnight H₂O* zeigen.
 - Die Vertiefungen im Geräteboden des *GoodKnight 425* müssen auf die dafür vorgesehenen Zapfen auf der Oberseite des Warmluftbefeuchters *GoodKnight H₂O* aufgesetzt werden.

VORSICHT

- Es ist wichtig, die Geräte auf einer ebenen und stabilen Fläche aufzustellen, weit entfernt von Flammen und Feuerquellen.
- Den Warmluftbefeuchter *GoodKnight H₂O* nie auf dem BiLevel-Gerät platzieren, da Wasser in das untere Gerät eindringen und dieses beschädigen kann.



Abbildung 6 – Anschluss des GoodKnight 425 an den Warmluftbefeuchter GoodKnight H₂O

6. Den Behälter sorgsam wieder einsetzen, damit kein Wasser überschwappen oder ins BiLevel-Gerät eindringen kann. Achten Sie darauf, dass der Anschlussadapter vollständig auf den Eingang der Befeuchterkammer gesteckt ist. Der Lufteinlass soll hierbei den Innensteg des Anschlussadapters erreichen.
7. Den dünnen Druckmessschlauch (ist aus einer der Schlauchanschlussmuffen herausgeführt) am Druckmessanschluss des Geräts *GoodKnight 425* aufstecken.
8. Die Anschlussmuffe des Beatmungsschlauchs, aus der der Druckmessschlauch herausgeführt ist, am Ausgang des Wasserbehälters anschließen.

Um die Installation des Geräts weiterzuführen, können Sie die Schritte 2 bis 6 der Standardinstallation durchführen, wie auf Seite 43 beschrieben.

VORSICHT

Vor dem Umsetzen an einen anderen Ort wird empfohlen, das Beatmungsgerät GoodKnight 425 vom Atemluftbefeuchter abzuziehen und den Wasserbehälter des Befeuchters zu leeren. Andernfalls besteht Gefahr, dass Wasser in das Beatmungsgerät eindringt, wodurch es zu irreparablen Schäden am Gerät kommen kann.

Inbetriebnahme bei Stromversorgung über Batterie oder Zigarettenanzünder

Die Stromversorgung des **GoodKnight 425** kann über eine 12 Volt-Batterie erfolgen; dafür ist das vorgesehene Kabel zu verwenden.

VORSICHT

- Verwenden Sie ausschließlich das als **GoodKnight 425 Zubehör** erhältliche Batteriekabel. Andere Kabel dürfen nicht verwendet werden, da sie an Gerät und Batterie Beschädigungen verursachen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Gleichstrom (12 V) und achten Sie auf korrekte Polarität.

Zum Anschluss des Batteriekabels befolgen Sie anstelle der unter „Grundeinstellung“ angegebenen Schritte 4 und 5 die nun folgenden Schritte 1 und 2:

1. Schließen Sie das eine Ende des Batteriekabels an den an der Rückseite des Beatmungsgerätes befindlichen Stromversorgungsanschluss (Ziffer 8 der Abbildung 4 – Rückansicht auf Seite 41) an.
2. Verbinden Sie nun das andere Kabelende mit der Batterie.

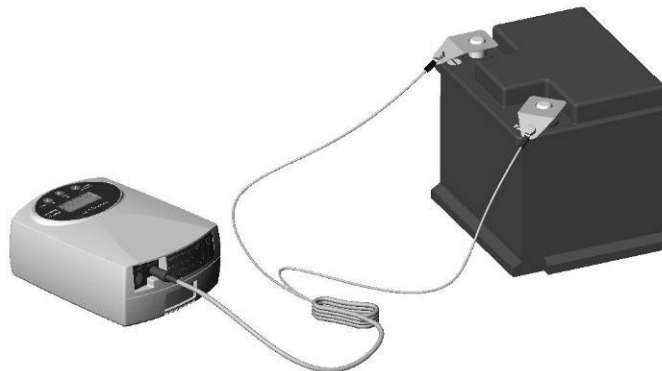


Abbildung 7 – Anschluss des GoodKnight 425 an das Batteriekabel

ANMERKUNG

Das Beatmungsgerät **GoodKnight 425** hat u.U. eine hohe Leistungsaufnahme. Wir empfehlen Ihnen daher, stets voll aufgeladene Batterien zu verwenden.

Der **GoodKnight 425** kann mittels des dafür vorgesehenen Kabels auch über einen 12 V-Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden.

Zu diesem Zweck ersetzen Sie die Schritte 4 und 5 der Standardinstallation durch folgende Schritte:

1. Schließen Sie das Kabel des Zigarettenanzünders an den Stromversorgungsanschluss an der Geräterückseite (Ziffer 8 der Abbildung 4 – Rückansicht auf Seite 41) an.
2. Verbinden Sie das andere Kabelende direkt mit dem Anschluss des Zigarettenanzünders.

Nachdem Sie das Beatmungsgerät gemäß der im vorhergehenden Kapitel gegebenen Anweisungen eingestellt haben, erfahren Sie nun, wie das Gerät in der Praxis eingesetzt wird und wie Sie die Rampenfunktion (kontinuierlicher Druckanstieg zu Beginn der Anwendung) nutzen können. Sie werden weiterhin erfahren, wie Sie den Menüpunkt 'Parameterabfrage' aktivieren (Sie haben lediglich die Möglichkeit, die Geräteeinstellungen abzufragen, jedoch keine Berechtigung, sie zu ändern).

Beginn der Anwendung

Nachdem Sie das Beatmungsgerät - wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben - auf die Inbetriebnahme vorbereitet haben, können Sie nun mit der Behandlung beginnen. Folgen Sie den in den Schritten 1 bis 4 gegebenen Anweisungen:

1. Einschalten des Gerätes mit der Taste Inbetriebnahme/Standby .

Auf dem Display erscheint der gemessene Druck sowie die beiden Anzeigen für Betriebsbereitschaft des Geräts und Datenaufzeichnung (siehe Abbildung 8 - Systemdisplay bei eingeschaltetem Beatmungsgerät).

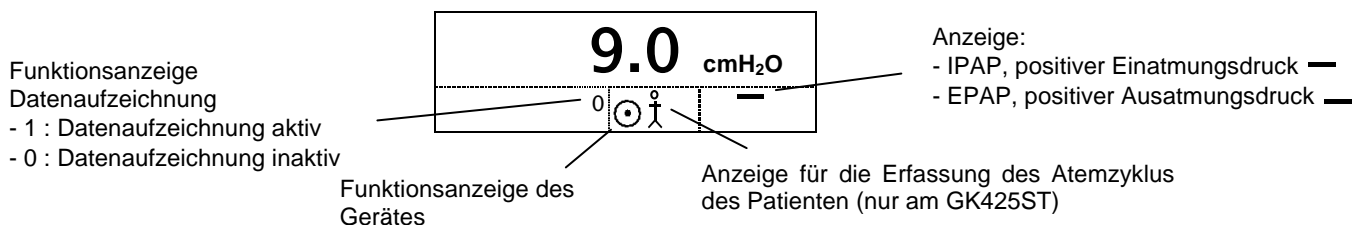


Abbildung 8 - Systemdisplay bei eingeschaltetem Beatmungsgerät

ANMERKUNGEN

- Die Einheit der Druckanzeige wird vom Arzt eingestellt: hPa oder cmH₂O (siehe oben).
 - Die Funktionsanzeige für die Datenaufzeichnung schaltet sich erst 15 Minuten nach Inbetriebnahme des Gerätes ein.
2. Setzen Sie die Nasalmaske entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf. Falls es sich um eine Nasalmaske mit Leckageloch handelt, ist sie mit einer Öffnung versehen, durch die die ausgeatmete Luft abgeleitet wird, so dass sie nicht erneut eingeatmet wird. Bei einer Maske ohne Leckageloch, sollte Ihr Arzt Ihnen einen Adapter mit Leckageöffnung (z.B. Pirouette™) zur Verfügung stellen, bei dem der Luftaustritt so nahe wie möglich an der Nase erfolgt. **Atmen Sie ganz normal.**

WARNUNG

Nie die Leckageöffnung der Atemmaske verstopfen, da diese der dauernden Luftabfuhr dient. Sobald sich das Gerät in Betrieb befindet, wird die ausgeatmete Luft von dem erzeugten Frischluftstrom über das Leckageloch der Maske nach außen befördert. Ist das Gerät nicht in Betrieb, wird in der Maske nicht mehr genügend frische Luft erzeugt und es besteht die Gefahr, die verbrauchte Luft erneut einzusatmen, was unter bestimmten Umständen innerhalb mehrerer Minuten zu Erstickungserscheinungen führen kann.

3. Wenn Sie einen Warmluftbefeuchter verwenden, beachten Sie die in der mitgelieferten Bedienungsanleitung gegebenen Anweisungen.
4. Wenn Sie Sauerstoff verwenden, öffnen Sie nun die Sauerstoffzufuhr.

WARNUNG

- Wenn sich das Gerät im Betriebsmodus befindet, ist zu prüfen, ob ein Luftstrom erzeugt wird. Ist dies nicht der Fall, ist es umgehend abzuschalten und der Kundendienst zu verständigen.
- Bei konstant niedrigem positivem Druck kann es sein, dass die durch die Leckageöffnung geleitete Luftmenge nicht ausreicht, um die gesamte ausgeatmete Luft aus dem Schlauchsystem abzuleiten. Es kann passieren, dass sie teilweise erneut eingeatmet wird.


Beenden der Anwendung


Zum Beenden der Anwendung folgen Sie den in den Schritten 1 bis 4 gegebenen Anweisungen:

1. Wenn Sie Sauerstoff verwenden, schließen Sie nun die Sauerstoffzufuhr.
2. Wenn Sie einen Warmluftbefeuchter verwenden, schalten Sie ihn ab, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Den Warmluftbefeuchter immer vor dem Ausschalten des Gerätes abschalten.

VORSICHT

Ziehen Sie den Warmluftbefeuchter nach der Benutzung vom Gerät ab, um zu verhindern, daß Feuchtigkeit hineingelangt.

3. Setzen Sie die Atemmaske ab.
4. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste Inbetriebnahme/Standby  betätigen. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und auf dem entsprechenden Display wird die Uhrzeit angezeigt:

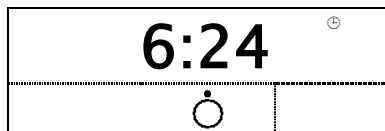

Einsatz der Rampenfunktion

Die Rampenfunktion ermöglicht Ihnen einen progressiven Druckanstieg zu Beginn der Behandlung. Der Beatmungsdruck wird auf den Anfangsrampendruck verringert und anschließend über einen definierten Zeitraum auf den Therapiedruck (Druckniveau) erhöht. Dies soll Ihnen helfen, wenn Sie unter hohem Druck Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. Stellen Sie zunächst den Anfangsrampendruck Ihres Beatmungsgeräts **GoodKnight 425** gemäß den folgenden Anweisungen ein:

HINWEIS

Bei Rampeneinstellung = 0 steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Der Anfangsrampendruck lässt sich auf einen Wert zwischen 3 cm H₂O und dem von Ihrem Arzt verschriebenen EPAP-Druckniveau (positiver Ausatemungsdruck) einstellen. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den zum Einschlafen angemessenen Druck einstellen.

Sie gelangen zum Einstellungs Menü, indem Sie eine Sekunde lang die Taste „Systemeinstellungen“ gedrückt halten, wie bei unten stehender Abbildung 10 gezeigt. Diese Funktion ist sowohl im Standby- als auch im Betriebsmodus zugänglich.


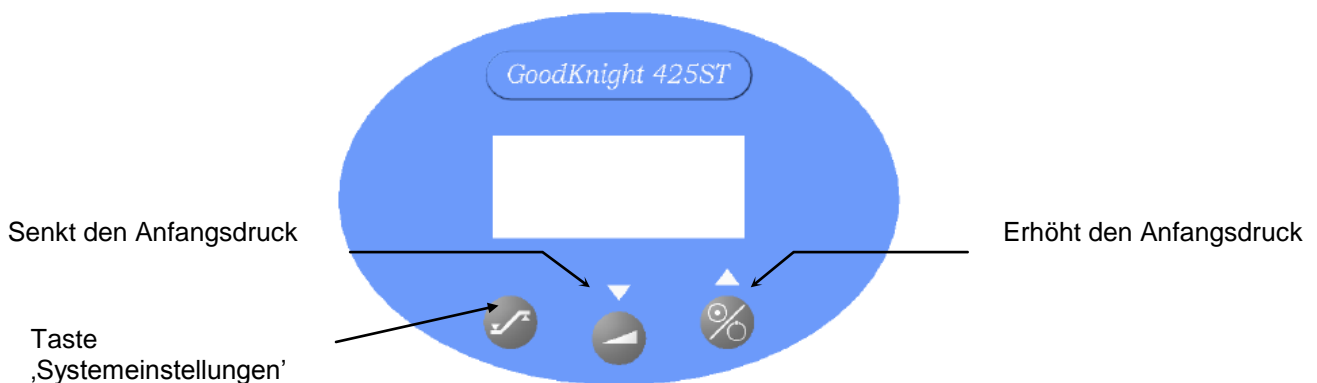




Abbildung 9 - Ansicht der Einstellungstasten

Anschließend wird diese Taste so oft wie erforderlich gedrückt, um folgende Anzeige zu erhalten:

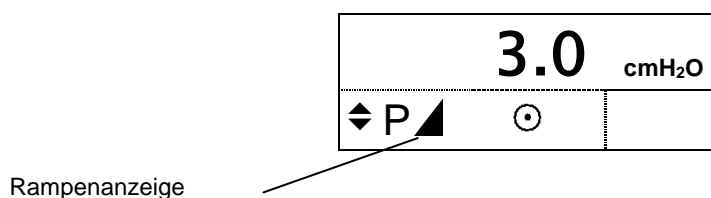

Der Wert des Drucks kann nun erhöht oder vermindert werden, indem die Tasten Inbetriebnahme/Standby  bzw. Rampenfunktion  betätigt werden.

Die Rampenfunktion ermöglicht Ihnen, einen progressiven Druckanstieg vorzunehmen. Der Therapiedruck (das Druckniveau) wird zu Beginn der Behandlung verringert, um Ihnen das Einschlafen zu erleichtern.

Sie können diese Funktion auch nutzen, wenn Sie während der Nacht aufstehen müssen und dann Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. Die Druckanstiegszeit bis zum endgültigen Druckwert ist von Ihrem Ärzteteam festgelegt. Sie erfolgt von von 0 (kein progressiver Anstieg) bis 30 Minuten, jeweils in 5-Minuten-Schritten. Möglicherweise wurde die Druckanstiegszeit auf Anweisung Ihres Arztes auf 0 gestellt. In diesem Fall ist die Rampenfunktion deaktiviert und das Betätigen der Taste Rampe vorn am Gerät zeigt keine Wirkung (Punkt 3 in der Abbildung – siehe außerdem die Seite 41).

1. Zur Aktivierung der Rampenfunktion drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste 'Rampe'. Die Rampenanzeige leuchtet im Display auf und der Druck sinkt auf einen niedrigen Wert. Dann steigt er progressiv bis auf den verschriebenen Therapiedruck, jedoch auf sanfte Weise, die Sie nicht beim Einschlafen stören sollte. Das Gerät liefert normalerweise dann die ganze Nacht über die verordneten Therapiedrücke, sofern Sie die Taste Rampe nicht erneut betätigen, wodurch der Druck erneut auf das von Ihnen gewählte Rampenniveau fällt und anschließend, wie beschrieben, wieder progressiv ansteigt.
2. Um die Rampenfunktion auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste 'Rampe'. Die Funktion ist nun deaktiviert. Es besteht die Möglichkeit, die Rampe wieder einzuschalten (die Rampenanzeige leuchtet auf, wenn sie aktiviert ist).

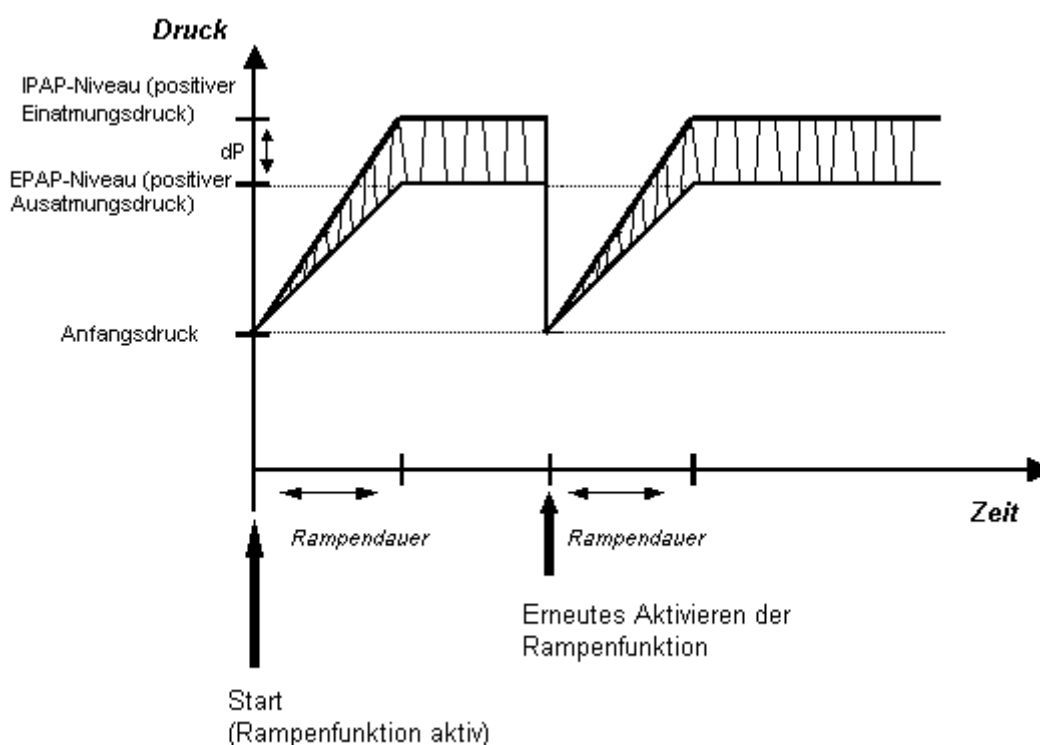


Abbildung 10 - Druckverlauf bei Einsatz der Rampenfunktion

Parameterabfrage

Auf dem Display können Sie die im Beatmungsgerät **GoodKnight 425** programmierten Einstellungen ablesen (siehe Ziffer 1, Abbildung 2 – Draufsicht, Seite 41).

Sie können die Einstellungen sowohl im Stand-by-Modus als auch während des Betriebs abrufen. Drücken Sie **eine Sekunde lang** die Taste ‘Systemeinstellungen’ (siehe Ziffer 2, Abbildung 2 – Draufsicht, Seite 41). Mit jedem erneuten Betätigen dieser Taste erhalten Sie weitere Einstellparameter.


HINWEIS

Bei den folgenden Anzeigen befindet sich das Gerät im Betriebsmodus; sämtliche aufgeführten Werte dienen als Beispiel.

Betätigen Sie
eine Sekunde
lang die Taste



Auf dem Display
erscheint:

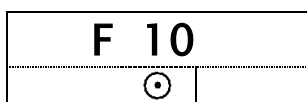


Die **Hintergrundfrequenz** Ihres Geräts.

HINWEIS


Diese Funktion ist nur am Beatmungsgerät **GoodKnight 425 ST** verfügbar.

Drücken Sie die
Taste

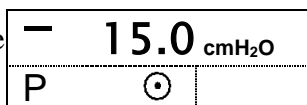


Das eingestellte **IPAP-Niveau**, (hoher Therapiedruck für die Einatmung).

Drücken Sie die
Taste

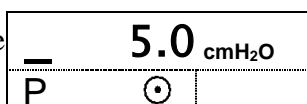


Das eingestellte **EPAP-Niveau**, (niedriger Therapiedruck für die Ausatmung).

Drücken Sie die
Taste

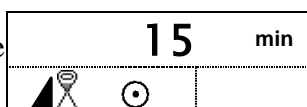


Die **Rampenzeit**, eingestellt vom Arzt (am Gerät eingestellte Zeit, bis der Anfangsdruck der Rampenfunktion auf Therapiedruckniveau angehoben ist).

Drücken Sie die
Taste

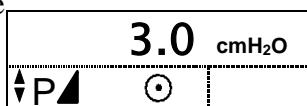


Anfangsdruck der Rampenfunktion (Druckniveau zu Beginn der Rampe); Anzeige und Einstellung dieses Wertes sind nur möglich, wenn die Rampeneinstellung > 0 Minuten ist.

Das Symbol  zeigt an, dass dieser Parameter einstellbar ist. Sie können den im Display angegebenen Wert erhöhen oder absenken, indem Sie die Tasten ‘Inbetriebnahme/Standby’ bzw. ‘Rampe’ betätigen.

Informationen entnehmen Sie Kapitel „Einsatz der Rampenfunktion“ auf Seite 50.

Drücken Sie die
Taste

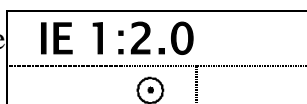


Das **eingestellte I/E-Verhältnis**

(Verhältnis Einatmungsdauer/Ausatmungsdauer).

HINWEIS


Diese Funktion ist nur am Beatmungsgerät *GoodKnight 425* ST verfügbar.

Drücken Sie die
Taste

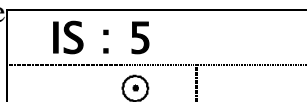


Die **Einatmungsempfindlichkeit**, eingestellt vom Arzt (Erfassungsempfindlichkeit zu Beginn der Einatmungsphase).

Drücken Sie die
Taste

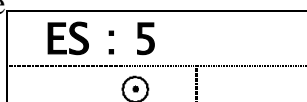


Die **Ausatmungsempfindlichkeit**, eingestellt vom Arzt (Erfassungsempfindlichkeit zu Beginn der Ausatmungsphase).

Drücken Sie die
Taste

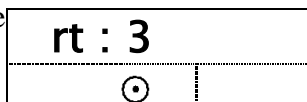

Die **inspiratorische Druckanstiegzeit**, eingestellt vom Arzt (Dauer, bis vom EPAP-Niveau das IPAP-Niveau erreicht wird).

Drücken Sie die
Taste

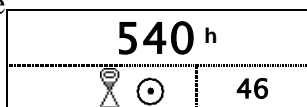


Der **Betriebsstundenzähler** (Angabe der Gerätebetriebsstunden). Rechts unten im Display werden die Minuten angezeigt.

Drücken Sie die
Taste



Der **Beatmungsstundenzähler** (Zeit, während der Sie mit der Maske geatmet haben). Rechts unten im Display werden die Minuten angezeigt.


Drücken Sie die
Taste

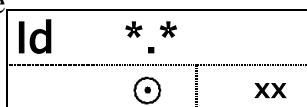


Anzeige der im Beatmungsgerät *GoodKnight 425* eingesetzten Systemsoftware (Firmware-Version). Die Versionsnummer wird mit zwei Ziffern (*.*) angegeben, z.B. zeigt das Display an: Id 1.0.

Zum Verlassen des Einstellungsmenüs drücken Sie erneut die Taste 'Systemeinstellungen'.

Auf dem Display erscheint nun wieder der Funktionsstatus Ihres Gerätes (bei den angegebenen Werten handelt es sich um Beispielwerte).

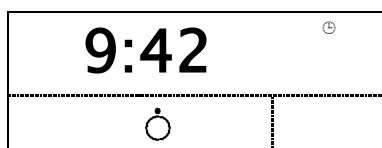

Gerät befindet sich im
Stand-by-Modus.

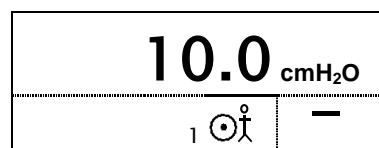



Gerät ist in Betrieb.

HINWEIS

Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden kein Tastendruck, so wird das Einstellungs Menü automatisch verlassen.

Einstellen der Uhrzeit

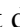Das Einstellen der Uhrzeit kann nur im Stand-by-Modus erfolgen. Drücken Sie eine Sekunde lang die Taste ‘Rampe’ (siehe Ziffer 3, Abbildung 2 – Draufsicht, Seite 41), und gleichzeitig die Taste Inbetriebnahme/Standby (siehe Punkt 4 der Abbildung 2 – Draufsicht auf Seite 41). Lassen Sie dann beide Tasten los. Es erscheint das Einstellungssymbol  unterhalb der Uhrzeit, wie im folgenden Beispiel:

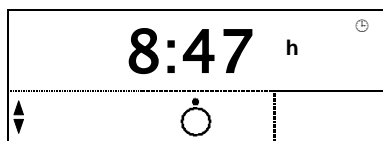

Der Buchstabe h, der die Stunde anzeigt, blinkt. Sie können die Stundenzahl dann mithilfe der Tasten Inbetriebnahme/Standby oder Rampe erhöhen/verringern.

Zur Einstellung der Minuten brauchen Sie lediglich die Taste ‘Systemeinstellungen’ zu drücken. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minutenanzeige wie bei der Stundeneinstellung beschrieben ein. Nochmals die Taste für die Systemeinstellungen betätigen, um das Menü zu verlassen.

HINWEIS

Das Einstellungs Menü wird automatisch verlassen, wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste betätigen.

PFLEGE, INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Um die zuverlässige Funktion Ihres Beatmungsgerätes **GoodKnight 425**, gewährleisten zu können, sind die nachfolgenden Pflegehinweise unbedingt zu befolgen.

GoodKnight 425

Das Gehäuse des Beatmungsgerätes erfordert keine spezielle Pflege. Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch. Wischen Sie das Gerät anschließend gut trocken. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

WARNUNG

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Sprühflasche, da sich die mit Haushaltsreiniger versetzten feinen Wassertropfen im Bereich der Luftaustrittsöffnung, im äußeren Luftfilter (Schaumstoff) oder im Geräteinneren niederschlagen könnten. Die im Reiniger enthaltenen chemischen Bestandteile können Irritationen der Atemwege hervorrufen.

Lufteinlassfilter

Sobald die Filter Beschädigungen (Risse) aufweisen oder stark verschmutzt sind, müssen sie ausgetauscht werden (siehe hierzu Ziffer 9, Abbildung 4 – Rückansicht, Seite 41). Reinigen Sie den äußeren Luftfilter (Schaumstoff) mindestens 1 Mal pro Woche, bei Bedarf auch häufiger:

1. Waschen Sie den Filter in warmer Seifenlauge.
2. Spülen Sie den Filter anschließend solange aus, bis keine Seifenreste mehr im Spülwasser vorhanden sind.
3. Trocknen Sie den Filter mit einem Frotteehandtuch, indem Sie das Handtuch um den Filter pressen. (Benutzen keinen Fön o.ä., um den Filter zu trocknen.)
4. Lassen Sie den Filter richtig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.
5. Setzen Sie nun den trockenen Filter wieder auf der Rückseite des Gerätes ein.

Der weiße, gewebte Feinfilter im Gerät kann nicht gewaschen werden. Er muss mindestens 1 Mal pro Monat, bei sichtbarer Verschmutzung auch häufiger, ausgewechselt werden.

Schlauchsystem

Zur Pflege lesen Sie die mit dem Schlauchsystem mitgelieferte Bedienungsanleitung und beachten Sie die Pflegehinweise.

Atemmaske

Zur Pflege lesen Sie die mit der Maske mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Atemluftbefeuchter

Zur Pflege lesen Sie die mit dem Atemluftbefeuchter mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Wartung des Gerätes

Das Gerät GoodKnight® 425/425ST ist keiner regelmäßigen präventiven Wartung zu unterziehen.

Zur Erhaltung der Sicherheit und des Therapieerfolgs wird eine jährliche Kontrolle und eventuelle Rekalibration des verabreichten Drucks und Flows (Volumenstrom) gemäß Servicehandbuch Kapitel III durch den technischen Service empfohlen.

WAS TUN, WENN ...

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	PROBLEMLÖSUNG
Unangenehmes Gefühl aufgrund einer erhöhten Druckempfindung.	Luftstrom des Beatmungsgerätes <i>GoodKnight 425</i> .	Es bedarf einer gewissen Zeit, um sich an den in der Nase empfundenen Druck zu gewöhnen. Möglicherweise erleichtert Ihnen die Rampenfunktion das Einschlafen (siehe Kapitel „Einsatz der Rampenfunktion“ auf Seite 13). Entspannen Sie sich und atmen Sie langsam durch die Nase.
Das Gerät liefert nicht den gewünschten Druck (s. Anzeige im Display).	Dünner Schlauch ist nicht mit dem Druckmessanschluss am Gerät verbunden. In den dünnen Druckmessschlauch, der mit dem Druckmessanschluss am Gerät verbunden ist, ist Feuchtigkeit eingedrungen. Die Rampe ist aktiviert.	Prüfen Sie, ob der dünne Druckmessschlauch richtig mit dem Druckmessanschluss am Gerät verbunden ist. Entfernen Sie Feuchtigkeit aus dem Druckmessschlauch folgendermaßen: Schließen Sie das Schlauchsystem mit dem eigentlich an die Maske anzuschließenden Konnektor an das Gerät an. Schließen Sie <u>nicht</u> den Druckmessschlauch am Gerät an. Dichten Sie das andere Ende des Schlauchsystems außer dem Druckmessschlauch mit der Hand ab und schalten Sie das Gerät ein. Nach 30 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn nötig, wiederholen Sie diese Prozedur. Prüfen Sie, ob die Rampenanzeige erscheint. Betätigen Sie ggfs. die Rampentaste, um die Funktion auszuschalten (siehe Punkt 3 der Abbildung 2 – Draufsicht auf Seite 41). Die Therapiedrucke wurden von Ihrem Arzt verschrieben und lassen sich durch eine ärztliche Verschreibung ändern.
Trockenheit oder Irritationen im Nasen- und/oder Rachenraum	Die Luft ist zu trocken.	Befeuchten Sie die Raumluft mit Hilfe eines Luftbefeuchters. Ihr Arzt oder Kundendienst können Ihnen bei der Auswahl eines Atemluftbefeuchters behilflich sein.
Kalte Nase.	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Raumtemperatur oder führen Sie den Schlauch unter der Bettdecke, um einem zu hohen Wärmeverlust entgegenzuwirken.
Laufende Nase.	Reaktion auf Luftmenge und Druck.	Unterbrechen Sie die Behandlung. Wenden Sie sich an den medizintechnischen Kundendienst oder an den behandelnden Arzt.
Die vom Gerät abgegebene Luft ist zu heiß.	Möglicherweise sind die Luftfilter verschmutzt. Die Luftzufuhr ist blockiert. Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Reinigen bzw. wechseln Sie die Filter (siehe Kapitel „Pflege, Instandhaltung und Reinigung“ auf Seite 55). Entfernen Sie jegliche Wäsche, Bettzeug oder Kleidungsstücke vom Beatmungsgerät <i>GK425</i> . Senken Sie die Raumtemperatur. Achten Sie darauf, dass das Beatmungsgerät <i>GK425</i> nicht zu nahe an der Heizung oder einer anderen Heizquelle steht. Der Schlauch darf nicht von Kleidungsstücken oder Decken bedeckt sein.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	PROBLEMLÖSUNG
Schmerzen in Nase, Nasennebenhöhle n oder Ohren.	Infektion der Nasennebenhöhlen oder geschwollene Nasen- bzw. Nasennebenhöhlenschleimhäute.	Unterbrechen Sie die Behandlung. Suchen Sie sofort Ihren behandelnden Arzt auf.
Trockenheit oder Irritation der Augen.	Aus der Maske strömt seitlich Luft. (Leckage).	Setzen Sie die Atemmaske erneut auf und achten auf einen festen, aber bequemen Sitz der Maske. Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder Ihren Kundendienst nach anderen Maskengrößen.
Hautirritationen im Auflagebereich der Atemmaske.	Das Kopfgeschirr ist zu eng eingestellt oder besitzt die falsche Größe. Allergische Reaktionen auf Bestandteile der Atemmaske.	Stellen Sie das Kopfgeschirr weiter. Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder Ihren Kundendienst nach anderen Kopfgeschirr- bzw. Maskengrößen. Unterbrechen Sie die Behandlung und informieren Sie Ihren Arzt oder Kundendienst.
Erneutes Auftreten der ersten Anzeichen des Schlafapnoe-syndroms.	Das <i>GoodKnight</i> 425 ist nicht richtig eingestellt oder funktioniert nicht richtig. Ihr körperlicher Zustand hat sich geändert oder Sie benötigen einen höheren Therapiedruck.	Bitten Sie Ihren Kundendienst um Überprüfung des Geräts. Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt.
Das <i>GoodKnight</i> 425 lässt sich nicht einschalten (keine Anzeige im Display).	Das Netzteil ist nicht korrekt angeschlossen. Keine Stromzufuhr. Die Sicherung ist defekt.	Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Netzteil, dem Gerät <i>GK425</i> und der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Netzstecker ab und schließen Sie ihn dann wieder an. Schließen Sie ein anderes Gerät (z.B. Lampe, Radio o. ä.) an die Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose Wechselstrom liefert. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das <i>GoodKnight</i> 425 arbeitet nicht zufriedenstellend und scheint gestört zu sein.	Elektromagnetische Störquellen.	Entfernen Sie das Gerät von möglichen Störquellen wie z. B. Halogenleuchten, schnurlosen Telefonen etc.
In 1 wird im Display angezeigt.	Eine länger als 30 Sekunden dauernde Unterbrechung wurde im Patientenkreis festgestellt.	Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt, sobald die Maske wieder verbunden wird oder wenn Sie die Taste Inbetriebnahme/Standby zweimal betätigen. Überprüfen Sie anderenfalls die Verbindung des Schlauchsystems.
In 2 wird im Display angezeigt.	Das Gerät hat einen länger als 10 Sekunden dauernden Überdruck ermittelt.	Prüfen Sie, ob der dünne Druckmessschlauch richtig an den Druckmessanschluss des Geräts angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht eingeklemmt, sauber und trocken ist. Beachten Sie die beim Schlauchsystem beiliegende Anleitung.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	PROBLEMLÖSUNG
In 3 erscheint in der Anzeige.	Absinken der Spannung bei der Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Netzteil, dem Gerät und der Netzsteckdose. Ziehen Sie das Netzteil heraus und stecken es anschließend wieder in die Netzsteckdose. Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Überprüfen Sie die Batterie und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Bleibt die Anzeige unverändert, wenden Sie sich an den Kundendienst.
In 4 wird im Display angezeigt.	Es wurde eine zu hohe Atemfrequenz erfasst.	Drücken Sie zwei Mal auf die Taste Inbetriebnahme/Standby des GK425. Überprüfen Sie die Verbindung des Schlauchsystems. Wiederholt sich der Vorfall, wenden Sie sich an den Serviceanbieter.
Er XX erscheint in der Anzeige. (wobei XX = 2 Ziffern).	Das Gerät hat eine Betriebsstörung entdeckt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsmerkmale des Gerätes

Einstellbarer Druckbereich des <i>GoodKnight 425</i> :	3 cmH ₂ O bis 25 cmH ₂ O ± 1 cmH ₂ O Druck ist in 0,5 cmH ₂ O-Schritten einstellbar
Höchstdruck am Luftauslaß bei der Ersteinstellung:	36 cmH ₂ O
Rampendauer:	0 bis 30 Minuten ± 1 Minute Rampendauer ist in 5 Minuten-Schritten
Luftauslass Patientenseite:	Schlauch mit einem Durchmesser von 22 mm
Lautstärke gemäß Norm EN ISO 17510-1:2002 :	< 29 dB(A)
Lautstärke gemäß Norm EN ISO 17510-1:2009 :	< 31dB(A)
Lebensdauer der auf die Platine geschweißten Batterie: (gemäß Herstellerangaben)	5 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Außenabmessungen (B x T x H) :	144 x 79 x 198 mm (ohne Netzteil)
Gewicht:	0,780 kg (ohne Netzteil)


Transport- und Lagerungsbedingungen

Temperatur:	-20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis zu 95 % (nicht kondensierend)
Luftdruck:	500 hPa bis 1060 hPa

Umgebungsbedingungen beim Betrieb

Temperatur:	+5°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	zwischen 15 % und 95 % (nicht kondensierend)
Luftdruck:	700 hPa bis 1060 hPa
Höhenbereich:	ca. 0 – 2400 m

Elektrische Eigenschaften des Netzteils

Netzteil der Klasse II:	Eingangsspannung: 100 – 240 VAC (-15%, +10%), 50 / 60 Hz (±1 Hz)
	Stromaufnahme, Eingangsstrom: 1,5 A.
	Ausgangsspannung: 13 V – 4 A.
Mitgeliefertes Netzteil:	ONTOP, Modell SA165A – 125OU-3.

VORSICHT

- **Verwenden Sie nur das Netzteil, das im Lieferumfang des Gerätes enthalten ist.**
- **Das Netzteil wird nicht repariert. Bei defektem Netzteil informieren Sie Ihren Kundendienst, damit ein Austausch des Netzteils vorgenommen wird.**

Elektrische Daten des Gerätes


Eingangsspannung: 13 V – 3 A.

Maximaler Verbrauch: 40 W ohne Atembefeuchter

Stromverbrauch bei 25 cmH₂O bei einem Leckageloch von 4 mm : 1,1 A.



Gleichstrom

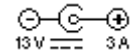

13 V-Batteriebetrieb

Symbole



Inbetriebnahme/Standby



Systemeinstellungen



Rampe



RS-232

Serieller Anschluß PC



Erhöhung des jeweiligen Parameters



Erniedrigung des jeweiligen Parameters



Ausgang

IPX1

Gegen vertikal herabfallende Wassertropfen geschütztes Gerät



Gerätetyp BF



Gemäss den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), müssen Altgeräte vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden. Kontaktieren Sie hierzu den Kundendienst Ihres Landes.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.

CE 0459

Das Gerät entspricht den Anforderungen an Medizinprodukte gemäß der Richtlinie 93/42/EWG.

Gesetzliche Anforderungen

Die mit diesem medizinischen Gerät verbundenen Risiken wurden nach der Norm ISO 14971:2007 abgeschätzt. Dies betrifft insbesondere das verbleibende allgemeine Restrisiko.

Grundlegende Leistung im Zusammenhang mit der elektromagnetischen Verträglichkeit

Während der gesamten Durchführung der Versuche zur elektromagnetischen Verträglichkeit haben sich die Geräteeinstellungen nicht geändert und das Druckniveau ist konstant entsprechend dem Wert des eingestellten Drucks bei $\pm 0,5$ cm H₂O geblieben.

Der mit dem Gerät verbundene PC hat den Druck durchgängig angezeigt. Obwohl zwischenzeitlich Unterbrechungen der Kommunikation aufgetreten sind, hat das Gerät durchgängig weiter funktioniert und der PC konnte wieder ans Gerät angeschlossen werden.

Elektromagnetische Strahlung			
Die Geräte GoodKnight 425/425ST sind dafür ausgelegt, in der unten spezifizierten elektromagnetischen Umgebung zu funktionieren. Der Kunde oder Benutzer eines Geräts GoodKnight 425/425ST muss sich vergewissern, dass die Benutzung tatsächlich in einer derartigen Umgebung erfolgt.			
Strahlungstest	Konformität	Empfohlene elektromagnetische Umgebung	
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Die Geräte GoodKnight 425/425ST verwenden die HF-Energie ausschließlich für den internen Betrieb. Die HF-Emissionen der Geräte sind daher sehr schwach und sollten keine Interferenzen mit einem elektronischen Gerät in der Nähe verursachen.	
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Die Geräte GoodKnight 425/425ST sind für die Verwendung in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich Wohneinrichtungen sowie solcher Einrichtungen, die direkt mit dem öffentlichen Netz verbunden sind, das die Wohneinrichtungen versorgt.	
Oberschwingungsströme IEC 61000-3-2	Klasse A		
Spannungsschwankungen und Flicker IEC 61000-3-3	Konform		
Elektromagnetische Immunität			
Die Geräte GoodKnight 425/425ST sind dafür ausgelegt, in der unten spezifizierten elektromagnetischen Umgebung zu funktionieren. Der Kunde oder Benutzer eines Geräts GoodKnight 425/425ST muss sich vergewissern, dass die Benutzung tatsächlich in einer derartigen Umgebung erfolgt.			
Immunitätstest	Testniveau IEC 60601	Konformitätsstufe	Empfohlene elektromagnetische Umgebung
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV bei Kontaktentladung ± 8 kV bei Luftentladung	± 6 kV bei Kontaktentladung ± 8 kV bei Luftentladung	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV an Versorgungsleitungen ± 1 kV an Eingangs-/Ausgangsleitungen	± 2 kV an Versorgungsleitungen ± 1 kV an Eingangs-/Ausgangsleitungen	Die Qualität der Netzversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	± 1 kV im Gegentakt ± 2 kV im Gleichtakt	± 1 kV im Gegentakt ± 2 kV im Gleichtakt	Die Qualität der Netzversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen. IEC 61000-4-11	< 5% U _T (Einbruch der U _T > 95 %) während 0,5 Zyklen 40% U _T (Einbruch der U _T 60 %) während	< 5% U _T (Einbruch der U _T > 95 %) während 0,5 Zyklen 40% U _T (Einbruch der U _T 60 %) während 5	Die Qualität der Netzversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender eines Geräts GoodKnight 425/425ST fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung benötigt, wird

Elektromagnetische Immunität (Fortsetzung)			
	Zyklen 70% U_T (Einbruch der U_T 30 %) während 25 Zyklen < 5% U_T (Einbruch der U_T >95 %) während 5 s	Zyklen 70% U_T (Einbruch der U_T 30 %) während 25 Zyklen < 5% U_T (Einbruch der U_T >95 %) während 5 s	empfohlen, das Gerät GoodKnight 425/425ST aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu speisen.
Magnetfelder in den Versorgungsfrequenzen (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Die HF-Magnetfelder sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.

Anmerkung: U_T ist die Hauptnetzspannung vor Anwendung des Testniveaus.

Elektromagnetische Immunität – Geleitete und gestrahlte HF-Störgrößen

Die Geräte **GoodKnight 425/425ST** sind dafür ausgelegt, in der unten spezifizierten elektromagnetischen Umgebung zu funktionieren. Der Kunde oder Benutzer eines Geräts **GoodKnight 425/425ST** muss sich vergewissern, dass die Benutzung tatsächlich in einer derartigen Umgebung erfolgt.

Immunitätstest	Testniveau IEC 60601	Konformitätsstufe	Empfohlene elektromagnetische Umgebung
Geleitete HF-Störgrößen IEC 61000-4-6	3 V rms 150 kHz bis 80 MHz	3 V rms 150 kHz bis 80 MHz	Die tragbaren Ausrüstungen zur HF-Kommunikation dürfen nicht in der Nähe irgendeines Teils des Geräts GoodKnight 425/425ST oder der daran angeschlossenen Kabel verwendet werden. Empfohlener Abstand: $d = 1,2\sqrt{P}$
Gestrahlte HF-Störgrößen IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz

P ist die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß den Angaben des Herstellers und gemäß der Frequenz desselben Senders, und d ist der empfohlene Abstand in Metern (m).

Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort^a geringer als die Konformitätsstufe für jeden Frequenzbereich sein.^b

In der Umgebung von Geräten, die das folgende Symbol tragen, sind elektromagnetische Interferenzen möglich:



ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2: Diese Empfehlungen sind unter Umständen nicht in allen Fällen anwendbar. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

^(a) Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts durchgeführt werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem ein Gerät **GoodKnight 425/425ST** benutzt werden soll, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte das Gerät **GoodKnight 425/425ST** beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des Geräts **GoodKnight 425/425ST**.

^(b) Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz hinaus sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.

Empfohlener Abstand zwischen einem mobilen, tragbaren Gerät zur HF-Kommunikation und einem Gerät der Produktreihe **GoodKnight 425/425ST**

Die Geräte **GoodKnight 425/425ST** sind zur Verwendung in einer Umgebung ausgelegt, in der die HF-Störungen kontrolliert sind. Der Kunde oder Benutzer eines Geräts **GoodKnight 425/425ST** kann dazu beitragen, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen mobilen, tragbaren HF-Kommunikationsgeräten und dem Gerät **GoodKnight 425/425ST** so wählt wie nachfolgend spezifiziert. Dabei ist die maximale Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts zu beachten.

Maximale Ausgangsleistung des Senders (W)	Maximale Ausgangsleistung des Senders (W)		
	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,01	0,01	0,01
0,1	0,1	0,1	0,1
1	1	1	1
10	10	10	10
100	100	100	100

Für Sender, deren maximale Ausgangsleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angabe des Senderherstellers ist.

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2: Diese Empfehlungen sind unter Umständen nicht in allen Fällen anwendbar. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

Konforme Kabel

Vorsicht

Die Verwendung anderer Zubehöerteile und Kabel als aufgeführt, kann zu einem Anstieg der Emissionen oder zu einer geringeren Immunität der Geräte **GoodKnight 425/425ST** führen.

M-213930-04 Kabel RS232 2m Goodknight 425	6,5 ft (2m)
M-213930-06 Kabel RS232 15m Goodknight 425	50 ft (15m)



GoodKnight® 425 **GoodKnight® 425 ST**

Manuale del paziente

INDICE

PRIMA DI COMINCIARE.....	69
NORME DI SICUREZZA	69
INDICAZIONI PER L'USO	70
CONDIZIONI DI UTILIZZO.....	70
PRECAUZIONI PER L'USO.....	70
CONTROLLO DEI COMPONENTI	71
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO.....	72
INSTALLAZIONE.....	75
INSTALLAZIONE STANDARD.....	75
INSTALLAZIONE DI UN ADATTATORE PER OSSIGENO (OPZIONALE)	76
INSTALLAZIONE DI UN UMIDIFICATORE.....	77
INSTALLAZIONE IN CASO DI ALIMENTAZIONE A BATTERIA O ACCENDISIGARI	79
UTILIZZO	80
INIZIO DEL TRATTAMENTO	80
CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO	81
UTILIZZO DELLA RAMPA.....	82
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULL' APPARECCHIO	84
REGOLAZIONE DELL'ORA.....	86
MANUTENZIONE E PULIZIA.....	87
GOODKNIGHT 425	87
FILTRI DI ENTRATA DELL'ARIA	87
CIRCUITO PAZIENTE	87
MASCHERA NASALE	88
UMIDIFICATORE	88
IN CASO DI PROBLEMI	89
CARATTERISTICHE TECNICHE	92
PRESTAZIONI DELL' APPARECCHIO.....	92
CARATTERISTICHE FISICHE.....	92
CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO.....	92
CONDIZIONI DI UTILIZZO.....	92
CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA CASSETTA DI ALIMENTAZIONE	92
CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL'APPARECCHIO	93
SIMBOLI	93
STANDARD NORMATIVI	93
PRESTAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.....	94



L'apparecchio **GoodKnight 425** (GK425) è destinato al trattamento dei pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) durante il sonno. La caratteristica principale di questa patologia è l'insorgenza di arresti respiratori durante la notte multipli dovuti al restringimento delle vie aeree superiori ed in grado di disturbare il sonno. L'apparecchio **GoodKnight 425** eroga due livelli di pressione (uno inspiratorio e uno espiratorio) che impediscono l'eventuale ostruzione delle vie aeree superiori ed eliminano ogni rischio di arresto respiratorio. Sul modello **GoodKnight 425 ST** è possibile regolare una frequenza di sicurezza.

E' indispensabile conoscere i limiti di utilizzo dell'apparecchio. Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio *GoodKnight 425*.

Le informazioni contenute nel manuale indicano come utilizzare l'apparecchio in condizioni ottimali di sicurezza e funzionamento. Per eventuali domande in merito all'apparecchio ed al suo utilizzo, rivolgersi al proprio medico oppure al proprio assistente domiciliare.

Il trattamento della patologia deve essere prescritto dal proprio medico. Il medico deve determinare i vari parametri che devono essere programmati dal personale ospedaliero oppure dal proprio assistente domiciliare. Il paziente non deve mai effettuare alcuna regolazione.

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale si riferiscono agli apparecchi *GoodKnight 425* e *GoodKnight 425 ST*, salvo indicazione contraria.

GoodKnight® è un marchio registrato della Nellcor Puritan Bennett Inc.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

PRIMA DI COMINCIARE

Norme di sicurezza

Al fine di garantire un utilizzo sicuro ed efficace dell'apparecchio, leggere tutte le informazioni contenute nel presente manuale istruzioni. Per maggiori informazioni, contattare il medico di fiducia o l'assistente domiciliare. Prestare particolare attenzione alle frasi precedute dai seguenti termini:

AVVERTENZA

Indica che sussiste il pericolo di morte o di incidente per il paziente o per altre persone.

ATTENZIONE

Indica che sussiste il rischio di danni materiali a questo o ad altro apparecchio.

NOTA

Indica punti particolari per un utilizzo più efficiente e pratico dell'apparecchio.

AVVERTENZA

1. Prima dell'utilizzo, controllare l'apparecchio **GoodKnight 425** come indicato nel capitolo "Controllo dei componenti" a pagina 71.
2. In caso di apporto supplementare di ossigeno, rispettare scrupolosamente le istruzioni e le norme di sicurezza relative all'utilizzo dell'ossigeno.
3. Utilizzare esclusivamente gli accessori messi a disposizione o proposti dall'assistente domiciliare. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso di tutti gli eventuali accessori.
4. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore elettrico specifico fornito con l'apparecchio.
5. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vapori infiammabili.
6. Rispettare le istruzioni per l'installazione dell'apparecchio riportate nel capitolo "Installazione" a pagina 75. Mantenere l'apparecchio sempre lontano da qualsiasi fonte d'acqua.
7. Non intasare accidentalmente o intenzionalmente l'uscita dell'aria o altre aperture dell'apparecchio oppure del circuito respiratorio.
8. Non introdurre liquidi oppure oggetti nell'uscita dell'aria.
9. Rivolgersi al proprio medico qualora in seguito all'utilizzo dell'apparecchio **GoodKnight 425** si presentino i seguenti sintomi: disidratazione delle vie aeree o del naso, sensibilità cutanea, gocciolamento del naso, dolori alle orecchie, disturbi a livello del seno nasale, sonnolenza diurna, sbalzi di umore, disorientamento, irritabilità oppure perdite di memoria.
10. In caso di qualunque malfunzionamento dell'apparecchio, contattare il servizio assistenza a domicilio. La manutenzione di questa attrezzatura solleva dalla responsabilità solo il personale competente. Non cercare di aprire l'apparecchio.

Indicazioni per l'uso

L'apparecchio *GoodKnight* 425 è indicato per il trattamento dei problemi respiratori ostruttivi del sonno in pazienti il cui peso sia superiore a 30 kg.

L'apparecchio *GoodKnight* 425 può essere munito di un umidificatore attivo *GoodKnight* H₂O. Tale umidificatore riscalda e aumenta il tasso di umidità dell'aria rilasciata al paziente dall'apparecchio a Pressione Positiva Continua. Il flusso d'aria diventa freddo quando la funzione di riscaldamento non è attiva ed il serbatoio è riempito d'acqua.

Condizioni di utilizzo

L'apparecchio *GoodKnight* 425 può essere usato a domicilio, in ospedale o in casa di cura. È possibile portare facilmente in viaggio l'apparecchio e utilizzarlo in hotel, in macchina o in camion.

L'apparecchio *GoodKnight* 425 è un apparecchio medico elettrico, è pertanto necessario rispettare, in fase d'installazione, le istruzioni relative alla compatibilità elettromagnetica riportate nel presente manuale.

Precauzioni per l'uso

Come ogni dispositivo elettromedicale, in presenza di apparecchiature mobili o portatili di comunicazione a radiofrequenza il dispositivo *GoodKnight* 425 può subire delle interferenze.

Il dispositivo *GoodKnight* 425 non è un dispositivo dal quale dipende la vita del paziente.

AVVERTENZE

Come tutti gli apparecchi che generano una Pressione Positiva Continua, non usare l'apparecchio *GoodKnight* 425 se si soffre di una delle patologie di seguito descritte. In caso contrario, contattare il proprio medico prima d'iniziare il trattamento.

- 1. Pneumoencefalite, trauma o intervento chirurgico recente con postumi di fistola cranio-rinofaringea.**
- 2. Insufficienza cardiaca scompensata o ipotensione, in particolare in caso di scompenso del volume sanguigno oppure in caso di problemi di aritmia cardiaca.**

ATTENZIONE

Come tutti gli apparecchi che generano una Pressione Positiva Continua, usare **con precauzione** l'apparecchio *GoodKnight* 425 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- Pazienti disidratati o passibili di divenirlo in seguito ad una riduzione dell'apporto idrico o ad un trattamento diuretico, compresi i cambiamenti volontari o involontari di trattamento.
- Epistassi massiccia o precedenti di epistassi massiccia.
- Trauma o intervento chirurgico recente con postumi di fistola cranio-rinofaringea.
- Enfisema bolloso grave o con precedenti complicati da pneumotorace.
- Sinusite acuta, otite media o perforazione della membrana del timpano.
- Claustrofobia grave.

Non usare la funzione di umidificatore attivo in caso di by-pass delle vie respiratorie sopraglottiche.

Controllo dei componenti

Per potere utilizzare l'apparecchio **GoodKnight 425** provvisto del suo alimentatore elettrico specifico, si deve come minimo disporre dei seguenti elementi :

- Un circuito paziente dotato di tubo per il controllo della pressione.
- Una maschera nasale completa di accessori per il fissaggio, come indicato nelle istruzioni d'uso della maschera.

Oltre agli accessori, il medico può prescrivere l'utilizzo di un umidificatore. In tal caso, accertarsi di disporre di tutti gli accessori necessari per l'umidificatore, come indicato nelle note d'uso dell'umidificatore.

Controllare scrupolosamente l'apparecchio e tutti gli accessori. Controllare in particolare che i tubi non siano usurati e la maschera non presenti fessure o alterazioni a livello della conchiglia (la parte rigida esterna) e del soffietto (la parte morbida della maschera a contatto con il viso).

Controllare l'apparecchio e l'alimentatore elettrico e verificare che non presentino alcun difetto visibile. Attaccare l'apparecchio alla rete attraverso il del suo alimentatore elettrico facendo riferimento alle fasi 4 e 5 del capitolo "Installazione standard" a pagina 75.

Il tipo di apparecchio si visualizza dopo qualche secondo, dopodiché viene sostituito dalla schermata di stand by seguente, indicante l'ora (il valore visualizzato è fornito solo a titolo d'esempio) :

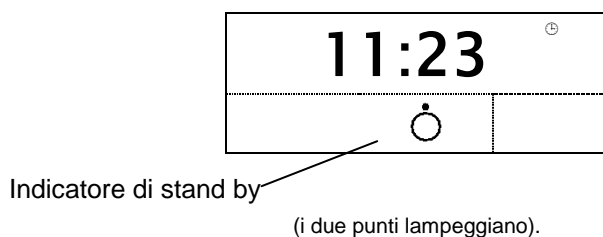


Figura 1 – Immagine del display quando l'apparecchio è in stand by

Se l'alimentazione è stata interrotta e poi ristabilita mentre l'apparecchio era in funzione, il display indica la pressione. L'apparecchio rimane nella stessa modalità in cui si trovava nel momento della disconnessione del cavo d'alimentazione e si regola sulla pressione utilizzata in quel momento.

Mettere in funzione l'apparecchio premendo il bottone messa in Attivazione/Standby (Pos. 4 - Figura 2 – Vista superiore, pagina 73). La turbina deve accendersi e il rumore deve essere regolare.

Arrestare l'apparecchio premendo il bottone messa in Attivazione/Standby e staccare il cavo dell'alimentatore della rete.

AVVERTENZA

In caso di problemi o anomalie, non iniziare il trattamento e rivolgersi al proprio assistente domiciliare.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio **GoodKnight 425** è alimentato da un alimentatore elettrico esterno e fornito di accessori specifici, com'è qui sotto descritto.

Vedere le figure 2, 3 e 4 a pagina 73.

1. Display

Permette di visualizzare varie informazioni come la pressione, le regolazioni dell'apparecchio oppure l'ora. Per ulteriori informazioni, riferirsi al capitolo "Accesso alle informazioni sull'apparecchio" a pagina 84.

2. Pulsante di accesso alle informazioni

Permette di accedere alle varie informazioni sull'apparecchio. Per maggiori dettagli, vedere il capitolo "Accesso alle informazioni sull'apparecchio" a pagina 84.

3. Pulsante della rampa

Permette di attivare o disattivare la rampa di aumento della pressione. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Utilizzo della rampa" a pagina 82. È ugualmente utilizzato per diminuire il valore dei parametri al momento della regolazione dell'apparecchio.

4. Pulsante di messa in Attivazione/Standby

Permette di accendere o spegnere l'apparecchio. È ugualmente utilizzato per aumentare il valore dei parametri al momento della regolazione dell'apparecchio.

5. Presa di pressione

Il connettore al quale viene collegato il tubo per il controllo della pressione. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Installazione" a pagina 75.

6. Connettore di uscita

L'uscita dell'aria alla quale viene collegato il tubo del circuito paziente. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Installazione" a pagina 75.

7. Connettore per collegamento seriale

L'utilizzo di questo connettore è riservato esclusivamente al medico o al servizio assistenza. A questo connettore non deve essere collegato nulla.

8. Presa d'alimentazione

Permette d'alimentare l'apparecchio con l'alimentatore o con una batteria esterna. Per ulteriori informazioni, riferirsi al capitolo "Installazione in caso di alimentazione a batteria o accendisigari" a pagina 79.

9. Filtri di entrata dell'aria

Questi filtri prevengono la penetrazione della polvere nell'apparecchio e nel flusso d'aria. Per maggiori informazioni sulla manutenzione dei filtri, vedere il capitolo "Manutenzione e pulizia" a pagina 87.

I componenti illustrati in questa figura sono descritti a pagina 72.

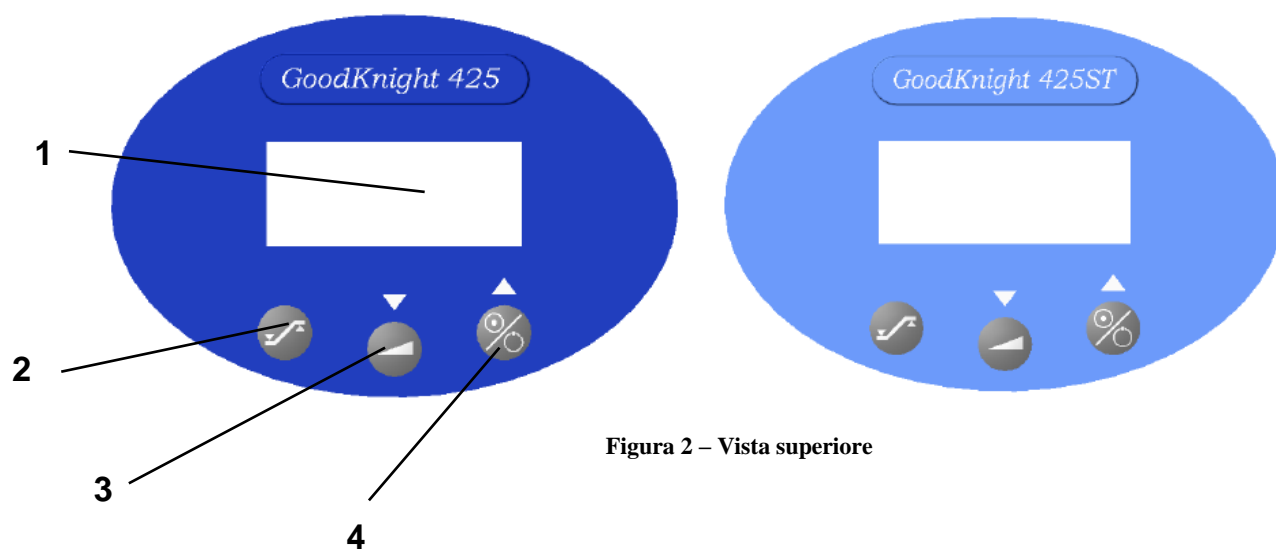


Figura 2 – Vista superiore



Figura 3 – Vista generale

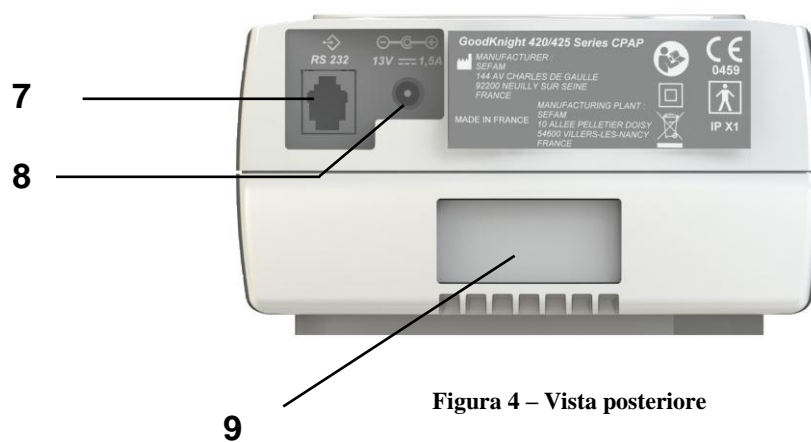


Figura 4 – Vista posteriore

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

INSTALLAZIONE

Questo capitolo descrive come collegare gli accessori ed i cavi all'apparecchio. Prima di iniziare l'installazione, controllare l'apparecchio e gli accessori come indicato nel capitolo "Controllo dei componenti" a pagina 71.

ATTENZIONE

- In generale, posizionare l'apparecchio su una superficie stabile. Non posizionare l'apparecchio troppo vicino ad una parete oppure ad un altro ostacolo, altrimenti si può impedire l'ingresso dell'aria nell'apparecchio.
- Non utilizzare il dispositivo **GoodKnight 425** a contatto con o posto su apparecchio diverso da un umidificatore **GoodKnight H₂O**.

Installazione standard

1. Collegare il circuito paziente all'apparecchio. A tale scopo, collegare il tubicino del circuito paziente alla presa di pressione (Pos. 5 - Figura 3 – Vista generale a pagina 73). Collegare l'estremità del circuito paziente al connettore di uscita dell'apparecchio (Pos. 6 - Figura 3 – Vista generale a pagina 73).

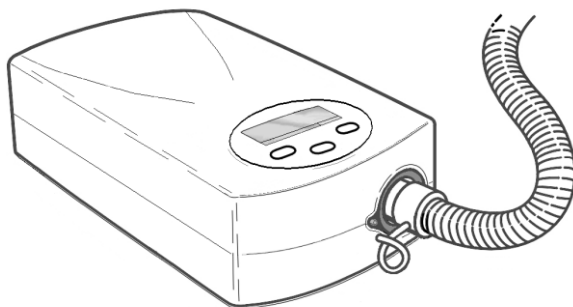


Figura 5 – Collegamento del circuito paziente all'apparecchio

AVVERTENZA


Controllare che il tubicino della pressione non sia storto o piegato.

2. Preparare la maschera come indicato nelle relative istruzioni per l'uso.
3. Collegare la maschera all'altra estremità del circuito paziente.
4. Connettere il cavo dell'alimentatore alla presa d'alimentazione situata sul retro dell'apparecchio (Pos. 8 - Figura 4 – Vista posteriore a pagina 73).

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore specifico fornito insieme all'apparecchio.

5. Attaccare la presa dell'alimentatore alla rete. Per qualche secondo si visualizza il tipo di apparecchio, poi la seguente schermata di stand by indicante le ore e i minuti:

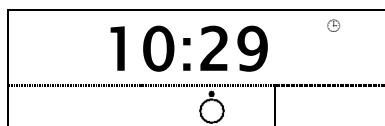

I due punti lampeggiano.

6. L'apparecchio è pronto all'uso. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Utilizzo" a pagina 80.

Installazione di un adattatore per ossigeno (opzionale)

In caso di apporto supplementare di ossigeno, fare riferimento alle istruzioni del produttore per installare la valvola specifica diretta a impedire l'accumulo di ossigeno nell'apparecchio in caso di arresto di quest'ultimo, e sostituire il punto 3 dell'installazione standard con il seguente:

- Collegare un capo dell'adattatore di ossigeno all'estremità libera del circuito paziente e l'altro capo alla maschera.

Per proseguire l'installazione, effettuare i punti da 4 a 6 dell'installazione standard.

AVVERTENZE

- In caso di utilizzo dell'ossigeno, seguire sempre le istruzioni del medico oppure dell'assistente domiciliare.
- Non fumare in presenza di ossigeno.
- Non iniettare ossigeno nell'entrata dell'aria dell'apparecchio.
- Seguire attentamente i punti relativi all'inizio ed alla conclusione del trattamento contenuti nel capitolo "Utilizzo" a pagina 80.
- Qualora si utilizzi ossigeno, chiudere l'erogazione di ossigeno se l'apparecchio non funziona. Se viene mantenuta l'erogazione di ossigeno con apparecchio spento, l'ossigeno alimentato nel circuito paziente potrebbe accumularsi nel locale con conseguente rischio di incendio.

ATTENZIONE

Se la portata di flusso dell'ossigeno è fissa, la concentrazione di ossigeno inspirato varierà secondo le regolazioni della pressione, dell'andamento respiratorio del paziente, della selezione dell'interfaccia e della velocità della perdita. Questa precauzione è applicabile alla maggior parte degli apparecchi a Pressione Positiva Continua.

Installazione di un umidificatore

L'umidificatore riscaldato GoodKnight H₂O può essere utilizzato con l'apparecchio GoodKnight 425. Si veda il manuale d'uso relativo prima di installarlo, rispettando le prescrizioni di sicurezza.

AVVERTENZA

L'umidificatore deve essere riempito d'acqua prima di essere collegato all'apparecchio GoodKnight 425.

ATTENZIONE

Per evitare eventuali danni causati dall'acqua, l'umidificatore deve essere sempre collocato al di sotto dell'apparecchio *GoodKnight 425*.

Invece di eseguire il punto 1 dell'installazione standard, procedere come segue:

AVVERTENZA

Le seguenti istruzioni sono line guida di massima, da utilizzare per collegare l'umidificatore GoodKnight H₂O alla BiLevel GoodKnight 425. Seguire sempre le specifiche istruzioni allegate al vostro umidificatore per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo.

1. Togliere il serbatoio dell'acqua.
2. Versare acqua con cautela nel foro apposito, facendo attenzione a non superare il livello massimo.
3. Posizionare l'umidificatore attivo *GoodKnight H₂O* su una superficie piana.
4. Dotare l'apparecchio *GoodKnight 425* dell'adattatore di collegamento fornito con l'umidificatore *GoodKnight H₂O*.
5. Posizionare l'apparecchio *GoodKnight 425* sull'umidificatore attivo, *GoodKnight H₂O* come indicato dalla Figura 6 – Collegamento di GoodKnight 425 all'umidificatore attivo a pagina 78.
 - Il lato anteriore dell'apparecchio deve essere orientato sui collegamenti dell'umidificatore *GoodKnight H₂O*
 - La base dell'apparecchio *GoodKnight 425* deve inserirsi nelle apposite guide dell'umidificatore attivo. Collegare una delle estremità del tubo corto al connettore di uscita dell'apparecchio.

ATTENZIONE

- E' importante posizionare gli apparecchi su una superficie piana e stabile e tenerli lontani da fonti di calore.
- Non posizionare l'umidificatore attivo *GoodKnight H₂O* sopra l'apparecchio a pressione positiva o sul generatore dei due livelli di pressione perché l'accidentale fuoriuscita dell'acqua rischierebbe di gocciolare sull'apparecchio e quindi danneggiarlo.



Figura 6 – Collegamento di GoodKnight 425 all'umidificatore attivo GoodKnight H2O

6. Riposizionare il serbatoio avendo cura di non rovesciare l'acqua e inserendo il connettore di entrata dell'umidificatore fino all'apposito arresto sull'adattatore di collegamento.
7. Collegare il tubicino di controllo della pressione, alla presa di pressione dell'apparecchio *GoodKnight 425*.
8. Collegare il circuito paziente al connettore di uscita, situato sul serbatoio dell'acqua dell'umidificatore riscaldato *GoodKnight H₂O*.

Per proseguire l'installazione, effettuare i punti da 2 a 6 dell'installazione standard descritta a pagina 75.

ATTENZIONE

Si consiglia di scollegare l'apparecchio GoodKnight 425 dall'umidificatore e di vuotarne il serbatoio prima di spostare il gruppo, in modo da eliminare l'eventuale penetrazione dell'acqua nell'apparecchio, che potrebbe causare danni irreversibili.

Installazione in caso di alimentazione a batteria o accendisigari

E' possibile alimentare la BiLevel GoodKnight 425 / 425 ST utilizzando una connessione diretta ad una batteria a 12 Volt utilizzando l'apposito cavo di connessione opzionale.

ATTENZIONE

- **Non utilizzare un cavo di alimentazione diverso da quello in dotazione al *GoodKnight 425*. In caso contrario, sussiste il rischio di danni all'apparecchio e alla batteria.**
- **Non utilizzare fonti di alimentazione diverse da corrente continua 12 Volt e rispettare le polarità dei collegamenti (polo positivo + e polo negativo -).**

Per l'installazione del cavo della batteria, sostituire i punti 4 e 5 dell'installazione standard con quanto segue:

1. Collegare il cavo di alimentazione della batteria al relativo connettore situato sul lato posteriore dell'apparecchio (Pos. 8 - Figura 4 – Vista posteriore a pagina 73).
2. Collegare l'altra estremità del cavo direttamente alla batteria.

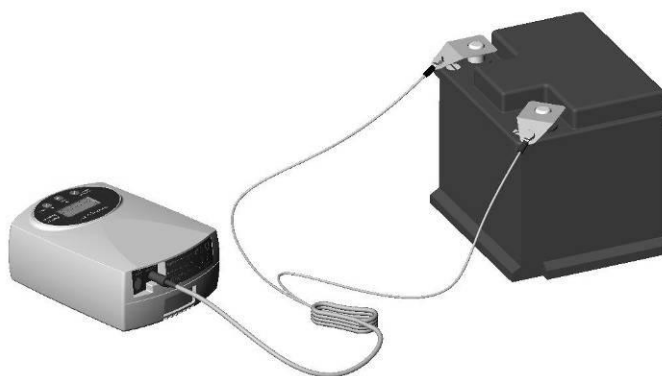


Figura 8 - Connessione della GoodKnight 425 alla batteria a 12 Volt

NOTA

L'apparecchio *GoodKnight 425* può avere un consumo elevato. Si raccomanda di utilizzare sempre una batteria completamente carica.

E' possibile inoltre alimentare la BiLevel GoodKnight 425 utilizzando un cavo di alimentazione opzionale tramite il collegamento alla presa accendi-sigari presente all'interno dell'autovettura.


Per questo, sostituire le fasi 4 e 5 dell'installazione standard con le seguenti :

1. Connettere il cavo accendisigari alla presa d'alimentazione situata sul retro dell'apparecchio (Pos. 8 - Figura 4 – Vista posteriore a pagina 73).
2. Connettere l'altro capo del cavo direttamente alla presa accendisigari.

Questo capitolo descrive come utilizzare l'apparecchio dopo averlo installato come indicato al capitolo precedente. Il capitolo descrive anche il funzionamento della funzione di aumento di pressione (rampa) e come accedere alle informazioni sulle regolazioni (le regolazioni non possono essere modificate, ma soltanto visualizzate).

Inizio del trattamento

Dopo aver installato l'apparecchio in conformità alle istruzioni contenute nel capitolo precedente, per iniziare il trattamento procedere nel seguente modo:

1. Mettere in funzione l'apparecchio premendo il pulsante di messa in Attivazione/Standby .
Il display visualizza la pressione misurata in maniera che due indicatori mostrino uno il funzionamento dell'apparecchio e l'altro quello del corretto utilizzo da parte del paziente (vedere Figura 7 - Vista del display con l'apparecchio in funzione).

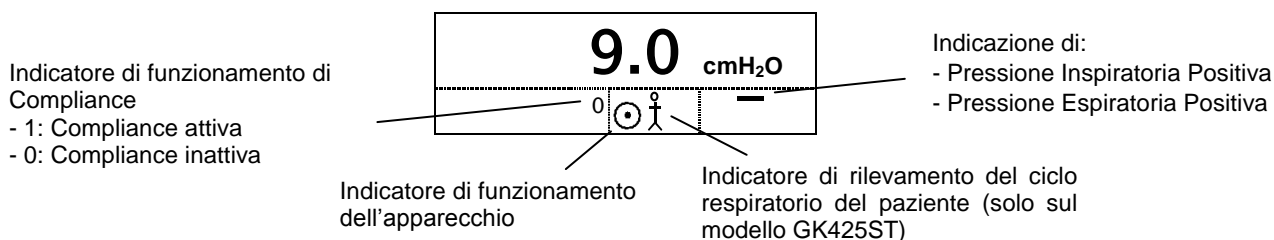


Figura 7 - Vista del display con l'apparecchio in funzione

NOTA

- L'unità di visualizzazione della pressione è regolata dal medico: hPa o cmH₂O (si veda sopra).
 - L'indicatore di funzionamento di Compliance viene visualizzato solo dopo 15 minuti di funzionamento dell'apparecchio.
2. Indossare la maschera nasale come indicato nelle istruzioni d'uso relative. Se la maschera è provvista di apertura, tramite l'apposito orificio i gas inalati vengono evacuati e non possono più essere ispirati. In caso di utilizzo di maschera priva di apertura, il medico dovrà fornire un apposito raccordo Pirouette™ o un prodotto equivalente per permettere l'evacuazione dei gas il più vicino possibile al naso. **Respirare normalmente.**

AVVERTENZA

Non ostruire mai l'orificio di uscita della maschera per non compromettere l'evacuazione continua dell'aria espirata. Con l'apparecchio in funzione, l'aria prodotta respinge l'aria inalata dall'orificio di evacuazione della maschera. Tuttavia, se l'apparecchio non funziona, non ci sarà abbastanza aria fresca nella maschera e l'aria inalata rischia di essere respirata nuovamente, il che potrebbe causare problemi di soffocamento nel giro di qualche minuto e in determinate circostanze.

3. Qualora si utilizzi un umidificatore riscaldato, accenderlo come indicato nelle relative istruzioni per l'uso.
4. Qualora si utilizzi l'ossigeno, aprire ora l'erogazione dell'ossigeno.

AVVERTENZA

- Quando l'apparecchio è in funzione, controllare che eroghi correttamente l'aria. Nel caso contrario, arrestarlo immediatamente e contattare l'assistente domiciliare.
- Con livelli leggeri di pressione, l'erogazione attraverso l'orifizio di aerazione può rivelarsi insufficiente per evacuare tutto il gas inalato dal paziente. In questo caso, possono verificarsi fenomeni di re-inalazione.


Conclusione del trattamento


Mentre l'apparecchio è in funzione, procedere nel seguente modo per concludere il trattamento:

1. Qualora si utilizzi l'ossigeno, chiudere l'erogazione dell'ossigeno.
2. Qualora si utilizzi un umidificatore riscaldato, arrestarlo come indicato nelle istruzioni d'uso relative. Scollegare sempre l'umidificatore prima di arrestare l'apparecchio.

ATTENZIONE

Dopo l'uso, scollegare l'umidificatore dell'apparecchio in modo da evitare eventuali penetrazioni di umidità all'interno dello stesso.

3. Togliere la maschera nasale.
4. Arrestare l'apparecchio premendo il tasto di Attivazione/Standby . L'apparecchio ritorna in modalità standby e visualizza la schermata di standby indicante l'ora:

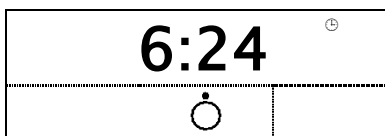

Utilizzo della rampa

La funzione Rampa permette di ottenere un aumento di pressione graduale. La pressione del paziente viene ridotta al valore di pressione d'inizio rampa, per poi innalzarsi ai livelli di pressione configurati. Procedere immediatamente alla regolazione della pressione iniziale della rampa dell'apparecchio **GoodKnight 425** rispettando le seguenti istruzioni:

NOTA

Se il tempo della rampa è impostato su zero, questa regolazione non è accessibile.


La pressione iniziale della rampa può essere regolata su un valore compreso tra 3 cmH₂O ed il livello di pressione Espiratoria Positiva prescritto dal medico. Questa funzione permette di regolare il livello di pressione adeguato per addormentarsi.



Per accedere al menu di regolazione dei parametri, basta premere per un secondo il tasto di accesso alle informazioni mostrato nella Figura 8 – Vista dei pulsanti di regolazione.



Figura 8 – Vista dei pulsanti di regolazione

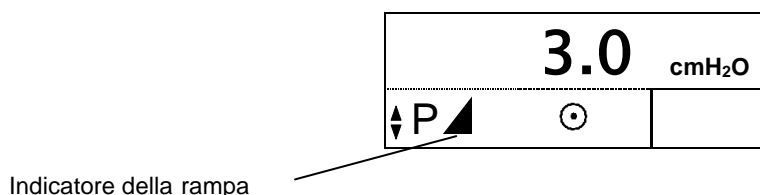
Premere il tasto fino a visualizzare la schermata seguente:



E' possibile aumentare o diminuire il valore della pressione iniziale della rampa tramite i tasti di Attivazione/Standby  e della rampa .

La funzione Rampa permette di ottenere un aumento di pressione graduale. Il livello di pressione è ridotto all'inizio del trattamento per facilitare la progressiva sonnolenza con il conseguente passaggio allo stato di sonno nel paziente. Questa funzione può essere utilizzata anche se ci si deve alzare durante la notte ed è difficoltoso riaddormentarsi. Il tempo di aumento della pressione fino alle pressioni finali viene prescritto dal medico e la regolazione, che deve essere effettuata dal proprio assistente domiciliare, deve essere compresa tra 0 (nessun aumento progressivo) e 30 minuti con incrementi di 5 minuti. Il tempo di innalzamento della pressione può essere pre-impostato su 0 in base alla prescrizione del medico. In tal caso, la funzione Rampa risulta inattiva (vedere Pos. 3 - Figura 2 – Vista superiore a pagina 73).

1. Per attivare la rampa è sufficiente premere il pulsante della rampa ad apparecchio acceso. L'indicatore della rampa viene visualizzato e la pressione diminuisce (valore basso), quindi aumenta progressivamente fino a raggiungere i livelli di pressione prescritti, evitando al paziente il possibile risveglio. L'apparecchio funzionerà normalmente per tutta la notte alle pressioni di trattamento, se non viene premuto nuovamente il pulsante della rampa; in tal caso, la pressione aumenterà fino al raggiungimento della rampa selezionata.
2. Per disattivare la rampa, premere nuovamente il pulsante della rampa. La rampa può essere inpostata riattivando la funzione Rampa (l'indicatore di rampa viene visualizzato non appena si attiva la rampa).

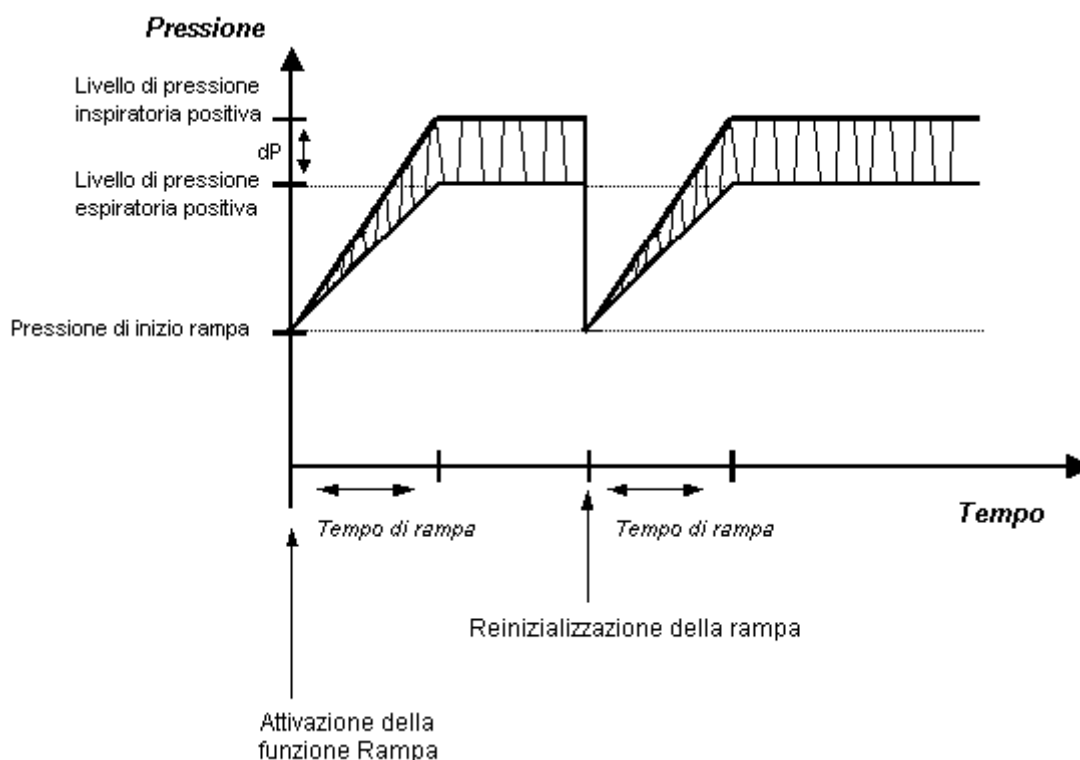

**Figura 9 – Evoluzione della pressione in funzione del tempo
quando è attivata la funzione Rampa**

Accesso alle informazioni sull'apparecchio

Il display permette di visualizzare le varie informazioni sulle regolazioni dell'apparecchio **GoodKnight 425** (vedere Pos. 1 - Figura 2 – Vista superiore a pagina 73).

Le informazioni sulle regolazioni sono accessibili quando l'apparecchio si trova nel modo di attesa oppure quando è acceso. Per visualizzarle è sufficiente premere per **1 secondo il pulsante di accesso alle informazioni** (vedere Pos. 2 – Figura 2 – Vista superiore a pagina 73). Premendo più volte il pulsante si accede ad una nuova visualizzazione.


NOTA

Nelle schermate seguenti, l'apparecchio è presentato in modalità di funzionamento e tutti i valori visualizzati sono puramente indicativi.

Premere
per 1 secondo



Il display mostra:

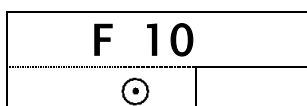


Frequenza di sicurezza dell'apparecchio.

NOTA


Questa funzione è accessibile unicamente sull'apparecchio **GoodKnight 425 ST**.

Premere

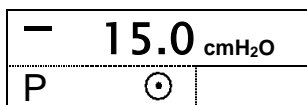


Livello di **Pressione Inspiratoria Positiva IPAP** regolato sull'apparecchio (livello alto di pressione per l'inspirazione).

Premere

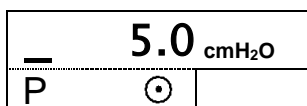


Livello di **Pressione Espiratoria Positiva EPAP** regolato sull'apparecchio (livello basso di pressione per l'espirazione).

Premere

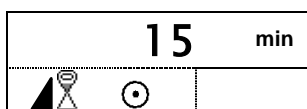

Il tempo di rampa impostato dal medico (tempo necessario per l'apparecchio per passare dalla pressione iniziale della rampa ai livelli di pressione di riferimento).

Premere

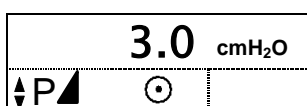


La pressione di inizio rampa (livello di pressione ad inizio rampa); questo parametro può essere visualizzato e regolato solamente se il tempo di rampa è diverso da 0.

Il simbolo ▲ indica che il parametro può essere regolato. E' possibile diminuire o aumentare il valore visualizzato tramite i tasti della rampa o i tasti Attivazione/Standby.

Per maggiori dettagli, vedere il capitolo “Utilizzo della rampa” a pagina 82.

Premere

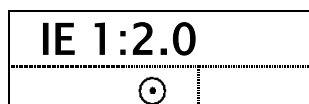


Valore del rapporto I/E (rapporto fra il tempo Inspiratorio e quello Espiratorio).

NOTA

Questa funzione è accessibile unicamente sull'apparecchio *GoodKnight 425 ST*.

Premere

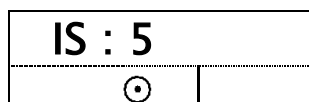


Sensibilità inspiratoria regolata dal medico (sensibilità di rilevamento all'inizio della fase inspiratoria della respirazione).

Premere




Sensibilità espiratoria regolata dal medico (sensibilità di rilevamento all'inizio della fase espiratoria della respirazione).

Premere

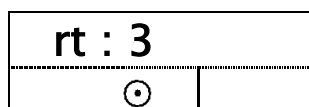


Tempo di innalzamento della pressione impostato dal medico (tempo necessario per l'apparecchio per passare dal livello di EPAP a quello di IPAP).

Premere

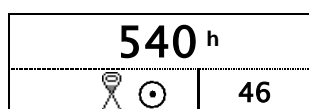


Il valore del contaore (tempo di funzionamento dell'apparecchio). Il valore visualizzato in basso a destra indica i minuti.

Premere

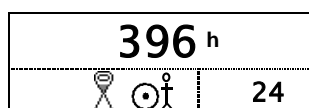

Valore del contatore del tempo di utilizzo (tempo di respirazione con la maschera). Il valore visualizzato in basso a destra indica i minuti.


Premere

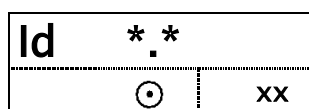


La versione del software installato nella scheda logica della *GoodKnight 425*. Il numero della versione comprende due cifre (*); ad esempio, sullo schermo può apparire: Id 1.0.

Per uscire dal menu di regolazione dei parametri, premere nuovamente il tasto di accesso alle informazioni.

In tal caso, il display visualizza nuovamente una delle due seguenti visualizzazioni indicanti lo stato dell'apparecchio (i valori visualizzati sono puramente indicativi).

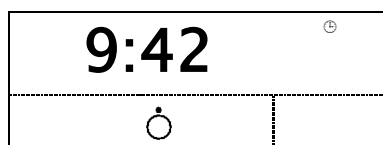

Apparecchio in modalità
Standby.

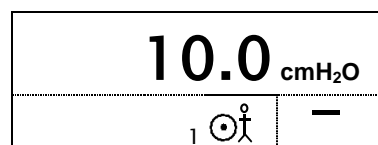


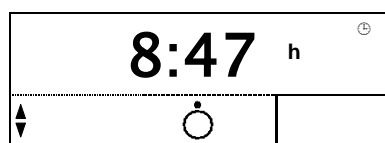
Apparecchio in funzione.

NOTA

Il menù di regolazione dei parametri si chiude automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per 30 secondi.

Regolazione dell'ora

E' possibile regolare l'ora solo in modalità Standby. A tal scopo è sufficiente premere per 1 secondo il pulsante della rampa (vedere Pos. 3 - Figura 2 – Vista superiore a pagina 73), e, contemporaneamente, il tasto di Attivazione/Standby (vedere Pos. 4 - Figura 2 – Vista superiore a pagina 73). Una volta rilasciati i pulsanti, il simbolo di regolazione  appare sotto l'ora, come indicato nella schermata seguente:



La lettera h indicante l'ora comincia a lampeggiare, il che consente di aumentare o diminuire il valore desiderato tramite i tasti della rampa o di Attivazione/Standby.

Per impostare i minuti è sufficiente premere il pulsante di accesso alle informazioni: i minuti lampeggiano e possono essere regolati con la stessa procedura utilizzata per l'impostazione dell'ora. Premere nuovamente il tasto di accesso alle informazioni per uscire dal menu.

NOTA

Il menù di regolazione dei parametri si chiude automaticamente se non viene premuto alcun pulsante per 30 secondi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio **GoodKnight 425**, rispettare le seguenti istruzioni per la manutenzione.

GoodKnight 425

L'involucro dell'apparecchio non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare un panno inumidito con acqua calda e sapone. Asciugare bene l'apparecchio.

AVVERTENZA

- **Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo.**
- **Non utilizzare vaporizzatori in quanto i residui possono penetrare nell'uscita dell'aria, nel filtro in schiuma oppure all'interno dell'apparecchio. In tal caso si può verificare un'irritazione delle vie respiratorie dovuta ai residui di sostanze chimiche.**

Si consiglia in ogni caso di verificare la pressione dell'apparecchio almeno una volta all'anno.

Filtri di entrata dell'aria

Sostituire i filtri in schiuma qualora siano usurati o sporchi (vedere Pos. 9 - Figura 4 – Vista posteriore a pagina 73).

Pulire la superficie esterna del filtro almeno una volta alla settimana (oppure più frequentemente se necessario) procedendo nel seguente modo:

1. Lavare il filtro con acqua calda e sapone.
2. Risciacquare accuratamente il filtro per eliminare ogni traccia di sapone.
3. Asciugare il filtro strizzandolo bene in un asciugamano.
4. Lasciare asciugare completamente il filtro prima di reinstallarlo.
5. Reinstallare il filtro sul lato posteriore dell'apparecchio.

Il filtro in tessuto bianco (che non è presente sui modelli della serie, ma proposto come opzione) non può essere lavato, deve essere sostituito almeno una volta al mese o più spesso se risulta visibilmente sporco.

Circuito paziente

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate al circuito paziente.

Maschera nasale

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate alla maschera nasale.

Umidificatore

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate all'umidificatore.

IN CASO DI PROBLEMI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SUGGERIMENTO
Disagio dovuto ad una sensazione di pressione troppo elevata.	Pressione del <i>GoodKnight</i> 425.	L'adattamento alla pressione nasale richiede un certo tempo. Provare ad utilizzare la funzione di rampa al momento di addormentarsi (vedere il capitolo "Utilizzo della rampa" a pagina 82). Rilassarsi e respirare lentamente con il naso.
L'apparecchio non eroga la pressione giusta (display).	Il tubo della presa di pressione non è collegato. E' penetrata umidità nel tubo della presa di pressione. La rampa è attivata.	Controllare che il tubicino della presa di pressione sia collegato correttamente all'apparecchio. Asciugare il tubicino. A tal scopo, collegare il circuito paziente all'apparecchio lasciando scollegato il tubicino,appare il circuito paziente con una mano ed accendere l'apparecchio. L'apparecchio si deve spegnere entro 30 secondi. Ripetere se necessario. Assicurarsi che l'indicatore della rampa sia visualizzato. Premere il tasto della rampa per annullare la funzione (vedere Pos. 3 – Figura 2 – Vista superiore a pagina 73). I livelli di pressione sono stati prescritti dal medico di fiducia e non possono essere modificati se non dietro prescrizione medica.
Naso o gola secchi o irritati.	L'aria è troppo secca.	Umidificare l'aria del locale con l'ausilio di un umidificatore. Rivolgersi al medico per l'umidificatore.
Naso freddo.	La temperatura del locale è troppo bassa.	Aumentare la temperatura del locale oppure posizionare il tubo sotto le coperte per ridurre la dispersione di calore.
Gocciolamento del naso.	Reazione all'erogazione dell'aria ed alla pressione.	Interrompere il trattamento. Contattare il personale di assistenza domiciliare o il medico curante.
L'apparecchio eroga aria troppo calda.	I filtri di entrata dell'aria potrebbero essere sporchi. L'entrata dell'aria è intasata. La temperatura del locale è troppo elevata.	Pulire o sostituire i filtri a seconda del caso (vedere il capitolo "Manutenzione e pulizia" a pagina 87). Allontanare biancheria, effetti personali ed indumenti dal GK425. Abbassare il termostato del locale. Accertarsi che la GK425 sia lontano da fonti di calore. Far uscire il tubo da sotto le coperte.
Dolori a livello di naso, seno nasale oppure orecchie.	Infezione del seno nasale o congestione nasale.	Interrompere il trattamento. Rivolgersi immediatamente al medico curante.
Disidratazione o irritazione degli occhi.	Perdite d'aria intorno alla maschera.	Riposizionare la maschera. Rivolgersi al medico curante oppure all'assistente domiciliare per provare una maschera di dimensioni differenti.

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SUGGERIMENTO
Arrossamento della pelle a contatto con la maschera.	Le fasce di fissaggio sono troppo strette oppure di dimensioni inadeguate. Reazione allergica ai materiali della maschera.	Regolare le fasce di fissaggio. Rivolgersi al medico curante oppure all'assistente domiciliare per provare una maschera di dimensioni differenti. Interrompere l'utilizzo della maschera. Rivolgersi al medico curante oppure all'assistente domiciliare.
Ricorrenza dei primi sintomi della sindrome di apnea del sonno.	La <i>GK425</i> non è regolata sulla pressione corretta o non funziona correttamente. Sono cambiate le condizioni fisiche o le necessità di pressione.	Chiedere all'assistente domiciliare di controllare il funzionamento della <i>GK425</i> . Rivolgersi al medico curante.
La <i>GoodKnight 425</i> non si accende (display spento).	Il modulo di alimentazione non è collegato correttamente. Mancanza di alimentazione di rete. Fusibile saltato.	Verificare i collegamenti fra il modulo di alimentazione, l'apparecchio <i>GK425</i> e la presa di corrente. Scollegare e ricollegare l'apparecchio. Provare ad accendere un altro apparecchio (ad es. lampada, radio ecc.) per controllare che la rete elettrica sia funzionante. Contattare l'assistente domiciliare.
La <i>GoodKnight 425</i> non funziona correttamente.	Interferenze elettromagnetiche rilevanti.	Allontanare l'apparecchio dalle fonti di interferenze come lampade alogene, telefoni cellulari, ecc.
In 1 appare sul display.	E' stata rilevata una notevole perdita (scollegamento) nel circuito del paziente per oltre 30 secondi.	Questo messaggio scompare non appena si ricollega la maschera o premendo due volte il tasto di Attivazione/Standby. In caso contrario, controllare il collegamento del circuito del paziente.
In 2 appare sul display.	E' stata rilevata una sovrappressione per oltre 10 secondi.	Controllare il collegamento del tubicino della presa di pressione. Controllare che non sia ostruito e sia ben asciutto (vedere le istruzioni per l'uso del circuito del paziente).
In 3 appare sul display.	Calo della tensione di alimentazione.	Verificare i collegamenti fra il modulo di alimentazione, l'apparecchio e la presa di corrente. Scollegare il modulo di alimentazione e ricollegarlo. Se il problema persiste, contattare l'assistente domiciliare. Verificare la batteria e, se necessario, sostituirla. Se il messaggio persiste, contattare l'assistente domiciliare.

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SUGGERIMENTO
In 4 appare sul display.	Rilevamento di frequenza troppo alta	Premere due volte il pulsante Attivazione/standby del modello GK425. Verificare il collegamento dei tubi. Se il problema persiste, contattare l'assistente domiciliare.
Er XX appare sul display. (dove XX = 2 numeri).	L'apparecchio ha rilevato un errore di funzionamento.	Contattare l'assistente domiciliare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni dell'apparecchio

Range di pressione, <i>GoodKnight</i> 425:	da 3 cmH ₂ O a 25 cmH ₂ O \pm 1 cmH ₂ O regolabile ad incrementi di 0,5 cmH ₂ O
Pressione massima nell'orifizio di collegamento lato paziente in condizione di primo difetto:	36 cmH ₂ O
Durata della rampa:	da 0 a 30 minuti (\pm 1 minuto) regolabile ad incrementi di 5 minuti
Foro di raccordo lato paziente:	tubo con diametro 22 mm
Livello sonoro misurato in base a EN ISO 17510-1 :2002 :	< 29 dB(A)
Livello sonoro misurato in base a EN ISO 17510-1 :2009 :	< 31 dB(A)
Durata della pila saldata: (secondo i dati del costruttore)	5 anni

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (l x a x p):	144 x 79 x 198 mm (senza alimentazione)
Peso :	0,780 kg (senza modulo di alimentazione)


Condizioni di trasporto e stoccaggio

Temperatura:	da -20°C a +60°C
Umidità relativa:	fino al 95% senza condensa
Range di pressione relativa:	da 500 hPa a 1060 hPa

Condizioni di utilizzo

Temperatura:	da +5°C a +40°C
Umidità relativa:	compresa tra il 15 % ed il 95 % senza condensa
Range di pressione relativa:	da 700 hPa a 1060 hPa
Gamma di altitudine:	0 – 2400 m circa

Caratteristiche elettriche della cassetta di alimentazione

Alimentazione di classe II:  Tensione di alimentazione: 100 – 240 VAC (-10%, +10%), 50 / 60 Hz (\pm 1 Hz).

Potenza o corrente d'ingresso: 1,5 A.

Tensione di uscita: 13 V – 4 A.

Modulo di alimentazione in dotazione: ONTOP Modello SA165A – 125OU-3.

ATTENZIONE

- Utilizzare esclusivamente il modulo di alimentazione a spina in dotazione con l'apparecchio.
- Il modulo di alimentazione non è concepito per essere riparato. In caso di guasto, contattare l'assistente domiciliare per procedere alla sostituzione.


Caratteristiche elettriche dell'apparecchio

Tensione di alimentazione: 13 V – 3 A.

Potenza massima consumata: 40 W senza umidificatore

Corrente consumata a 25 cmH₂O con orifizio di 4 mm: 1,1 A.

Corrente continua

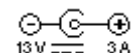

Connettore della batteria 13 V

Simboli



Attivazione/Standby



Accesso alle informazioni



Rampa



Collegamento seriale per PC



Aumento del valore di regolazione



Diminuzione del valore di regolazione



Connettore di uscita

IPX1

Apparecchio protetto contro le cadute verticali e le gocce d'acqua.



Apparecchio tipo BF.



In accordo con le direttive Europee 2002/96/EC relative allo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (WEEE), tutti i dispositivi non più in servizio e/o dismessi, dovrebbero essere raccolti in modo separato, rispetto al normale smaltimento rifiuti. Contattare la società responsabile di questa procedura di smaltimento rifiuti speciali, attiva nel proprio paese e/o utilizzata dal vostro dipartimento.



Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

CE 0459

Apparecchio conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.

Standard normativi

I rischi connessi al presente dispositivo medico sono stati valutati nel rispetto della norma ISO 14971:2007, in particolare per quanto riguarda il rischio residuo globale.

Prestazioni essenziali relative alla compatibilità elettromagnetica

Per tutta la durata dei test di compatibilità elettromagnetica il dispositivo ha mantenuto le proprie regolazioni e il valore della pressione erogata è rimasto quello della pressione impostata, ossia $\pm 0,5$ cm H₂O.

Il computer collegato al dispositivo ha visualizzato la pressione in maniera continua. È possibile che la comunicazione abbia subito interruzioni, ma il dispositivo non ha mai smesso di funzionare ed è stato possibile ricollegare il computer allo stesso.

Emissioni elettromagnetiche			
Gli apparecchi GoodKnight 425/425ST sono progettati per essere utilizzati nell'ambiente elettromagnetico indicato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore di un apparecchio GoodKnight 425/425ST deve assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato in questo tipo di ambiente.			
Test di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico raccomandato	
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Gli apparecchi GoodKnight 425/425ST utilizzano l'energia RF solo per il funzionamento interno. Di conseguenza, le emissioni RF sono molto deboli e non dovrebbero produrre interferenze con un'apparecchiatura elettronica vicina.	
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Gli apparecchi GoodKnight 425/425ST sono adatti ad un utilizzo in qualsiasi tipo di edificio, compresi gli edifici domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica che alimenta gli edifici domestici.	
Emissioni armoniche CEI 61000-3-2	Classe A		
Fluttuazione della tensione / Emissioni flicker CEI 61000-3-3	Conforme		
Immunità elettromagnetica			
Gli apparecchi GoodKnight 425/425ST sono progettati per essere utilizzati nell'ambiente elettromagnetico indicato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore di un apparecchio GoodKnight 425/425ST deve assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato in questo tipo di ambiente.			
Test d'immunità	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico raccomandato
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV al contatto ± 8 kV nell'aria	± 6 kV al contatto ± 8 kV nell'aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o ceramica. Se il pavimento è ricoperto di un materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Raffica di impulsi elettrici transitori IEC 61000-4-4	± 2 kV su linee di alimentazione ± 1 kV su linee di ingresso / di uscita	± 2 kV su linee di alimentazione ± 1 kV su linee di ingresso / di uscita	La qualità di alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero.
Fulmini IEC 61000-4-5	± 1 kV in modo differenziale ± 2 kV in modo comune	± 1 kV in modo differenziale ± 2 kV in modo comune	La qualità di alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero.
Cadute, interruzioni e variazioni di tensione di alimentazione elettrica. IEC 61000-4-11	< 5% U _T (>95% caduta di U _T) per 0,5 cicli 40% U _T (60% caduta di U _T) per 5 cicli	< 5% U _T (>95% caduta di U _T) per 0,5 cicli 40% U _T (60% caduta di U _T) per 5 cicli	La qualità di alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore di un apparecchio GoodKnight 425/425ST necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni di alimentazione di rete, si raccomanda di collegare

Immunità elettromagnetica (seguito)			
	70% U_T (30% caduta di U_T) per 25 cicli < 5% U_T (>95% caduta di U_T) per 5 s	70% U_T (30% caduta di U_T) per 25 cicli < 5% U_T (>95% caduta di U_T) per 5 s	l'apparecchio GoodKnight 425/425ST ad una fonte di alimentazione continua o ad una batteria.
Campi magnetici nelle frequenze di alimentazione (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici ad alta frequenza dovrebbero essere a dei livelli propri di un ambiente commerciale o ospedaliero.

Note : U_T è la tensione settore principale prima dell'applicazione del livello di prova.

Immunità elettromagnetica - RF condotte e irradiate

Gli apparecchi **GoodKnight 425/425ST** sono progettati per essere utilizzati nell'ambiente elettromagnetico indicato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore di un apparecchio **GoodKnight 425/425ST** deve assicurarsi che l'apparecchio sia utilizzato in questo tipo di ambiente.

Test di immunità	Livello di test IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico consigliato
Frequenza radio condotta IEC 61000-4-6	3 V rms 150 kHz a 80 MHz	3 V rms 150 kHz a 80 MHz	I dispositivi portatili di comunicazione RF non devono essere utilizzati in prossimità di una qualsiasi parte di un apparecchio GoodKnight 425/425ST o dei cavi a questo collegati. Distanza di separazione raccomandata: $d = 1,2\sqrt{P}$
Frequenza radio irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz

P è la potenza massima del trasmettitore in Watt (W) secondo i dati del costruttore e secondo la frequenza del trasmettitore stesso e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m).

Le forze dei campi prodotti da trasmettitori RF fissi, come determinato da un sito di Monitoraggio^a, devono essere inferiori al livello di conformità di ogni intervallo di frequenza^b.

Delle interferenze elettromagnetiche possono prodursi in prossimità di apparecchi recanti il seguente simbolo:



NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica l'intervallo di frequenza più alto.

NOTA 2: Queste raccomandazioni non si applicano in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

^(a) La forza dei campi prodotti da trasmettitori fissi, come le basi di telefoni senza fili, le radio mobili, le radio amatoriali, le emissioni radio AM e FM, le emissioni TV non può essere stabilita in modo teorico con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico prodotto da trasmettitori fissi, è necessario consultare un sito di monitoraggio elettromagnetico. Se la forza del campo misurato nell'ambiente in cui deve essere utilizzato un apparecchio **GoodKnight 425/425ST**, supera il livello RF applicabile di cui sopra, l'apparecchio **GoodKnight 425/425ST** dovrà essere esaminato per verificare se il suo funzionamento è normale. Se si osserva un funzionamento anomalo, possono essere necessarie delle misure supplementari, come il riorientamento o lo spostamento dell'apparecchio **GoodKnight 425/425ST**.

^(b) Al di là dell'intervallo di frequenza 150 kHz a 80 MHz, le forze del campo devono essere almeno di 3 V/m.

Distanza di separazione raccomandata tra un dispositivo di comunicazione portatile e mobile RF e un apparecchio della gamma GoodKnight 425/425ST

Gli apparecchi **GoodKnight 425/425ST** sono progettati per essere utilizzati in un ambiente nel quale le interferenze RF sono controllate. Il cliente o l'utilizzatore di un apparecchio **GoodKnight 425/425ST** può contribuire a limitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili RF e l'apparecchio **GoodKnight 425/425ST** come specificato qui sotto, a seconda della potenza massima dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza massima del trasmettitore (W)	Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Per i trasmettitori aventi una potenza massima non elencata qui sopra, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere determinata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima dell'emettitore in watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione dell'intervallo di frequenza più elevato.

NOTA 2: Queste raccomandazioni non si applicano in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Cavi conformi

Attenzione

L'utilizzo di accessori e di cavi diversi da quelli specificati, può portare ad un aumento delle emissioni o ad una riduzione dell'immunità degli apparecchi **GoodKnight 425/425ST**.

M-213930-04 Cavo RS232 2m GoodKnight 425	6,5 ft (2m)
M-213930-06 Cavo RS232 15m GoodKnight 425	50 ft (15m)



GoodKnight[®] 425 **GoodKnight[®] 425 ST**

Gebruiksaanwijzing voor de patiënt

INHOUDSOPGAVE

VOORDAT U BEGINT	101
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	101
GEBRUIKSINDICATIES.....	102
GEBRUIK.....	102
VOORZORGSMaatregelen	102
CONTROLE VAN DE ONDERDELEN	103
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT.....	104
INSTALLATIE.....	107
STANDAARDINSTALLATIE.....	107
INSTALLATIE VAN EEN (OPTIONELE) ZUURSTOFADAPTER	108
INSTALLATIE VAN EEN BEVOCHTIGER	109
INSTALLATIE VAN EEN ACCU OF SIGARETTENAANSTEKER	111
BEDIENING	112
DE BEHANDELING BEGINNEN	112
DE BEHANDELING BEËINDIGEN	113
GEBRUIK VAN DE RAMP	114
INFORMATIE OP HET APPARAAT	116
TIJDINSTELLING	118
ONDERHOUD EN REINIGING	119
GOODKNIGHT 425	119
LUCHTINLAATFILTERS.....	119
SLANG	119
NEUSMASKER	120
BEVOCHTIGER	120
PROBLEMEN OPLOSSEN	121
TECHNISCHE GEGEVENS	124
BEREIK VAN HET APPARAAT	124
GEWICHT EN AFMETINGEN	124
TRANSPORT EN OPSLAG	124
GEBRUIK.....	124
ELEKTRISCHE KENMERKEN VAN DE VOEDING	124
ELEKTRISCHE KENMERKEN VAN HET APPARAAT	125
SYMBOLEN	125
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN.....	125
ESSENTIËLE PRESTATIE MET BETREKKING TOT DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT	126



Het apparaat **GoodKnight 425** (GK425) dient voor de behandeling van het **Obstructieve Slaap Apneu Syndroom** (OSAS). Typisch voor dit syndroom is dat uw slaap gestoord wordt doordat uw ademhaling 's nachts herhaaldelijk stilvalt. Dat is onder andere te wijten aan een vernauwing van de bovenste luchtwegen. De **GoodKnight 425** levert twee drukwaarden (één voor inademing en één voor uitademing) die verstopping van de bovenste luchtwegen verhinderen en zo ademhalingsonderbrekingen voorkomen. Op het model **GoodKnight 425 ST**, kan er een bewakingsfrequentie worden ingesteld.

Het is van belang dat u goed met het apparaat weet om te gaan en er ook de beperkingen van kent. Daarom dient u de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u het apparaat **GoodKnight 425** in gebruik neemt.

De instructies in de gebruiksaanwijzing helpen u het apparaat veilig en efficiënt te gebruiken. Hebt u nog vragen over het apparaat, aarzel dan niet om met uw voorschrijvend arts of uw thuiszorgleverancier contact op te nemen.

Het is uw arts die de behandeling van uw ziekte voorschrijft en dus bepaalt hoe uw apparaat moet worden afgesteld. Het apparaat wordt vervolgens in het ziekenhuis of door uw thuiszorgleverancier volledig geprogrammeerd. U dient daarom niet zelf de instellingen te wijzigen, tenzij onder speciale omstandigheden.

Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing gelden zowel voor de *GoodKnight 425* als de *GoodKnight 425 ST*, behalve als het tegendeel wordt aangegeven.

GoodKnight® is een gedeponeerd handelsmerk van Nellcor Puritan Bennett.

Bladzijde met opzet wit gelaten

Veiligheidsvoorschriften

Om het apparaat veilig en efficiënt te kunnen gebruiken, dient u alle instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw arts of thuiszorgleverancier. Informatie die uw speciale aandacht vereist, wordt voorafgegaan door de volgende opschriften:

WAARSCHUWING

Wijst op levensgevaar of op het risico van lichamelijk letsel voor de patiënt of anderen.

LET OP

Wijst op het risico van beschadigingen aan dit apparaat of aan andere apparaten.

OPMERKING

Geeft handige tips om efficiënt en handig te werk te gaan.

WAARSCHUWING

1. Controleer uw apparaat **GoodKnight 425** voordat u het gebruikt. In het hoofdstuk “Controle van de onderdelen” op blz. 102 leest u hoe u dat moet doen.
2. Als u extra zuurstof toedient, dient u de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van zuurstof nauwgezet op te volgen.
3. Gebruik alleen de accessoires die u van het ziekenhuis of uw thuiszorgleverancier hebt ontvangen. Controleer of u voor iedere accessoire over de bijbehorende gebruiksaanwijzing beschikt, en lees deze aandachtig.
4. Gebruik uitsluitend de speciale voedingsmodule die bij het apparaat geleverd werd.
5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare dampen.
6. Installeer het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk “Installatie” op blz. 107. Let er in het bijzonder op dat het niet met water in contact komt.
7. De luchtafvoer en alle andere openingen van het apparaat of van het ademhalingscircuit mogen niet worden afgesloten. Zorg dat ze ook niet per vergissing geblokkeerd raken.
8. Giet geen vloeistoffen en stop geen voorwerpen in de luchtafvoer.
9. Neem contact op met uw voorschrijvend arts als u bij het gebruik van de *GoodKnight 425* last heeft van de volgende symptomen: droogheid in de luchtwegen of in de neus, gevoeligheid van de huid, lopende neus, oorpijn, last ter hoogte van de bijholtes, slaperigheid overdag, humeurigheid, desoriëntatie, prikkelbaarheid of geheugenverlies.
10. Als uw apparaat om welke manier dan ook niet correct werkt, neemt u contact op met uw thuiszorgleverancier. Het onderhoud van deze uitrusting is uitsluitend de verantwoordelijkheid van bevoegd personeel. Probeer het apparaat niet te openen.

Gebruiksindicaties

Het GoodKnight 425 apparaat is bestemd voor de behandeling van obstructieve ademhalingsaandoeningen tijdens de slaap bij patiënten met een lichaamsgewicht van minstens 30 kg.

Het GoodKnight 425 apparaat is voorzien van een verwarmde bevochtiger GoodKnight H₂O. De verwarmde bevochtiger heeft tot doel de via het apparaat met Continuous Positive Airway Pressure aan de patiënt verstrekte lucht te verwarmen en tevens de vochtigheidsgraad ervan te verhogen. De bevochtiging is koud als de verwarmfunctie is uitgeschakeld en het reservoir met water gevuld is.

Gebruik

Het GoodKnight 425 apparaat is ontworpen voor gebruik thuis of in een zorgcentrum. Het apparaat kan eenvoudig meegenomen worden op reis en is te gebruiken in hotels, in auto's of in vrachtauto's.

Daar het GoodKnight 425 apparaat een elektrisch, medisch apparaat betreft, dient u tijdens de installatie de in onderhavig document vermelde aanwijzingen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit in acht te nemen.

Voorzorgsmaatregelen

De werking van het GoodKnight 425 apparaat kan, net als alle overige elektrische medische apparatuur, verstoord worden door draagbare of mobiele RF communicatie-uitrustingen.

Het GoodKnight 425 apparaat is geen levensondersteunende machine.

WAARSCHUWINGEN

Het GoodKnight 425 apparaat mag, net als alle overige CPAP apparaten, niet gebruikt worden als u aan één van de volgende aandoeningen lijdt. Neem, in dat geval, contact op met uw huisarts voordat u met de behandeling begint:

- 1. Pneumocephalus, trauma of recente chirurgie met cranionasofaryngeale fistel als gevolg;**
- 2. Hartdecompensatie of hypotensie, vooral in geval van depletie van het bloedvolume of in geval van hartritmestoornissen**

LET OP

Het GoodKnight 425 apparaat moet, net als alle overige CPAP apparaten, **met grote voorzichtigheid** worden gebruikt in de volgende gevallen:

- Patiënten die aan (mogelijke) uitdroging lijden als gevolg van een waterrestrictie of een diuretische behandeling, met inbegrip van opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen van de behandeling.
- Zware neusbloeding of anamnese van zware neusbloeding.
- Anamnese van trauma of recente chirurgie met cranionasofaryngeale fistel als gevolg.
- Ernstig bulleus emfyseem of eventueel gecompliceerd met pneumothorax in de anamnese.
- Acute bijholteontsteking, middenoorontsteking of perforatie van het trommelvlies.
- Ernstige claustrofobie.

U mag de verwarmde bevochtiger niet gebruiken indien u lijdt aan een derivatie van de luchtwegen boven de stemspleet.

Controle van de onderdelen

Om het apparaat **GoodKnight 425** met zijn specifieke voeding te kunnen gebruiken, met u ten minste beschikken over de volgende elementen:


- Een geribbelde slang waarin zich een tweede kleine doorschijnende slang bevindt.
- Een neusmasker met bevestigingsaccessoires. In de gebruiksaanwijzing van dit masker vindt u nadere informatie.

Het is mogelijk dat uw arts ook het gebruik van een bevochtiger heeft voorgeschreven. Controleer dan aan de hand van de bijbehorende gebruiksaanwijzing of er geen accessoires van de bevochtiger ontbreken.

Controleer nauwgezet het apparaat en alle accessoires. Controleer in het bijzonder of de slangen niet beschadigd zijn en of het masker geen scheuren of vervormingen vertoont aan de kap of aan de balg (dat deel van het masker dat met het gezicht in contact komt).

Controleer het apparaat en de voeding, en ga na of ze geen defecten hebben. Sluit het toestel aan op het stroomnet via de elektrische voeding en door stappen 4 en 5 van het hoofdstuk “Standaardinstallatie” te raadplegen op blz. 107.

Het type apparaat wordt even weergegeven, en dan verschijnt het waakscherm dat het uur aangeeft (de aangegeven waarde gelden slechts als voorbeeld):

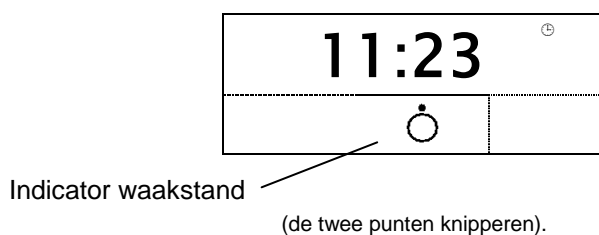

Figuur 1 – Uitzicht van het apparaat als het uit is

Als de voeding uit en aangegaan is terwijl het apparaat werkte, geeft het display de druk weer. Het apparaat staat in dezelfde modus als wanneer de stekker uit het stopcontact getrokken wordt en stelt zich in op de druk die gebruikt werd op het ogenblik van de onderbreking.

Schakel het apparaat in met de aan/uittoets (Nr. 4 van Figuur 2 – Boven aanzicht, blz. 105). De motor moet beginnen te draaien en het geluid moet regelmatig zijn.

Schakel het apparaat uit door op de aan/uittoets te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING

Mochten er zich problemen voordoen, van welke aard dan ook, wacht dan met de behandeling en neem contact op met uw voorschrijvend arts of uw thuiszorgleverancier.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Het apparaat **GoodKnight 425** wordt gevoed met een externe elektrische aansluiting en uitgerust met specifieke accessoires. Het apparaat wordt hieronder beschreven.

Zie figuur 2, 3 en 4 op blz. 105.

1. Display

Op het display leest u verschillende gegevens af, zoals de geleverde druk, de gekozen instellingen van het apparaat of de tijd. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Informatie op het apparaat” op blz. 116.

2. Informatietoets

Met de informatietoets kunt u allerlei gegevens over het apparaat opvragen. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Informatie op het apparaat” op blz. 116.

3. Ramptoets

Met de *ramptoets* schakelt u de *ramp* of geleidelijke druktoename in of uit. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Gebruik van de ramp” op blz. 114. Deze wordt ook gebruikt om de waarde van de parameters te verminderen bij de instelling van het apparaat.

4. Aan/uittoets

Met de toets Aan/uit zet u het apparaat aan of uit. Deze wordt ook gebruikt om de waarde van de parameters te verhogen bij de instelling van het apparaat.

5. Drukaansluiting

Dit is de aansluiting waarop de kleine slang wordt aangesloten. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Installatie” op blz. 107.

6. Luchtuitlaataansluiting

Dit is de aansluiting waarop de grote slang wordt aangesloten. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Installatie” op blz. 107.

7. Seriële aansluiting

Deze aansluiting dient alleen door uw arts thuiszorgleverancier te worden gebruikt. Sluit er niets op aan.


8. Voeding

Hiermee kan het apparaat aangesloten worden op het stroomnet of een externe batterij. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Installatie van een accu of sigarettenaansteker” op blz. 111.

9. Luchtinlaatfilters

Deze filters voorkomen dat er stof in het apparaat of in de luchtstroom komt. Nadere informatie over het onderhoud van deze filters vindt u in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging” op blz. 119.


De onderdelen van de onderstaande figuren worden op blz. 104 beschreven.

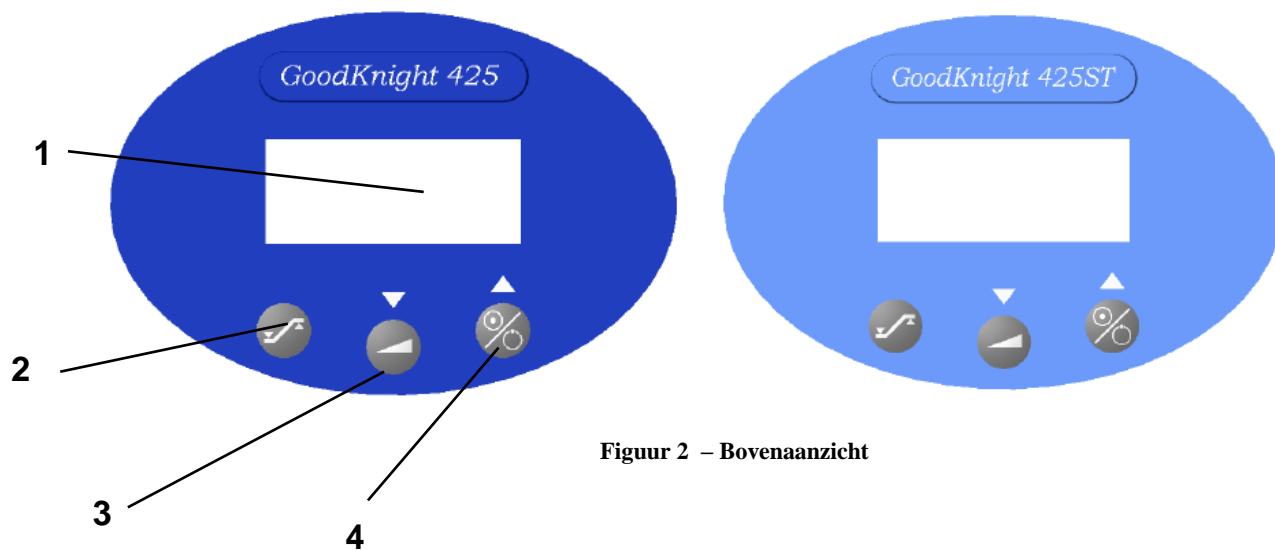

Figuur 2 – Bovenaanzicht



Figuur 3 – Vooraanzicht

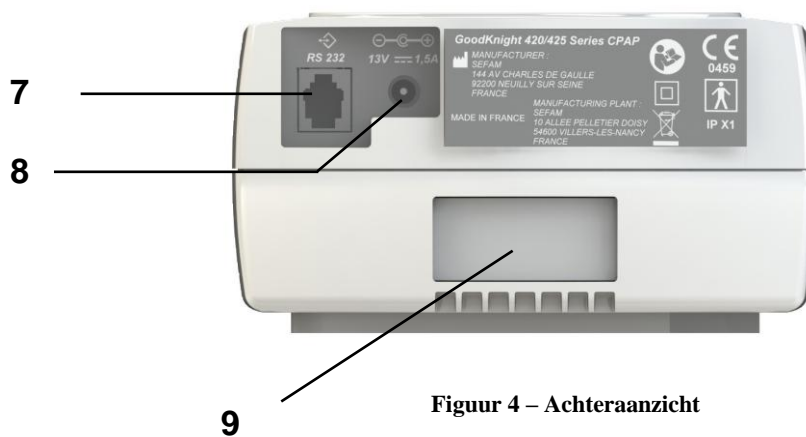

Figuur 4 – Achteraanzicht

Bladzijde met opzet wit gelaten

INSTALLATIE


In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de verschillende accessoires en kabels op uw apparaat moeten worden aangesloten. Voordat u met het installeren begint, dient u het apparaat en de accessoires te controleren. De instructies daarvoor vindt u in het hoofdstuk “Controle van de onderdelen” op blz. 102.

LET OP

- Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond. Om te vermijden dat de luchttoevoer van het apparaat geblokkeerd raakt, dient u ervoor te zorgen dat het niet te dicht bij een muur of een groot voorwerp komt te staan.
- Gebruik het *GoodKnight 425* apparaat niet naast of op overige uitrustingen dan de *GoodKnight H₂O* bevochtiger.

Standaardinstallatie

1. Sluit de geribbelde slang op het apparaat aan. Sluit daarvoor de kleine slang die uit het ene dikke uiteinde van de geribbelde slang steekt, op de drukaansluiting aan (nr. 5 van Figuur 3 – Vooraanzicht, blz. 105). Sluit hetzelfde uiteinde van de dikke geribbelde slang op de luchtuitlaataansluiting van het apparaat aan (nr. 6 van Figuur 3 – Vooraanzicht, blz. 105).

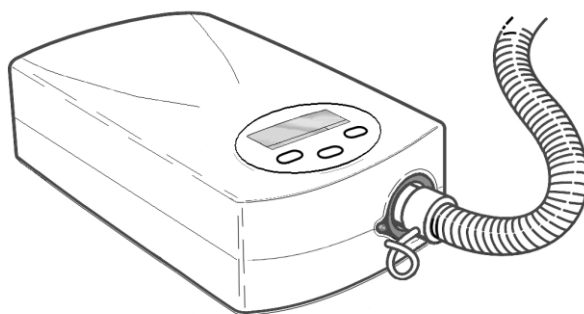

Figuur 5 – Aansluiting van de geribbelde slang op het apparaat

WAARSCHUWING


Zorg dat de kleine slang niet verwrongen of geknikt wordt.

2. Maak het masker gereed volgens de instructies van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
3. Sluit het masker aan op het vrije uiteinde van de geribbelde slang.
4. Sluit de stroomkabel van de voeding aan op het contactpunt achter aan het apparaat (nr. 8 van Figuur 3 – Vooraanzicht/Achteraanzicht, blz. 105).

LET OP

Gebruik alleen de specifieke voeding die geleverd wordt bij het apparaat.

5. Sluit de stekker van de voeding aan op het stroomnet. Het type apparaat wordt even weergegeven, en dan verschijnt het waarscherm dat het uur en de minuten aangeeft:

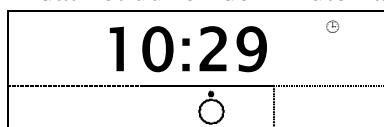

De twee punten knipperen.

6. Het apparaat is nu gebruiksklaar. Op blz. 112 vindt u de nodige uitleg over de bediening.

Installatie van een (optionele) zuurstofadapter

Raadpleeg, bij een aanvullende zuurstoftoevoer de aanwijzingen van de fabrikant voor het installeren van de specifieke klep om zuurstofophoping in het apparaat te voorkomen bij uitschakeling en vervang de stap 3 van de standaardinstallatie door de volgende stap:

- Sluit de ene zijde van de zuurstofadapter op het vrije uiteinde van de slang en de andere zijde van de adapter op het masker aan.

Vervolgens voert u stap 4 t/m 6 van de standaardinstallatie uit om het apparaat volledig te installeren.

WAARSCHUWINGEN

- De voorschriften die u van het medische team of de thuiszorgleverancier krijgt in verband met het gebruik van zuurstof, dient u strikt in acht te nemen.
- Rook niet in de nabijheid van het zuurstofsysteem.
- Voeg geen zuurstof toe via de luchtinlaat van het apparaat.
- Volg nauwgezet de instructies voor het beginnen en het beëindigen van de behandeling op pagina 112.
- Onderbreek, bij het gebruik van extra zuurstof, de zuurstoftoevoer als het apparaat niet werkt. Als de zuurstoftoevoer ingeschakeld blijft bij een uitgeschakeld apparaat kan de in de slang afgegeven zuurstof zich ophopen in het apparaat wat kan leiden tot brandgevaar.

LET OP

Als de toevoersnelheid van extra zuurstof is ingesteld, varieert de geïnhaleerde zuurstofconcentratie op basis van de drukinstellingen, uw ademhalingspatroon de interfacekeuze en de lekfrequentie. Deze waarschuwing is van toepassing op het merendeel van de CPAP apparaten.

Installatie van een bevochtiger

Instructies voor het installeren van een bevochtiger en specifieke veiligheidsvoorschriften vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing van dit apparaat.

WAARSCHUWING

De bevochtiger moet gevuld zijn met water voordat u deze op het apparaat aansluit.

LET OP

Om waterschade te voorkomen, dient u op te letten dat de bevochtiger steeds lager staat dan het apparaat *GoodKnight 425*.

In plaats van stap 1 van de standaardinstallatie voert u de volgende stappen uit:

WAARSCHUWING

De verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O* kan samen met de *GoodKnight 425* worden gebruikt. Raadpleeg de gebruikshandleiding voordat u begint aan de installatie volgens de veiligheidsvoorschriften.

1. Het waterreservoir verwijderen.
2. Giet voorzichtig water in het daarvoor bestemde gat, en let op dat u het merkteken voor het maximumniveau niet overschrijdt.
3. Installeer de verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O* op een vlakke ondergrond.
4. Sluit op de *GoodKnight 425* de adapter aan die geleverd is bij de verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O*.
5. Zet de *GoodKnight 425* op de verwarmde bevochtiger, *GoodKnight H₂O* zoals getoond in Figuur 6 – Koppeling van de *GoodKnight 425* aan de verwarmde bevochtiger.
 - De voorkant van het apparaat moet gericht zijn naar de aansluitingspunten op de verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O*.
 - En de basis van de *GoodKnight 425* moet passen in de voorziene verstevigingen van de verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O*.

LET OP

- **Het is belangrijk dat de apparaten op een vlakke ondergrond staan en dat de apparatuur niet in de buurt van open vlammen gehouden worden**
- **Zet de verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O* niet op het apparaat dat continue positieve druk of twee drukwaarden levert, want dan bestaat er gevaar voor waterschade.**



Figuur 6 – Koppeling van de GoodKnight 425 aan de verwarmde bevochtiger GoodKnight H₂O

6. Zet het *reservoir* terug (let op dat u geen water morst) zodat de inlaataansluiting van de bevochtiger past op de adapter.
7. Sluit de kleine slang die uit één van de uiteinden van de dikke geribbelde slang steekt, aan op de drukaansluiting van de *GoodKnight 425*.
8. Sluit het uiteinde van de dikke geribbelde slang aan op de luchtuitlaataansluiting op het waterreservoir van de verwarmde bevochtiger *GoodKnight H₂O*.

Vervolgens voert u stap 2 tot 6 van de standaardinstallatie beschreven op blz. 107 uit om het apparaat volledig te installeren.

LET OP

Het is raadzaam om het apparaat *GoodKnight 425* te ontkoppelen van de bevochtiger en het reservoir ervan te legen voordat u het geheel verplaatst, om waterinsijpeling in het apparaat te voorkomen, wat dit kan onomkeerbare schade veroorzaken.

Installatie van een accu of sigarettenaansteker


De *GoodKnight 425* kan gevoed worden met een batterij van 12 Volt met behulp van de speciale kabel die hiervoor voorzien is.

LET OP

- Gebruik alleen de accukabel die bij de *GoodKnight 425* geleverd wordt. Bij andere kabels bestaat het risico dat het apparaat en de accu beschadigd worden.
- Gebruik alleen gelijkspanningsbronnen van 12 V en let op de polariteit van de aansluiting (+ en -).

In plaats van stap 4 en 5 van de standaardinstallatie voert u de volgende stappen uit om de accukabel aan te sluiten:

1. Sluit de voedingskabel van de accu op de accuaansluiting aan. Deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde van het apparaat (nr. 8 van Figuur 4 – Achteraanzicht, blz. 105).
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel direct op de accu aan.

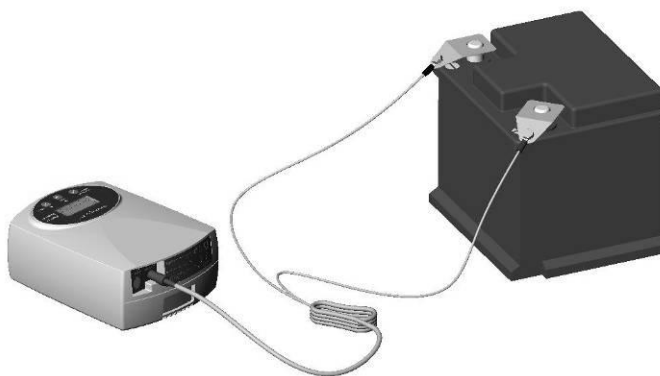

Figuur 7 – Connection of the GoodKnight 425 to the battery cable

OPMERKING

De *GoodKnight 425* kan een hoog stroomverbruik hebben. Het is raadzaam om een volgeladen accu te gebruiken.

De *GoodKnight 425* kan ook gevoed worden via de sigarettenaansteker met behulp van de speciale kabel die hiervoor voorzien is.

Hiertoe voert u in plaats van stappen 4 en 5 van de standaardinstallatie u de volgende stappen uit:


1. Sluit de kabel voor de sigarettenaansteker aan op de voeding achter aan het toestel (nr. 8 van Figuur 4 – Achteraanzicht, blz. 105).
2. Steek het stekkertje van de kabel rechtstreeks in het stopcontact van de sigarettenaansteker.

BEDIENING


Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat bedient als u het eenmaal geïnstalleerd hebt volgens de instructies in het vorige hoofdstuk. Het legt ook uit hoe u de functie *Ramp* (geleidelijke druktoename) dient te gebruiken en hoe u de waarden van de verschillende instellingen kunt aflezen. (Let wel, u kunt deze waarden niet wijzigen.)

De behandeling beginnen

Als u het apparaat eenmaal volgens de instructies in het vorige hoofdstuk hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om de behandeling te beginnen:

1. Schakel het apparaat in door op de Aan/uittoets te drukken .

Het display geeft de gemeten druk weer in het masker en twee metertjes die de werking van het apparaat en de compliance weergeven (zie Figuur 8 - Weergave van display wanneer het apparaat werkt).

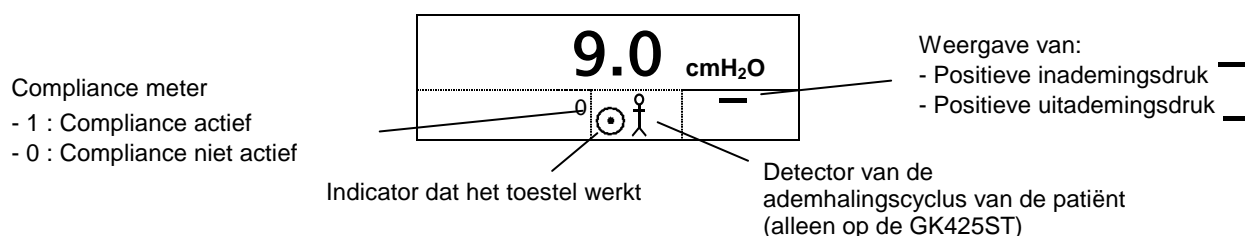

Figuur 8 - Weergave van display wanneer het apparaat werkt

OPMERKING

- De eenheid voor drukweergave wordt ingesteld door de arts: hPa of cmH₂O (hierboven).
- De compliancemeter wordt pas weergegeven als het apparaat 15 minuten werkt.

2. Zet het neusmasker op volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing. Als het een masker met uitlaat is, is er een opening waardoor de uitgeademde gassen afgevoerd worden en niet meer ingeademd kunnen worden. Als er een masker zonder uitlaat gebruikt wordt, moet uw arts u een uitlaatslang geven van Pirouette™ of équivalent waarmee de gassen zo dicht mogelijk bij de neus afgevoerd kunnen worden. **Adem normaal.**

WAARSCHUWING

Zorg dat de uitlaat van het masker nooit verstopt raakt, want hierdoor kan de lucht continue afgevoerd worden. Wanneer het apparaat werkt, jaagt de geproduceerde lucht de uitgeademde lucht weg door de uitlaat in het masker. Als het apparaat daarentegen niet werkt, zal er niet voldoende verse lucht geproduceerd worden in het masker en kan de uitgeademde lucht opnieuw ingeademd worden, wat in een aantal minuten en in sommige omstandigheden verstikkingsverschijnselen kan teweegbrengen.

3. Als u een verwarmde bevochtiger gebruikt, schakel deze dan in volgens de instructies in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
4. Als u zuurstof gebruikt, open dan nu de toevoer.

WAARSCHUWING

- Wanneer het apparaat werkt, controleert u of er lucht wordt toegevoerd. Als dat niet het geval is, schakelt u het apparaat direct uit en neemt u contact op met het ziekenhuis of uw thuiszorgleverancier.
- Bij een lagere druk kan de toevoer via de expiratiepoort onvoldoende zijn om alle uitgeademde gassen uit de slang te verwijderen. In dat geval kan enige uitgeademde lucht mogelijk opnieuw worden ingeademd.


De behandeling beëindigen


Wanneer het apparaat in werking is, dient u als volgt te werk te gaan om de behandeling te stoppen:

1. Als u zuurstof gebruikt, sluit dan nu de toevoer.
2. Als u een verwarmde bevochtiger gebruikt, schakelt u deze uit volgens de instructies in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Ontkoppel steeds de bevochtiger voordat u het apparaat uitschakelt.

LET OP

Na gebruik moet de bevochtiger van het apparaat ontkoppeld worden om te vermijden dat het vocht erin dringt.

3. Verwijder het neusmasker.
4. Schakel het apparaat uit door op de aan/uittoets te drukken . Het apparaat wordt dan op de waakstand gezet en het waakscherm geeft het uur aan:

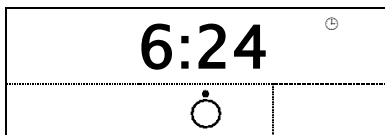

Gebruik van de ramp


De rampfunctie dient om de drukverhoging geleidelijk te laten verlopen. De druk van de patiënt wordt verlaagd tot de initiële rampdruk en vervolgens verhoogd tot de drukwaarden. Stel allereerst de aanvangsdruk van de ramp in op uw **GoodKnight 425**. Let daarbij op het volgende:

OPMERKING

Als de *ramp* tijd op nul ingesteld staat, kunt u deze aanvangsdruk niet wijzigen.


U kunt de druk aan het begin van de ramp afstellen op een waarde tussen 3 cmH₂O en de positieve uitademingsdruk die door uw arts is voorgeschreven. Met deze functie kunt u de druk zodanig aanpassen dat u rustig in slaap kunt vallen.

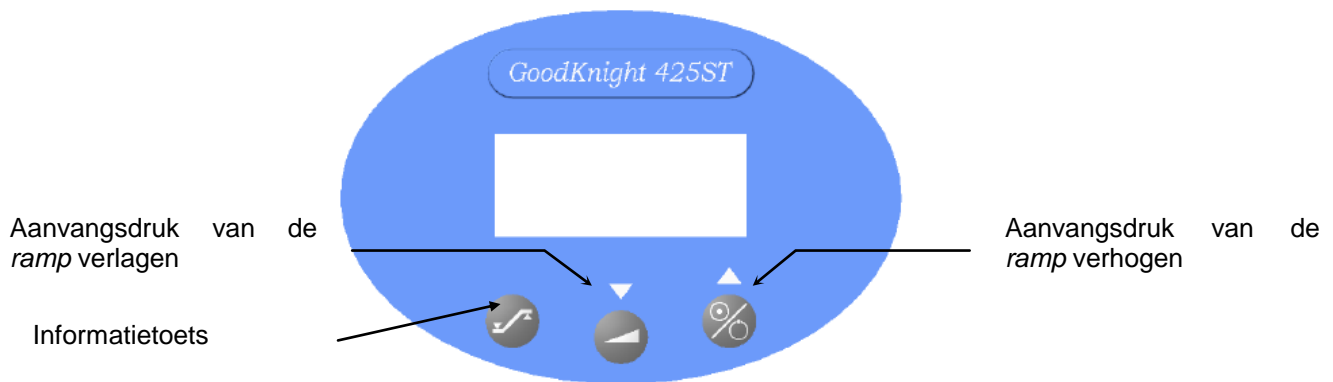

Om toegang te krijgen tot het menu voor de instelling van de parameters, volstaat het één seconde lang te drukken op de informatietoets die getoond wordt op Figuur 9 – Bedieningstoetsen hieronder; ongeacht of het apparaat werkt of in waakstand staat.



Figuur 9 – Bedieningstoetsen

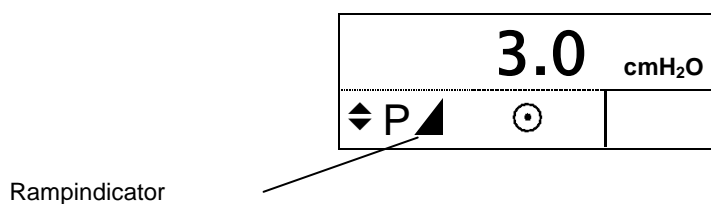
Vervolgens drukt u zoveel keren als nodig is op deze toets om het volgende display te tonen:



De initiële rampdruk kan dan worden verhoogd of verlaagd met de Aan/uittoetsen  en de *Ramp* .

De *ramp*functie dient om de drukverhoging geleidelijk te laten verlopen. Zo worden de drukwaarden verlaagd bij het begin van de behandeling om u te helpen bij het inslapen. U kunt deze functie ook gebruiken als u 's nachts opstaat en nadien moeite hebt om opnieuw in te slapen. De druktoenametijd tot de einddrukwaarden wordt door uw arts voorgeschreven. De druktoenametijd kan in het ziekenhuis of door uw thuiszorgleverancier worden afgesteld op een waarde tussen 0 (geen geleidelijke druktoename) en 30 minuten, in stappen van 5 minuten. De *ramp* kan op voorschrift van uw arts op 0 zijn ingesteld. In dat geval is de *ramp*functie niet actief en gebeurt er niets als u op de *ramptoets* drukt. Deze toets bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat (nr. 3 van Figuur 2 – Bovenaanzicht, blz. 105).

1. Om de *ramp* te starten hoeft u alleen maar op de *Ramptoets* te drukken wanneer het apparaat aan staat. De Rampindicator wordt op het display weergegeven en de druk blijft dalen tot een lage waarde, en stijgt dan geleidelijk tot het voorgeschreven drukniveau, zodat u niet wakker wordt. Het apparaat blijft normaal de hele nacht behandeldingsdrukwaarden leveren, tenzij u opnieuw op de *Ramptoets* drukt. In dat geval valt de druk opnieuw naar de door u geselecteerde begindruk van de *ramp*.
2. Om de *ramp* te beëindigen drukt u opnieuw op de *Ramptoets*. Hierdoor wordt de functie uitgeschakeld. U kunt de *ramp*functie opnieuw starten door nogmaals op de *Ramptoets* te drukken (de *ramp*indicator gaat branden wanneer u op de *Ramptoets* drukt).

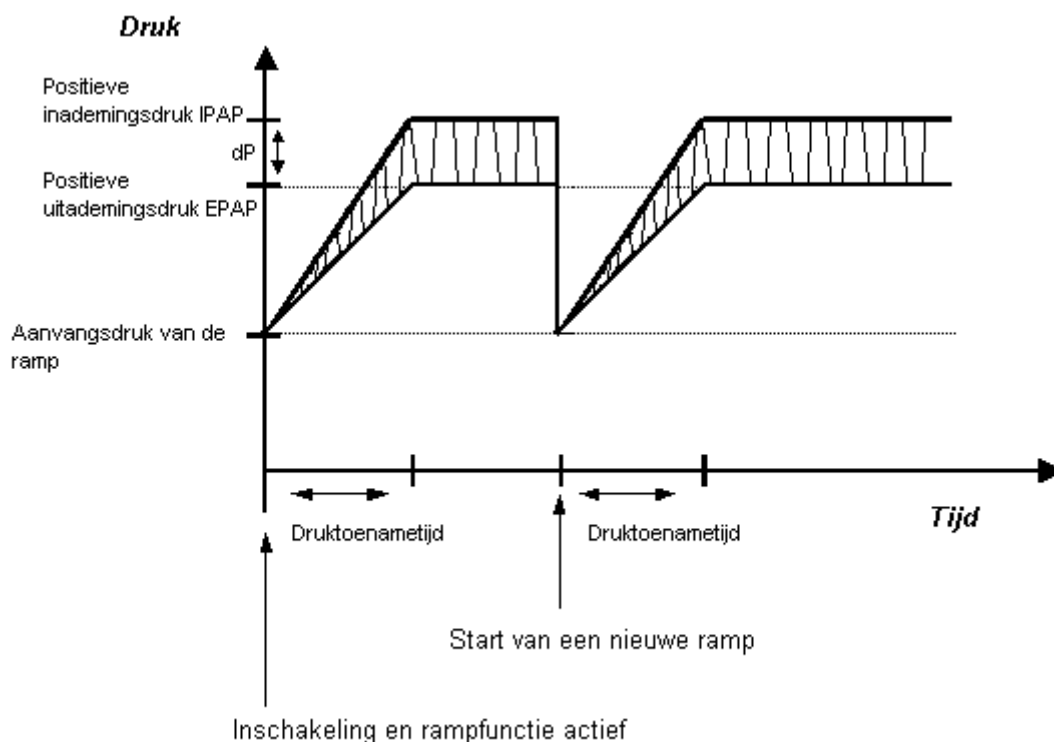

**Figuur 10 – Drukverloop in functie van de tijd
bij activering van de *ramp*functie**

Informatie op het apparaat

Op het display kunt u de verschillende instellingen van de **GoodKnight 425** aflezen (nr. 1 van Figuur 2 – Bovenaanzicht, blz. 105).

Deze informatie is zowel beschikbaar wanneer het apparaat in de wachtstand staat als wanneer het werkt. Druk **gedurende een seconde** op de informatietoets (nr. 2 van Figuur 2 – Bovenaanzicht, blz. 105). Bij iedere druk op de toets verschijnen er andere gegevens.


OPMERKING

Op de volgende displays wordt het apparaat weergegeven in werkingsmodus en alle weergegeven waarden gelden zuiver als voorbeeld.

Druk een
seconde op



Op het display staat:

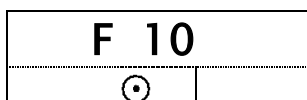


Beschermingsfrequentie van uw apparaat.

OPMERKING


Deze functie is alleen te verkrijgen op de **GoodKnight 425 ST**.

Druk op

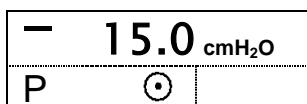


De ingestelde **Positieve inademingsdruk IPAP** van uw apparaat (hoge drukwaarde voor inademing).

Druk op

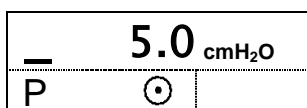


De ingestelde **Positieve uitademingsdruk EPAP** van uw apparaat (lage drukwaarde voor uitademen).


Druk op

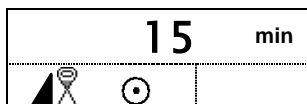


De ramptijd. Wordt door uw arts voorgeschreven (tijd die het apparaat nodig heeft om over te gaan van de initiële *ramp*druk naar de referentiedruk).

Druk op

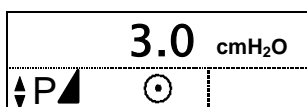

Rampaanvangsdruk (de druk bij het begin van de *ramp*). Deze waarde kunt u alleen instellen en op het display aflezen als de *ramptijd* groter dan 0 is. Het gebruikte symbool  geeft aan dat u deze aanvangsdruk kunt aanpassen. U kunt de aangegeven waarde verhogen of verlagen met behulp van de toetsen Aan/uit en *Ramp*. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk “Gebruik van de ramp” op blz. 13.

Druk op

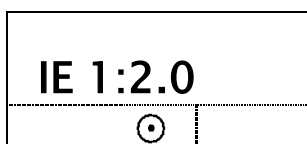


De verhouding I/E (verhouding inademingstijd / uitademingstijd).

OPMERKING

Deze functie is alleen te verkrijgen op de *GoodKnight 425 ST*.

Druk op

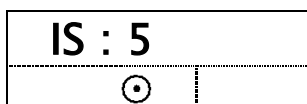


De inademingsgevoeligheid ingesteld door de arts (detectiegevoeligheid van de inademingsfase van de ademhaling).

Druk op



De uitademingsgevoeligheid ingesteld door de arts (detectiegevoeligheid van de uitademingsfase van de ademhaling).

Druk op

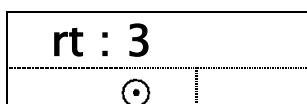


De druktoenametijd ingesteld door de arts (de tijd die het apparaat nodig heeft om van de positieve uitademingsdruk over te gaan op de positieve inademingsdruk).

Druk op




Urenteller (de tijd dat het apparaat in werking is). De getoonde waarden rechtsonder op het display stellen de minuten voor.

Druk op

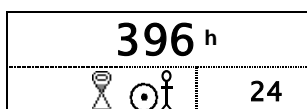

De bedieningstijd (de tijd dat u met het masker heeft geademd). De getoonde waarden rechtsonder op het display stellen de minuten voor.


Druk op

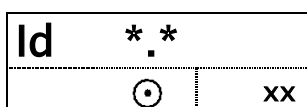


De versie van de ingebouwde software van de GoodKnight 425. Het versienummer wordt met twee cijfers aangegeven (*), het display kan bijvoorbeeld weergeven: Id 1.0.

Om het menu van de instellingsfuncties te verlaten drukt u opnieuw op de informatietoets.

Daarop geeft het display de stand van uw apparaat aan (de aangegeven waarden gelden slechts als voorbeeld).

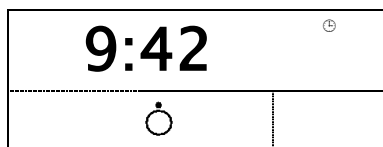

Het apparaat staat in de
wachtstand.

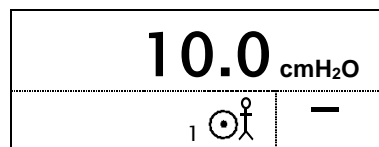


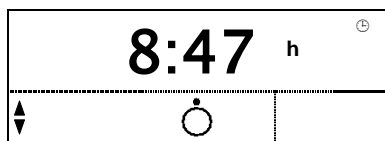
Het apparaat werkt.

OPMERKING

Het instellingsmenu wordt automatisch afgesloten als u gedurende minstens 30 seconden op geen enkele toets drukt.

Tijdstelling

U kunt de tijd alleen instellen wanneer het apparaat in de wachtstand staat. Hiervoor drukt u gedurende één seconde op de *ramptoets* (nr. 3 van Figuur 2 – Boven aanzicht, blz. 105), dan gelijktijdig op de *aan/uittoets* (nr. 4 van Figuur 2 – Boven aanzicht, blz. 105). Als de toetsen losgelaten worden, verschijnt het afstellingssymbool  onder het uur, zoals getoond op het volgende display:



De letter h die het uur aangeeft knippert, en u kunt het dan afstellen door met de toetsen *Ramp* en *Aan/uit*.

Om over te schakelen naar de minuten aanduiding drukt u op de informatietoets. De minuten beginnen te knipperen en kunnen ook worden gewijzigd. Druk nogmaals op de informatietoets om het menu te verlaten.

OPMERKING

Het instellingsmenu wordt automatisch afgesloten als u gedurende minstens 30 seconden op geen enkele toets drukt.

ONDERHOUD EN REINIGING

Om uw apparaat **GoodKnight 425** veilig en efficiënt te kunnen gebruiken, dient u alle onderhoudsinstructies op te volgen.

GoodKnight 425

De behuizing van het apparaat vereist geen bijzonder onderhoud. Zo nodig kunt u het apparaat schoonmaken met een doek die u met wat warm zeepwater vochtig maakt. Droog het apparaat goed af.

WAARSCHUWING

- **Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als u het gaat schoonmaken.**
- **Gebruik geen *spray*. Er blijven namelijk gemakkelijk *sprayresten* in de luchtinlaatfilters, in het schuimfilter of aan de binnenzijde van het apparaat achter. De chemische stoffen in zulke *sprayresten* kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.**

Het is bovendien raadzaam om de druk van het apparaat minstens eenmaal per jaar te laten controleren

Luchtinlaatfilters

Vervang de filters zodra ze scheurtjes vertonen of vuil worden (nr. 9 van Figuur 4 - Achteraanzicht, blz. 105).

Reinig het uitwendige schuimfilter ten minste éénmaal per week, en zo nodig meerdere keren per week. Doe dat als volgt:

1. Maak het filter schoon met warm zeepsop.
2. Spoel het overvloedig af, zodat er geen zeepresten achterblijven.
3. Wikkel het filter in een badstof handdoek en druk het geheel voorzichtig aan.
4. Laat het filter volledig drogen voordat u het terugplaatst.
5. Breng het filter weer aan op de achterzijde van het apparaat.

Het witte stoffen filter (dat niet standaard meegeleverd wordt met de apparatuur, maar als optionele accessoire verkrijgbaar is) kan niet worden gewassen. Dit stoffen filter dient minimaal eens per maand te worden verwisseld, of vaker indien zichtbaar verstopt.

Slang

Instructies voor het onderhoud van de slang vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Neusmasker

Instructies voor het onderhoud van het neusmasker vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Bevochtiger

Instructies voor het onderhoud van de bevochtiger vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	VERMOEDELIJKE OORZAAK	ADVIES
Last van een mogelijk te hoge druk.	Druk van de <i>GoodKnight</i> 425.	Wennen aan de druk op de neus vergt wat tijd. Probeer de <i>ramp</i> functie te gebruiken op het moment dat u gaat slapen (zie hoofdstuk “Gebruik van de ramp” op blz. 13). Ontspan u en adem langzaam door de neus in.
Het apparaat levert niet de juiste druk. (display).	De drukslang is niet aangesloten. Er is vocht in de slang voordrukmeting gedrongen. De <i>ramp</i> functie is geactiveerd.	Controleer of de kleine slang voor drukmeting correct op het apparaat is aangesloten. Maak de kleine slang droog. Sluit daarvoor de geribbelde slang op de machine aan terwijl u de kleine slang losmaakt. Sluit de grote slang met de hand af en start de machine. Herhaal zo nodig deze werkwijze. Controleer of de <i>ramp</i> indicator aan is. Druk op de <i>ram</i> ptoets om de functie te annuleren (nr. 3 van Figuur 2 – Boven aanzicht, blz. 105). De drukwaarden werden voorgeschreven door uw arts en mogen alleen op medisch advies worden veranderd.
Droge of geïrriteerde keel of neus.	De lucht is te droog.	Verhoog de luchtvochtigheid in de slaapkamer met behulp van een bevochtiger. Wend u tot uw behandelend arts of uw thuiszorgleverancier om een bevochtiger te krijgen.
Koude neus.	De kamertemperatuur is te laag afgesteld.	Verwarm de kamer of voer de slang onder het dekbed / de dekens om warmteverlies te beperken.
Lopende neus.	Reactie op de luchttoevoer en op de drukwaarden.	Stop de behandeling en raadpleeg het medisch-technisch team of uw arts.
De aangevoerde lucht is te warm.	De luchtinlaatfilters kunnen vuil zijn. De luchtinlaat is verstopt. De kamertemperatuur is te hoog.	Reinig of vervang de filters (zie hoofdstuk “Onderhoud en reiniging” op blz. 19). Zorg dat er bijvoorbeeld geen beddengoed of kleding over de <i>GK425</i> hangt. Stel de thermostaat op een lagere temperatuur af. Controleer of de <i>GK425</i> niet te dicht bij een warmtebron staat. Haal de slang onder het beddengoed vandaan.
Pijn in de neus, de bijholtes of de oren.	Infectie van de bijholtes of verstopte neus.	Stop de behandeling. Raadpleeg onmiddellijk uw behandelend arts.
Droge of geïrriteerde ogen.	Er ontsnapt lucht rondom het masker.	Breng het masker opnieuw op zijn plaats aan. Vraag aan uw behandelend arts of uw thuiszorgleverancier of u een beter passend masker kunt proberen.

PROBLEEM	VERMOEDELIJKE OORZAAK	ADVIES
Roodheid van de huid rond het masker.	De hoofdband zit te strak aangetrokken of het masker is te klein. Allergische reactie op het materiaal van het masker.	Stel de hoofdband opnieuw af. Neem contact op met uw behandelend arts of uw thuiszorgleverancier om maskers in verschillende maten te proberen. Stop de behandeling met het masker en raadpleeg uw voorschrijvend arts of uw thuiszorgleverancier.
Terugkeer van de eerste symptomen van het Slaap Apneu Syndroom.	De GK425 is niet op de juiste drukwaarden ingesteld of werkt niet naar behoren. Uw lichaamsconditie of de druk die nodig is voor de behandeling, is gewijzigd.	Vraag aan uw behandelend arts of thuiszorgleverancier of de werking van de GK425 kan worden nagekeken. Neem contact op met uw voorschrijvend arts.
Het display van de <i>GoodKnight</i> 425 werkt niet.	De voeding is niet correct aangesloten. De netspanning is uitgevallen. De zekering is doorgebrand.	Controleer de aansluitingen tussen de voeding, het apparaat GK425 en het stopcontact. Haal de stekker even uit het stopcontact en steek hem er dan weer in. Controleer met een ander elektrisch apparaat (bijv. lamp, radio) of er wisselspanning op het stopcontact zit. Neem contact op met de thuiszorgleverancier.
De <i>GoodKnight</i> 425 werkt niet naar behoren en lijkt ontregeld te zijn.	Te grote elektromagnetische storingen	Zorg dat er in de buurt van het apparaat geen storingsbronnen voorkomen, zoals halogeenlampen of zaktelefoons.
Foutmelding In 1	Er werd een aanzienlijke lekkage (ontkoppeling) gedetecteerd in het patiëntencircuit die langer dan 30 seconden heeft geduurd.	Het bericht verdwijnt zodra het masker goed aangesloten is of als u tweemaal drukt op de aan/uittoets. Anders moet u het patiëntencircuit controleren.
Foutmelding In 2	Er is gedurende minstens 10 seconden een overdruk geregistreerd.	Controleer of de kleine slang correct op de drukaansluiting is aangesloten. Controleer of de slang niet dichtgeklemd zit en of de slang goed schoon en droog is (zie de gebruiksaanwijzing van het patiëntencircuit).
In 3 verschijnt op het display.	Daling van de stroomspanning.	Controleer de aansluitingen tussen de voeding, het apparaat en het stopcontact. Ontkoppel de voeding en sluit deze dan weer aan op het net Als het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met de thuiszorgleverancier. Controleer de batterij en vervang deze zo nodig. Als het bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de thuiszorgleverancier.

PROBLEEM	VERMOEDELIJKE OORZAAK	ADVIES
In 4 verschijnt op het display.	Er werd een te hoge frequentie gedetecteerd.	Druk tweemaal op de toets “Aan/uit” van de <i>GK425</i> . Controleer of de patiëntencircuits aangesloten zijn. Als het bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de thuiszorgleverancier.
Er XX wordt weergegeven op het display. (waarbij XX = 2 cijfers).	Het apparaat heeft een fout ontdekt in de werking.	Neem contact op met de thuiszorgleverancier.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bereik van het apparaat

Drukbereik van de *GoodKnight 425*:

3 cmH₂O - 25 cmH₂O ± 1 cmH₂O
Regelbaar in stappen van 0,5 cmH₂O
36 cmH₂O

Maximale druk bij de inlaat
patiëntaansluiting en eerste standaardwaarde:

Ramptijd:

0-30 minuten ± 1 minuut
Regelbaar in stappen van 5 minuten

Aansluitgat Inlaat patiëntzijde:

Geluidsniveau gemeten volgens EN ISO 17510-1:2002:

buis met doorsnede van 22 mm

Geluidsniveau gemeten volgens EN ISO 17510-1:2009:

< 29 dB(A)

Levensduur van de batterij die op de kaart gesoldeerd is:
(volgens de gegevens van de constructeur)

< 31 dB(A)

5 jaar

Gewicht en afmetingen

Afmetingen (B x H x D):

144 x 79 x 198 mm (zonder voeding)

Gewicht:

0,780 kg (zonder voeding)

Transport en opslag

Temperatuur:

-20°C tot +60°C

Relatieve vochtigheid:

tot 95% zonder condensatie

Relatieve druk:

500 hPa tot 1060 hPa

Gebruik

Temperatuur:

+5°C tot +40°C

Relatieve vochtigheid:

tussen 15% en 95% zonder condensatie

Relatieve druk:

700 hPa tot 1060 hPa

Hoogtebereik:

0 – 2400 m ongeveer

Elektrische kenmerken van de voeding

Voeding van klasse II:



Voedingsspanning: 100 – 240 VAC (-15%, +10%), 50 / 60 Hz (±1 Hz).

Vermogen of invoerstroom: 1,5 A

Outputspanning: 13 V – 4 A

Geleverde voedingsmodule: ONTOP Model SA165A – 125OU-3.

LET OP

- Gebruik uitsluitend de aansluitbare voeding die met het apparaat geleverd wordt.
- Het is niet de bedoeling dat een defecte voeding hersteld wordt. Als deze uitvalt, neemt u contact op met de thuiszorgleverancier voor een vervanging.


Elektrische kenmerken van het apparaat

Voedingsspanning: 13 V – 3 A.

Maximum verbruiksvermogen: 40 W zonder bevochtiger

Verbruikte stroom bij 25 cmH₂O met een uitlaat van 4 mm: 1,1 A.

Gelijkstroom

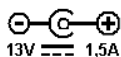

Stroomstekker / Accuaansluiting 13 V

Symbolen



Aan/uit



Informatie



Ramp



Seriële aansluiting PC



Waarde van de instelling verhogen



Waarde van de instelling verlagen



Output

IPX1

Apparaat beschermd tegen vertikaal vallend water



Apparaat type BF.



In overeenstemming met de vereisten van de Europese Richtlijn 2002/96/EC Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE), moeten oude apparaten gescheiden ingezameld worden van het afval. Neem contact op met de Service Provider van uw land.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat gebruikt.

CE 0459

Dit apparaat voldoet aan de Richtlijnen 93/42 CEE voor Medische Toestellen.

Wettelijke voorschriften

De aan dit medische hulpmiddel verbonden risico's en met name het algehele restryrisico werden geëvalueerd overeenkomstig de norm ISO 14971:2007

Essentiële prestatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit

Tijdens de tests voor de elektromagnetische compatibiliteit mogen de instellingen van het apparaat niet gewijzigd worden en moet de voorgeschreven druk van het apparaat op de ingestelde waarde $\pm 0,5$ cm H₂O blijven.

De op de uitrusting aangesloten computer moet de druk op constante wijze weergeven. De communicatie kan af en toe uitgeschakeld worden maar het apparaat moet op constante wijze blijven werken en kan opnieuw op de computer worden aangesloten

Elektromagnetische emissies			
De GoodKnight 425/425ST apparaten werden ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De klant of de gebruiker van een GoodKnight 425/425ST apparaat dient te controleren of het apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving gebruikt wordt .			
Emissietest	Conformiteit	Aanbevolen elektromagnetische omgeving	
RF Emissies CISPR 11	Groep 1	De GoodKnight 425/425ST apparaten gebruiken uitsluitend RF energie voor de interne functie. De RF-emissie van de apparaten is daarom uiterst laag en veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid geen storingen in de buurt van elektronische apparatuur.	
RF Emissies CISPR 11	Klasse B	De GoodKnight 425/425ST apparaten zijn geschikt voor gebruik binnen alle instellingen, waaronder instellingen met een woonfunctie en instellingen die rechtstreeks op een laagspanningsnetwerk zijn aangesloten dat gebouwen met een woonfunctie van stroom voorziet.	
Harmonische emissies CEI 61000-3-2	Klasse A		
Voltagefluctuaties/ Flikkeremissies CEI 61000-3-3	Conform		
Elektromagnetische immuniteit			
De GoodKnight 425/425ST apparaten werden ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De klant of de gebruiker van een GoodKnight 425/425ST apparaat dient te controleren of het apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.			
Immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Conformiteitsniveau	Aanbevolen elektromagnetische omgeving
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV bij contact ± 8 kV in de lucht	± 6 kV bij contact ± 8 kV in de lucht	De vloeren dienen van hout, beton of keramische tegels te zijn. Als de vloerbedekking bestaat uit synthetisch materiaal, dient de relatieve vochtigheid minstens 30% te bedragen.
Snelle elektrische transiënten en lawines IEC 61000-4-4	± 2 kV voor voedingskabels ± 1 kV voor ingangs-/uitgangslijnen	± 2 kV voor voedingskabels ± 1 kV voor ingangs-/uitgangslijnen	De netvoedingskwaliteit dient die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn.
Bliksem IEC 61000-4-5	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gewone modus	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gewone modus	De netvoedingskwaliteit dient die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn.
Spanningsdalingen, onderbrekingen en fluctuaties van de stroomvoorziening. IEC 61000-4-11	< 5% U _T (>95% daling in U _T) gedurende 0,5 cycli 40% U _T (60% daling in U _T) gedurende 5 cycli	< 5% U _T (>95% daling in U _T) gedurende 0,5 cycli 40% U _T (60% daling in U _T) gedurende 5 cycli	De netvoedingskwaliteit dient die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn. Indien de behandeling van de gebruiker van een GoodKnight 425/425ST apparaat tijdens de onderbrekingen van de netvoeding door moet gaan , wordt aangeraden om het apparaat

Elektromagnetische immuniteit (vervolg)

	70% U_T (30% daling in U_T) gedurende 25 cycli < 5% U_T (>95% daling in U_T) gedurende 5 s	70% U_T (30% daling in U_T) gedurende 25 cycli < 5% U_T (>95% daling in U_T) gedurende 5 s	GoodKnight 425/425ST aan te sluiten op een accu of een stroombron die niet onderbroken kan worden.
Magnetische velden in de netfrequenties (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	De magnetische velden met hoge frequenties dienen die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn.

Opm.: U_T betreft de spanning van de netvoeding voorafgaand aan de instelling van het testniveau.

Elektromagnetische immuniteit - Geleide en uitgestraalde RF

De **GoodKnight 425/425ST** apparaten werden ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder beschreven. De klant of de gebruiker van een **GoodKnight 425/425ST** apparaat dient te controleren of het apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Conformiteitsniveau	Aangeraden elektromagnetische omgeving
Geleide Radiofrequentie IEC 61000-4-6	3 V rms 150 kHz tot 80 MHz	3 V rms 150 kHz à 80 MHz	Draagbare en mobile RF communicatieapparatuur mag niet in de nabijheid bij de onderdelen van een GoodKnight 425/425ST apparaat of de bijbehorende kabels worden geplaatst. Aanbevolen scheidingsafstand: $d = 1,2\sqrt{P}$
Uitgestraalde Radiofrequentie IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz tot 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz

P staat voor het nominale maximumvermogen van de zender in Watt (W) volgens de gegevens van de fabrikant en volgens de frequentie van dezelfde zender en d staat voor de aanbevolen scheidingsafstand in meters (m).

De veldsterktes van vaste RF zenders, zoals bepaald door een overzicht van het elektromagnetische veld, ^a, dienen lager te liggen dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik ^b.

Elektromagnetische interferentie kan voorkomen in de nabijheid van apparatuur waarop het volgende symbool wordt weergegeven:



OPM. 1: Bij 80 MHz en 800 MHz, geldt het hoogste frequentiebereik.

OPM. 2: Deze richtlijnen kunnen op sommige situaties niet van toepassing zijn. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen.

^(a) Veldsterktes van stationaire zenders, zoals basisstations van draadloze telefoons, mobiele radio's, 27MC, AF- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet precies worden voorspeld. Raadpleeg een overzicht van het elektromagnetische veld om de elektromagnetische omgeving veroorzaakt door stationaire zenders te evalueren. Indien de gemeten veldsterkte op de plek waar een apparaat **GoodKnight 425/425ST** gebruikt moet worden boven het hierboven weergegeven RF niveau uitkomt, moet het apparaat **GoodKnight 425/425ST** in de gaten gehouden worden om te controleren of het normaal functioneert. Als u constateert dat het apparaat niet normaal functioneert, kan het nodig zijn het apparaat **GoodKnight 425/425ST** anders te richten of te verplaatsen

^(b) Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, dienen de veldsterktes minder dan 3 V/m te bedragen.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het apparaat van de reeks GoodKnight 425/425ST

De **GoodKnight 425/425ST** apparaten zijn bedoeld voor gebruik in een omgeving waarin RF-stralingsstoornissen beheerst worden. De klant of de gebruiker van een **GoodKnight 425/425ST** apparaat kan elektromagnetische storingen helpen voorkomen door een minimale scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het **GoodKnight 425/425ST** apparaat te handhaven zoals hieronder wordt aangeraden, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominiaal maximaal uitgangsvermogen van de zender (W)	Scheidingsafstand in overeenstemming met de frequentie van de zender (m)		
	150 kHz tot 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz tot 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz tot 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Voor zenders waarvan het nominale maximale uitgangsvermogen niet hierboven wordt weergegeven, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) bepaald worden via de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender waarbij P overeenkomt met het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de opgave van de fabrikant van de zender.

OPM. 1: Bij 80 MHz en 800 MHz, geldt de scheidingsafstand voor het hoogste frequentiebereik.

OPM. 2: Deze richtlijnen kunnen op sommige situaties niet van toepassing zijn. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen.

Geschikte kabels

Let op

Het gebruik van accessoires en kabels die niet in onderhavig document vermeld worden, kan leiden tot een verhoging van de emissies of een verlaging van de immuniteit van de **GoodKnight 425/425ST** apparaten.

M-213930-04 Kabel RS232 2m GoodKnight 425	6,5 ft (2m)
M-213930-06 Kabel RS232 15m GoodKnight 425	50 ft (15m)

Coordonnées de votre Prestataire de Services

Anschrift Ihres Kundendienstes

Dati della società di assistenza domiciliare

Adres van uw ziekenhuis of thuiszorgleverancier



**Fabricant, Hersteller, Fabbricante,
Fabrikant :**

SEFAM
144 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FRANCE

**Site de fabrication, Herstellungsort, Sito
di produzione, Productievestiging:**

SEFAM
10 ALLEE PELLETIER DOISY
54600 VILLERS-LES-NANCY
FRANCE